



MASSAGE SEAT
TATAKI MOMI DMA

製造番号

取扱説明書

保証書付

添付文書

保管用

管理医療機器：家庭用電気マッサージ器

マッサージシート タタキもみDMA ADE01

もくじ

安全上のご注意	2～3
各部の名称とはたらき	4～5
ご使用前の準備	6
コースでマッサージする	7～8
お好み機能でマッサージする	9～11
保管について	12
本体のお手入れ	12
首肩カバーのお手入れ	12
故障かなと思ったら	13
仕様	14
保証書	16



※デザイン仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。

この度はADE01をお買上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
なお、この取扱説明書には保証書がついています。
お読みになられたあとも、大切に保管してください。

ALEX

安全上のご注意

ご使用になる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために必ずお守りいただくことを次に説明しています。

警告表示の意味

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で示しています。

警告

この表示の欄は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

注意

この表示の欄は、「損害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

禁止を促す記号






禁止


強制を促す記号





必ず守る


警告


-  次の人は使用しないでください。
症状を悪化させるおそれがあります。
・医師からマッサージを禁じられている人
例: 血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈瘤、
急性静脈瘤、各種皮膚炎、皮膚感染症
-  幼児や小さいお子様に使用させたり、本体で遊ばせたり、上にのせたりしないでください。
思わぬ事故の原因になります。
-  使用前に、マッサージ部の縫製破れがないかを確認してください。
破れている場合は使用しないでください。
また、カバーを外して使用しないでください。
思わぬ事故の原因になります。


 改造はしないでください。また、修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理をしないでください。
火災・感電・けがの原因になります。


 お腹や胸、頭部やのどには使用しないでください。
事故や体調不良の原因になります。


 マッサージ以外の用途に使用しないでください。
事故やけがの原因になります。


 本体を布団やコタツの中に入れて使用しないでください。
禁止 事故・感電・低温やけどのおそれがあります。


 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。
禁止 感電・ショート・火災の原因になります。

 自分で意思表示のできない方や身体の不自由な方には使用させないでください。
禁止 けがの原因になります。

 他の治療器と同時に使用しないでください。
禁止 健康を害するおそれがあります。


 首周辺をマッサージする時は、もみ玉の動きに注意してください。また、首の前方はマッサージしないでください。
禁止 事故やけがのおそれがあります。


 もみ玉面に勢いよく体をあてないでください。
禁止 事故やけがのおそれがあります。


 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込がゆるいときは使用しないでください。
禁止 感電・ショート・火災の原因になります。


 ピンなど鋭いものを本体に入れないでください。
禁止 故障や事故の原因になります。


 ヒーターは医療用途に使用しないでください。
禁止 健康を害するおそれがあります。


 身体にアクセサリなど硬いものをつけて使用しないでください。
禁止 事故やけがのおそれがあります。

 マッサージ器の上に寝た状態で使用しないでください。
禁止 負荷がかかりすぎ、事故やけがのおそれがあります。

 保管の際は、マッサージ部の上に物を置かないでください。
禁止 故障や事故の原因になります。

 持ち手を強く引っ張ったり、振り回さないでください。
禁止 思わぬ事故やけがのおそれがあります。

 使用中は眠らないでください。
禁止 無意識での使用は身体への異常やけがの原因になります。

 キャスター付の椅子や回転椅子では使用しないでください。
禁止 本器が倒れて事故やけがのおそれがあります。

! 次のような人は必ず医師とご相談の上ご使用ください。

- 必ず守る**
- ・ 事故や健康を害するおそれがあります。
 - ・ ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人
 - ・ 温度感覚喪失が認められる人
 - ・ 悪性腫瘍のある人
 - ・ 心臓に障害のある人
 - ・ 妊娠初期の不安定期または出産直後の人
 - ・ 背骨に異常のある人や曲がっている人
 - ・ 糖尿病などによる高度な末しょう(梢)循環障害からくる知覚障害のある人
 - ・ 皮膚に創傷のある人
 - ・ 安静を必要としている人や体調がすぐれない人
 - ・ 骨粗しょう症の人、せきついの骨折、ねんざ、肉離れなど、急性[とう(疼)痛性]疾患の人
 - ・ 体温38℃以上(有熱期)の人
 - 例：急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期、衰弱しているとき
 - ・ その他、医療機関で治療中の人

! 使用中身体に異常を感じたときはすぐに使用を中止し、医師に相談してください。

必ず守る 健康を害するおそれがあります。

! 1日の使用時間は1回15分、合計30分以内でご使用ください。また、同一箇所への連続使用は避けてください。

必ず守る 長時間のご使用は、健康を害するおそれがあります。

! 故障を発見したときはすぐに使用を中止し電源を切ってください。

必ず守る 事故やけがの原因になります。

! 電源は交流用100V専用コンセントを使用してください。

必ず守る 火災やけがの原因になります。

! お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。

必ず守る 感電やけがの原因になります。

! 故障した場合には、勝手に修理などせず、販売元または製造販売元に連絡してください。

必ず守る 事故やけがの原因になります。

! この機器は表面が熱くなるため、熱に敏感でない人は十分注意を払って使用してください。

必ず守る 低温火傷のおそれがあります。

! 使用しても効果が現れない場合は医師または専門家に相談してください。

必ず守る 事故や健康を害するおそれがあります。

! 停電のときはすぐに電源を切ってください。

必ず守る 感電・ショート・火災の原因になります。

! 注意

! 浴室など湿気が多い場所では使用・保管しないでください。また、水などの液体がかからないようにしてください。

禁止 感電や故障の原因になります。

! 本体やもみ玉の上に横になったり、座ったりして使用しないでください。

禁止 けがや故障の原因になります。

! 本体に強い衝撃や荷重をあたえないでください。

禁止 故障や事故の原因になります。

! 布団の中や、毛布などをかぶせて使用しないでください。

禁止 本体内部が高温になる可能性があります。

! もみ玉面を下にして、動作させないでください。

禁止 故障の原因となります。

! もみ玉やエアバッグに故意に力を加えて無理に止めないでください。

禁止 けがや故障の原因となります。

! 投げたり、落としたりしないでください。

禁止 破損や故障の原因になります。

! 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端のプラグを持って引き抜いてください。

必ず守る 感電・ショート・発火の原因になります。

! 使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。

必ず守る 絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。

! 初めてご使用の際は、弱の設定からご使用ください。

必ず守る 事故やけがのおそれがあります。

! ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みのうえ、正しくご使用ください。

必ず守る 事故やけがの原因になります。

! 商品は、定期的に点検してください。

必ず守る 事故やけがの原因になります。

! 本製品は家庭用です。病院等での治療用機器ではありませんのでご注意ください。


必ず守る 事故やけがの原因になります。

! 使用前後には点検を行い、故障又は異常が認められた場合は、お買い上げの販売店、又は製造販売業者までご連絡ください。


必ず守る 事故やけがの原因になります。

各部の名称とはたらき


本体

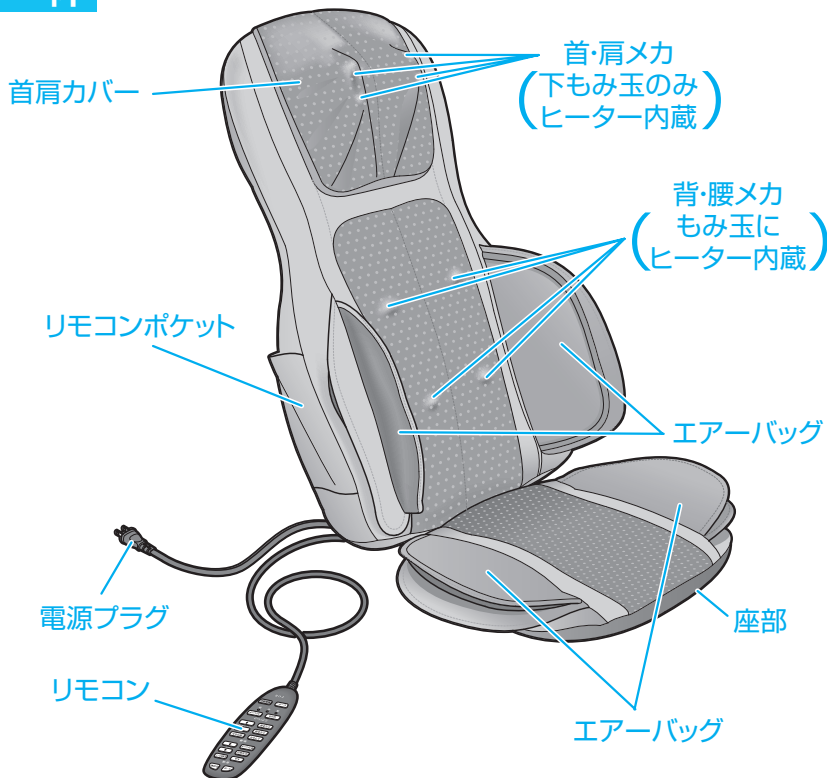

リモコン

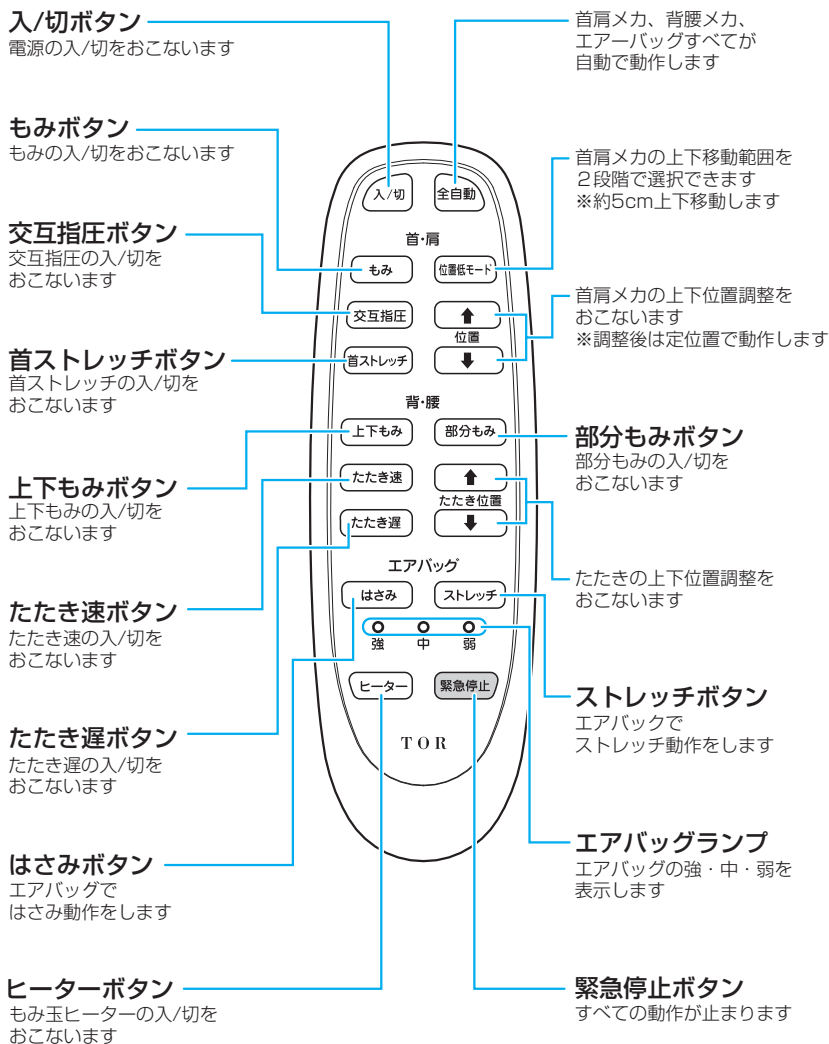

ご使用前の準備
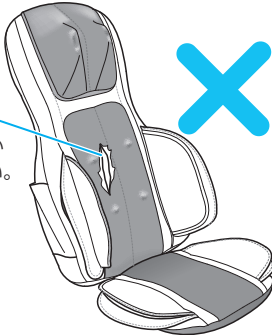
<p>⚠ 注意</p>	<p>使用前の注意事項</p> <ul style="list-style-type: none">• 使用前にマッサージ部の縫製破れがないか確認してください。破れている場合は使用しないでください。• 使用前にリモコンの操作ボタンやタイマーが正常に動作するか、確認して使用してください。• しばらく使用しなかった場合、もう一度取扱説明書をよく読み、機器が正常にまた、安全に動作することを確認してから使用してください。 <p>マッサージ部 縫製破れがないか確認してください。</p> 
--------------------	---

● 設置する

- 使用する際は、本体を椅子やソファなどの安定した場所に置いてください。
※椅子やソファなどに傷が付く恐れがある場合は、必ず本機との間に、傷防止用に敷物を敷いて使用してください。

- 椅子で使用する際は、固定用ベルトを椅子の背もたれに固定して使用してください。
※本機が倒れて事故やけがのおそれがあります。



<p>⚠ 注意</p>	<ul style="list-style-type: none">● キャスター付の椅子や回転椅子では使用しないでください。 本器が倒れて事故やけがのおそれがあります。● 本体を寝かせて、マッサージ器の上に寝た状態で使用しないでください。 負荷がかかりすぎ、事故やけがのおそれがあります。
--------------------	--

コースでマッサージする

1 電源プラグをコンセントに差し込む


正しく確実に差し込んでください。

2 「入/切」ボタンを押して電源を入れる

- 「入/切」ボタンが点灯し、電源が入ります。
※もう一度押すと電源が切れます。


3 「全自動」ボタンを押し、動作を開始する

- 「全自動」ボタンが点灯します。
※首肩メカの位置が高いと感じる場合は「位置低モード」ボタンを押し、上下移動範囲を低くします。
位置が低いときは点灯します。

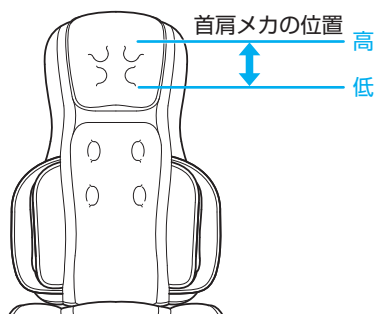

4 もみ玉ヒーターの設定


- コース動作中、お好みでもみ玉ヒーターを使用することができます。
- 「ヒーター」ボタンを押すたびに、もみ玉ヒーターを入/切することができます。
- ヒーター使用中は「ヒーター」ボタンが点灯します。

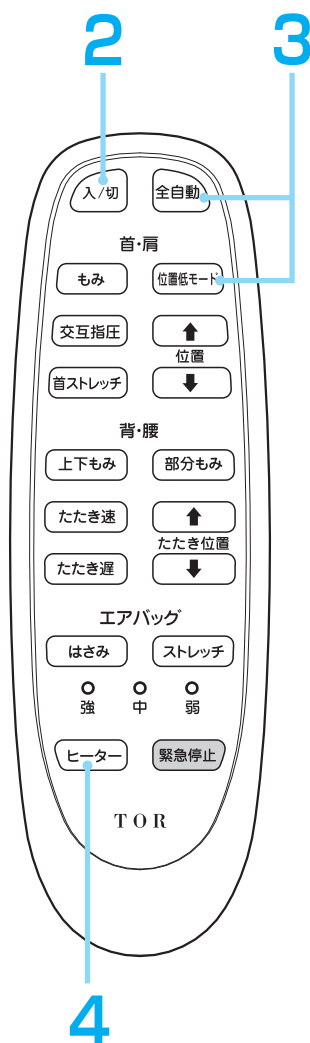

コースでマッサージする

5 エアバッグの強弱調節

- コース動作中、お好みでエアバッグの強さを調節することができます。「はさみ」ボタンを押すことで、中→強→弱(繰り返し)と強さが切り替わります。

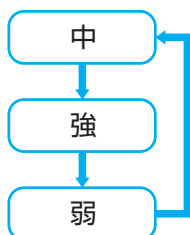


6 お好み機能動作への切り替え

- 全自動動作中、「首・肩」、「背・腰」ボタンを押すとお好み動作へ切り替わります。
- お好み動作中、「全自動」ボタンを押した場合はもみ玉は一旦原点復帰をしてから全自動動作が始まります。

7 停止のしかた

- 「入/切」ボタンを押すとすべての動作が止まり、原点復帰をします。
- 「緊急停止」ボタンを押してすべての動作をその場で止めることもできます。再び動作をさせる場合は「入/切」ボタンを押して原点復帰をさせてください。
- 「入/切」ボタン、「緊急停止」ボタンを押さない場合はタイマーが働き、15分ですべての動作が自動停止します。

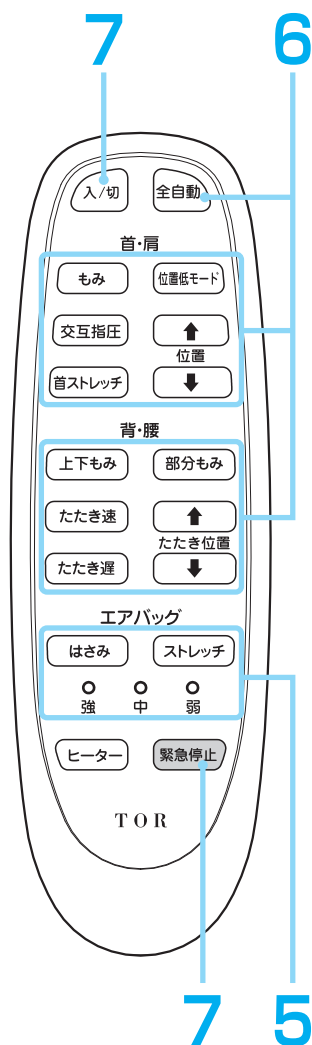

お好み機能でマッサージする(首・肩)

1 「入/切」ボタンを押して電源を入れる

- 「入/切」ボタンが点灯し、電源が入ります。
※もう一度押すと電源が切れます。

2 首肩をマッサージする

- 「もみ」、「交互指圧」、「首ストレッチ」のいずれかのボタンから選択して、首、肩をマッサージしてください。

(首肩もみ)

- 「もみ」ボタンを押すと、「もみ」ボタンが点灯し、動作を開始します。
約5cm上下移動しながら動作をします。

(首肩交互指圧)

- 「交互指圧」ボタンを押すと、「交互指圧」ボタンが点灯し、動作を開始します。
約5cm上下移動しながら動作をします。

(首ストレッチ)

- 「首ストレッチ」ボタンを押すと、「首ストレッチ」ボタンが点灯し、動作を開始します。
約5cm上下移動しながら動作をします。




「もみ」「交互指圧」「首ストレッチ」は、併用することができません。

首肩メカの位置調整をする

- 「首肩メカの位置が高いと感じる場合は「位置低モード」ボタンを押し、上下移動範囲を低くします。
- 「もみ」「交互指圧」動作中に上下移動させずに定位置でマッサージしたい場合は「↑」「↓」ボタンを長押しして調整してください。

※調整後は上下移動せずに定位置で動作します。定位置で動作中は「↑」「↓」ボタンが点滅します。

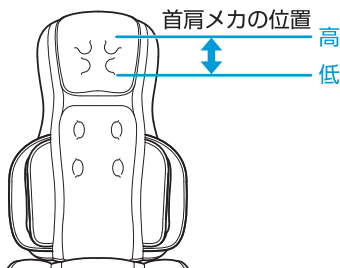

お好み機能でマッサージする(背・腰)

3 背腰もみをする

- 「上下もみ」ボタンを押すと、「上下もみ」ボタンが点灯し、動作を開始します。
※もう一度押すとボタンが消灯し動作が停止します。
※定位置で、もみマッサージすることはできません。

部分的にもみマッサージをする


- 決まった箇所を部分的にもみマッサージをしたい場合は、上下もみ動作中に「部分もみ」ボタンを押すと、「部分もみ」ボタンが点灯し動作を開始します。

⚠ 注意	「上下もみ」と「部分もみ」は、併用することができません。
------	------------------------------

4 背腰たたきをする

- 速いたたきがお好みの場合は、「たたき速」ボタンを押します。
- 遅いたたきがお好みの場合は、「たたき遅」ボタンを押します。
押されたボタンが点灯し、選択した動作を開始します。
※もみ動作とたたき動作は同時に行うことができます。
- たたき動作中に位置を定位置で微調整したい場合は「↑」「↓」ボタンを長押しして調整してください。
※定位置で、もみマッサージすることはできません。

⚠ 注意	たたきの定位動作と、もみ動作は併用できません。
------	-------------------------

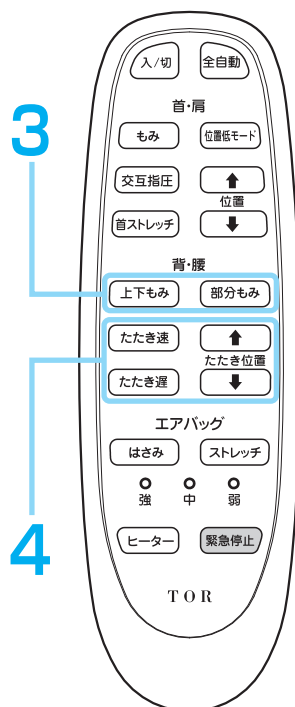

お好み機能でマッサージする (エアバッグ)

5 エアバッグでマッサージする

「はさみ」、「ストレッチ」のいずれかのボタンから選択して、マッサージしてください。

(はさみ)


- 「はさみ」ボタンを押すと、「はさみ」ボタンが点灯し、「中」ではさみ動作を開始します。押すたびに強さが切り替わります。



(ストレッチ)


- 「ストレッチ」ボタンを押すと、「ストレッチ」ボタンが点灯し、「中」でストレッチ動作を開始します。押すたびに強さが切り替わります。



 注意	「はさみ」と「ストレッチ」は、併用することができません。
--	------------------------------

6 停止のしかた

- 「入/切」ボタンを押すとすべての動作が止まり、原点復帰をします。
- 「緊急停止」ボタンを押してすべての動作をその場で止めることもできます。再び動作させる場合は「入/切」ボタンを押して原点復帰をさせてください。
- 「入/切」ボタン、「緊急停止」ボタンを押さない場合はタイマーが働き、15分ですべての動作が自動停止します。

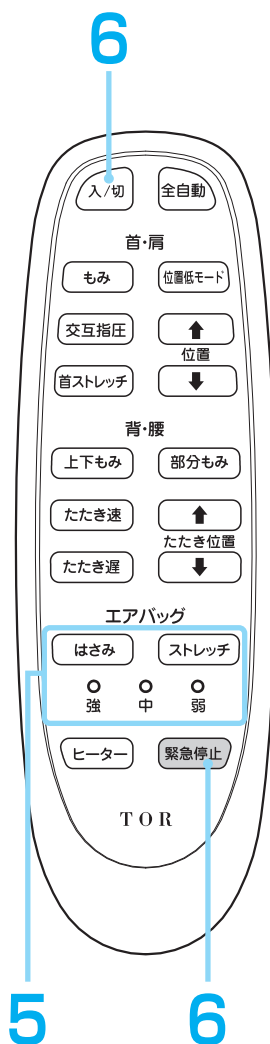

保管について

- 本体、付属品などは、次回の使用に支障のないように汚れやホコリを取った後、湿気の少ないところに整理・保管してください。
- 長期間ご使用にならないときは、カバーなどをかけてホコリがつかないようにしてください。
- 子供の手の届くところには保管しないでください。
- 廃棄は必ず各都道府県、市町村の指示にしたがってください。


本体のお手入れ

- やわらかい布でから拭きしてください。
- 汚れがひどいときは、ぬるま湯でうすめた中性洗剤にやわらかい布を浸して、よく絞って拭き、最後から拭きしてください。
- 変色などの防止のため、シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。

首肩カバーのお手入れ

- 首肩カバーの汚れは、下記の要領で首肩カバーをはずして洗濯してください。

- 1 首肩カバーを止めている周囲のファスナーをはずす
- 2 首肩カバーに縫い付けてある洗濯絵表示に従い洗う
- 3 しわをのばし、形を整えてから、日陰に干す

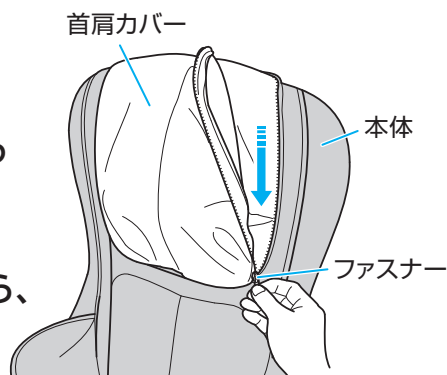

首肩カバーの取り付けかた

※首肩カバーをはずした時の逆の要領で、首肩カバーを取付けてください。

故障かなと思ったら

修理に出す前にもう一度点検してください。それでも正常に動作しないときはお買上げの販売店に修理を依頼してください。絶対に分解したり、修理改造はしないでください。異常動作をしてけがや事故のおそれがあります。

動かない	電源プラグがコンセントから抜けていませんか。 電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれているかご確認ください。
運転中に停止した	大きな負荷がかかっていませんか？ 安全装置が作動しモーターが止まる場合があります。 しばらく本体を休ませて(1時間程度)から再度動作を確認してください。 マッサージ動作を始めてから、約15分経過するとタイマー機能がはたらき、自動的に運転が停止します。故障ではありません。 動作ボタンを押すと運転を再開します。
ヒーターがあまり温かくない	ヒーターの温度は使用時間や環境によって最高温度まで達しない場合があります。 あらかじめご了承ください。
異音がる音大きい	マッサージの振動音は構造上発生するものですので、異常ではありません。

仕様

類別	機械器具77 バイブレーター
医療機器分類	管理医療機器
一般名称	家庭用電気マッサージ器 (JMDNコード 34662000)
販売名	マッサージシート タタキもみDMA
商品番号	ADE01
医療機器認証番号	230AABZX00031000
使用目的または効果	あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用すること。
定格電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	80W (ヒーター15W)
タイマー	15分自動オフ
製品サイズ	(約)W520×L480×H820mm
製品重量	約10.5kg
素材	本体構造部材：ABS樹脂、PP樹脂 クッション材：ウレタンフォーム 張り材：(bk)合成皮革、(bk)ポリエステル100% マッサージ部 (各色共通)：ポリエステル80%・レーヨン10%・ ポリウレタン10%
もみ回数	(約) 首・肩部：37回/分、 背・肩部：26回/分
たたき回数	(約) 遅：450回/分 速：700回/分
エア圧力	最大85kPa
上下移動速さ	(約) 首・肩部：0.9cm/秒、 背・肩部：1.0cm/秒
ヒーターの最高温度	もみ玉ヒーター50℃以下
原産国	中国
製造元	ZHANGZHOU EASEPAL INDUSTRIAL CORPORATION(中国)
製造販売元	株式会社 アテックス

保証とアフターサービス

- 1 本製品の保証書は、下記に添付しています。保証書は必ず「お買上げ年月日」と「販売店名」など、所定事項の記入および記載内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- 2 保証期間は、お買上げ日より1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは保証書をご提出のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。
- 3 保証期間経過後の修理につきましては、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 4 弊社は「マッサージシート タタキもみDMA」の補修用性能部品の最低保有期間を、製造打切後最低3年間としています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店、または下記に明記しておりますカスタマーサービス課までお問い合わせください。

保証書

本製品は厳密な検査を経て出荷されたものです。お客様の正常な使用状態で万一故障した場合は、保証書に記載された期間、下記保証規約により無料修理をお約束いたします。修理は必ず本書を添えてご依頼ください。

 株式会社アテックス

〒547-0014 大阪市平野区長吉川辺3-3-24
TEL:06-6799-8100(代) FAX:06-6799-8118

品名 / 型番	マッサージシート タタキもみDMA / ADE01		
お買上げ年月日*	年 月 日	保証期間	お買上げ日より1年 本体
★ お客様 お名前	様		
ご住所	TEL:() -		

★欄に記入のない場合、本書は無効となることがありますので、必ず記入の有無をご確認ください。

保証規約

- 1 保証期間中であっても以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障などについては本保証書は適用されません。
 - ・取扱上の不注意、誤った使用方法
 - ・天災、火災などによる故障または損傷
 - ・お買上げ後の転居等による輸送、移動、落下など
 - ・保存上の不備
 - ・弊社または弊社の指定した事業所以外で行われた修理、改造
 - ・本製品本来の使用目的以外の使用
 - ・一般家庭以外（例えば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷
- 2 運賃諸掛り費用は原則としてお客様にてご負担願います。
- 3 無料保証期間はご購入の日から1年間です。
- 4 保証の適用されない故障および保証期間経過後の故障については、有料で修理いたします。
- 5 保証書の再発行はいたしません。
- 6 本書のご提示がない場合や無料保証期間を過ぎた場合は、有料修理になります。
- 7 本書は日本国内においてのみ有効です。

本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

 株式会社アテックス
<https://www.atex-net.co.jp/>

株式会社アテックス 大阪物流センター
〒595-0074 大阪府泉大津市小津島町6-11

■修理・アフターサービスについてのご相談・お問い合わせは



カスタマーサービス課

0120-486-505

受付時間 平日9:00～17:00（土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く）