

## 取扱説明書

管理医療機器  
家庭用電気マッサージ器

# ルルドプレミアム マッサージクッション ワイドもみ AX-HCL198

### もくじ

安全上のご注意	2~3
各部の名称とはたらき	4
使いかた	4~5
保管について	5
お手入れ	6
故障かなと思ったら	7
仕様	7
保証とアフターサービス	8



※デザイン仕様を一部変更している場合があります。  
ご了承ください。

このたびはAX-HCL198をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。  
なお、この取扱説明書には保証書がついています。  
お読みになられたあとも、大切に保管してください。

# 安全上のご注意

ご使用になる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために必ずお守りいただくことを次に説明しています。

## 警告表示の意味

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で示しています。

### 警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

### 注意

この表示の欄は、「損害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

#### 禁止を促す記号



禁止

#### 強制を促す記号



必ず守る

## 警告

**禁止** 次の人は使用しないでください。  
症状を悪化させるおそれがあります。  
・医師からマッサージを禁じられている人  
例: 血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎、皮膚感染症

**禁止** 幼児や小さいお子様に使用させたり、本体で遊ばせたり、上にのせたりしないでください。  
思わぬ事故の原因になります。

**禁止** 使用前にもみ玉カバーをめくり、マッサージ部の縫製破れがないかを確認してください。  
破れている場合は使用しないでください。  
また、カバーを外して使用しないでください。  
思わぬ事故の原因になります。

**分解禁止** 改造はしないでください。また、修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理をしないでください。  
火災・感電・けがの原因になります。

**禁止** 頭部やのどには使用しないでください。  
事故や体調不良の原因になります。

**禁止** マッサージ以外の用途に使用しないでください。  
事故やけがの原因になります。

**禁止** 本体を布団やコタツの中に入れて使用しないでください。  
事故・感電・低温やけどのおそれがあります。

**禁止** 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。  
感電・ショート・火災の原因になります。

**禁止** 自分で意思表示のできない方や身体の不自由な方には使用させないでください。  
けがの原因になります。

**禁止** 他の治療器と同時に使用しないでください。  
健康を害するおそれがあります。

**禁止** 首周辺をマッサージする時は、もみ玉の動きに注意してください。また、首の前方はマッサージしないでください。  
事故やけがのおそれがあります。

**禁止** もみ玉面に勢よく腰を下ろしたりしないでください。  
事故やけがのおそれがあります。

**禁止** 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込がゆるいときは使用しないでください。  
感電・ショート・火災の原因になります。

**必ず守る** 次のような人は必ず医師とご相談の上で使用ください。  
事故や健康を害するおそれがあります。  
・ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人  
・温度感覚喪失が認められる人  
・悪性腫瘍のある人  
・心臓に障害のある人  
・妊娠初期の不安定期または出産直後の人  
・背骨に異常のある人や曲がっている人  
・糖尿病などによる高度な末しょう(梢)循環障害からくる知覚障害のある人  
・皮膚に創傷のある人  
・安静を必要としている人や体調がすぐれない人  
・骨粗しょう症の人、せきついの骨折、ねんざ、肉離れなど、急性[とう(疼)痛性]疾患の人  
・体温38℃以上(有熱期)の人  
例: 急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期、衰弱しているとき  
・その他、医療機関で治療中の人

**必ず守る** 使用中身体に異常を感じたときはすぐに使用を中止し、医師に相談してください。  
健康を害するおそれがあります。

**注意**

**!** 電源は交流用100V専用コンセントを使用してください。  
必ず守る 火災やけがの原因になります。

**!** 停電のときはすぐに電源を切ってください。  
必ず守る 感電・ショート・火災の原因になります。

**!** お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。  
必ず守る 感電やけがの原因になります。

**!** 故障を発見したときはすぐに使用を中止し電源を切ってください。  
必ず守る 事故やけがの原因になります。

**!** 故障した場合には、勝手に修理などせず、販売店または製造販売元に連絡してください。  
必ず守る 事故やけがの原因になります。

**!** この機器は表面が熱くなるため、熱に敏感でない人は十分注意を払って使用してください。  
必ず守る 低温火傷のおそれがあります。

**!** 使用しても効果が現れない場合は医師または専門家に相談してください。  
必ず守る 事故や健康を害すおそれがあります。

**!** 頭部、顔周辺にアクセサリーなど硬いものをつけて使用しないでください。  
必ず守る 事故やけがのおそれがあります。

**!** 持ち手を強く引っ張ったり、振り回さないでください。  
必ず守る 思わぬ事故やけがのおそれがあります。

**!** 投げたり、落としたりしないでください。  
必ず守る 破損や故障の原因になります。

**!** 浴室など湿気が多い場所では使用しないでください。また、水などの液体がかからないようにしてください。  
禁止 感電や故障の原因になります。

**!** 本体の上に乗ったり、座ったりしないでください。  
禁止 故障や事故の原因になります。

**!** 本体に強い衝撃をあてないでください。  
禁止 故障や事故の原因になります。

**!** 使用中は眠らないでください。  
禁止 無意識での使用は身体への異常やけがの原因になります。

**!** 布団の中や、毛布などをかぶせて使用しないでください。  
禁止 本体内部が高温になる可能性があります。

**!** もみ玉面を下にして、動作させないでください。  
禁止 故障の原因となります。

**!** 1回の使用は15分以内にしてください。また、同一箇所への連続使用は避けてください。  
必ず守る 長時間の連続使用は、必要以上の刺激となり逆効果やけがの原因になります。

**!** 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端のプラグを持って引き抜いてください。  
必ず守る 感電・ショート・発火の原因になります。

**!** 使用時以外はACアダプターをコンセントから抜いてください。  
必ず守る 絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。

**!** 付属品のACアダプターは指定されたものを使用してください。


MODELNo	IVP1200-2500P
---------	---------------

他のアダプターを使用すると故障の原因になります。

**!** 持ち手をフックなどに引っかけて保管しないでください。  
必ず守る 持ち手が外れ、落下し事故やけがのおそれがあります。

# 各部の名称とはたらき

## おもて

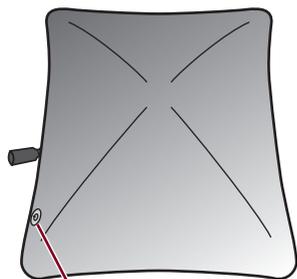

### ① スイッチ


スイッチを押すたびに動作が切り換わります。

電源入り (正回転+ヒーター)

(逆回転+ヒーター)

電源切り (停止)

## うら(もみ玉カバーを開いた状態)

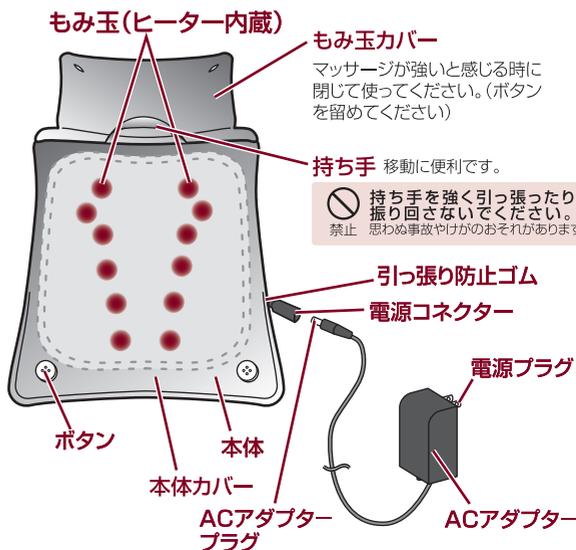

## 使いかた

### ⚠ 注意

### 使用前の注意事項

- 使用前にもみ玉カバーをめくり、マッサージ部の縫製破れがないかを確認してください。破れている場合は使用しないでください。また、本体カバーを外して使用しないでください。
- 使用前にスイッチや、タイマーが正常に動作するか確認してください。
- しばらく使用しなかった場合、もう一度取扱説明書をよく読み、機器が正常にまた、安全に動作することを確認してから使用してください。



マッサージ部  
縫製破れがないか確認してください。

## 2 ACアダプターの電源プラグをコンセントに差し込む

正しく確実に差し込んでください。



## 3 ボタンを外し、もみ玉カバーをめくる



## 1 ACアダプターと本体をつなぐ

まっすぐ根元まで確実に差し込んでください。



## 4 スイッチ を押す



- もみ玉が作動し運転を開始します。
- 約15分経過するとタイマー機能がはたらき、自動的に運転が停止します。

## 5 マッサージしたい部位に本体をあてる

### 使用例

- いすにもたれて腰や背中に
- いすにもたれて首や肩に



- ふくらはぎやふとももに



- 横になって首や肩に



- 腰や背中に



## 6 スイッチを押して動作を切り換える

スイッチを押すたびに、本製品の動作が下記のように切り換わります。



- もみが強く感じる場合はもみ玉カパーを閉じてください。
- やわらかいベッドやソファの上で使用するともみ感が弱まる場合があります。
- 商品に大きな荷重がかかるような使い方をすると、安全装置が作動しモーターが止まる場合があります。この場合再度スイッチを押すと再び動きます。

## 使用を終了する

### 1 本製品の動作状態に合わせて「切」になるまでスイッチを押す

- 電源が切れます。



## 保管について

- 本体、付属品などは、次回の使用に支障のないように汚れやホコリを取った後、湿気の少ないところに整理・保管してください。
- 長期間ご使用にならないときは、カバーなどをかけてホコリがつかないようにしてください。
- 子供の手の届くところには保管しないでください。
- 廃棄は必ず各都道府県、市町村の指示にしたがってください。

# お手入れ

## 本体のお手入れ

- やわらかい布でから拭きしてください。
- 汚れがひどいときは、ぬるま湯でうすめた中性洗剤にやわらかい布を浸して、よく絞って拭き、最後から拭きしてください。
- 変色などの防止のため、シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。



**ご注意**

本体カバーは外すことはできません。  
ご使用できなくなりますので、無理に外さないでください。

# 故障かなと思ったら

修理に出す前にもう一度点検してください。それでも正常に動作しないときはお買上げの販売店に修理を依頼してください。絶対に分解したり、修理改造はしないでください。異常動作をしてけがや事故のおそれがあります。

動かない	ACアダプターが抜けていませんか？ ACアダプターをコンセントに差込んでもう一度操作してください。
運転中に停止した	大きな負荷がかかっていませんか？ 安全装置が作動しモーターが止まる場合があります。スイッチを押すと運転を再開します。 スイッチを押してから、約15分経過するとタイマー機能がはたらき、自動的に運転が停止します。故障ではありません。スイッチを押すと運転を再開します。
ヒーターがあまり温かまらない	ヒーターの温度は使用時間や環境によって最高温度まで達しない場合があります。あらかじめご了承ください。
異音がる音大きい	マッサージの振動音は構造上発生するものですので、異常ではありません。

## 仕様

類別	機械器具77 バイブレーター
医療機器分類	管理医療機器
一般名称	家庭用電気マッサージ器 (JMDNコード 34662000)
販売名	ルルドプレミアム マッサージクッション ワイドもみ
商品番号	AX-HCL198
医療機器認証番号	226AABZX00075000
使用目的・効能または効果	あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用すること。
定格電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	30W(ヒーター9W)
アダプター定格	入力 AC100-240V 50/60Hz 0.8A 出力 DC12V 2.5A
タイマー	約15分自動オフ
製品サイズ	(約)W345×L445×H150(mm)
製品重量	約2.7kg
素材	本体フレーム：PP樹脂、ABS樹脂 本体カバー：品質表示タグ参照
回転数	約28回/分
ヒーターの最高温度	52℃以下
生産国	中国
製造業者	廈門興翔天電子有限公司
製造販売業者	株式会社アテックス