



Massage
CUSHION

W
MOMI

製造番号

取扱説明書

保証書付

添付文書

保管用

管理医療機器：家庭用電気マッサージ器

ルルドプレミアム マッサージクッション ダブルもみ AX-HCL258S

もくじ

安全上のご注意	2～3
各部の名称とはたらき	4
使いかた	4～5
保管について	6
お手入れ	6
故障かなと思ったら	7
仕様	7
保証とアフターサービス	8



※デザイン仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。

このたびはAX-HCL258Sをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
なお、この取扱説明書には保証書がついています。
お読みになられたあとも、大切に保管してください。

ALEX

安全上のご注意

ご使用になる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために必ずお守りいただくことを次に説明しています。

警告表示の意味

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で示しています。

警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

注意

この表示の欄は、「損害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

禁止を促す記号



禁止

強制を促す記号



必ず守る

警告

-  次の人は使用しないでください。
症状を悪化させるおそれがあります。
 - ・ 医師からマッサージを禁じられている人
例: 血栓 [そく(塞)栓] 症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎、皮膚感染症
-  幼児や小さいお子様に使用させたり、本体で遊ばせたり、上にのせたりしないでください。
思わぬ事故の原因になります。
-  使用前にマッサージ部の縫製破れがないかを確認してください。
破れている場合は使用しないでください。
また、カバーを外して使用しないでください。
思わぬ事故の原因になります。

 改造はしないでください。また、修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理をしないでください。
火災・感電・けがの原因になります。

 お腹や胸、頭部やのどには使用しないでください。
事故や体調不良の原因になります。

 マッサージ以外の用途に使用しないでください。
事故やけがの原因になります。

 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。
感電・ショート・火災の原因になります。

 自分で意思表示のできない方や身体の不自由な方には使用させないでください。
けがの原因になります。

 他の治療器と同時に使用しないでください。
健康を害するおそれがあります。

 首周辺をマッサージする時は、もみ玉の動きに注意してください。また、首の前方はマッサージしないでください。
事故やけがのおそれがあります。

 本体を布団やコタツの中に入れて使用しないでください。
事故・感電・低温やけどのおそれがあります。

 もみ玉面に勢いよく体をあてないでください。
故障・事故・けがのおそれがあります。

 次のような人は必ず医師とご相談の上で使用ください。
事故や健康を害するおそれがあります。

- ・ ベースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人
- ・ 温度感覚喪失が認められる人
- ・ 悪性腫瘍のある人
- ・ 心臓に障害のある人
- ・ 妊娠初期の不安定期または出産直後の人
- ・ 背骨に異常のある人や曲がっている人
- ・ 糖尿病などによる高度な末しょう(梢)循環障害からくる知覚障害のある人
- ・ 皮膚に創傷のある人
- ・ 安静を必要としている人や体調がすぐれない人
- ・ 骨粗しょう症の人、せきついの骨折、ねんざ、肉離れなど、急性[とう(疼)痛性]疾患の人
- ・ 体温38℃以上(有熱期)の人
例: 急性炎症症状 [けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期、衰弱しているとき
- ・ その他、医療機関で治療中の人

 使用中身体に異常を感じたときはすぐに使用を中止し、医師に相談してください。
健康を害するおそれがあります。

 故障を発見したときはすぐに使用を中止し電源を切ってください。
事故やけがの原因になります。

! マッサージ器の上に寝た状態で使用しないでください。

必ず守る 負荷がかかりすぎ、事故やけがのおそれがあります。

! 停電のときはすぐに電源を切ってください。

必ず守る 感電・ショート・火災の原因になります。

! お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。

必ず守る 感電やけがの原因になります。

! この機器は表面が熱くなるため、熱に敏感でない人は十分注意を払って使用してください。

必ず守る 低温火傷のおそれがあります。

! 使用しても効果が現れない場合は医師または専門家に相談してください。

必ず守る 事故や健康を害するおそれがあります。

! 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込がゆるいときは使用しないでください。

禁止 感電・ショート・火災の原因になります。

! 頭部、顔周辺にアクセサリなど硬いものをつけて使用しないでください。

禁止 事故やけがの恐れがあります。

! 持ち手を強く引っ張ったり、振り回さないでください。思わぬ事故やけがのおそれがあります。

禁止

カーアダプター(専用)を使用するときは以下の事項をお守りください

! 運転中には絶対使用しないでください。

禁止 運転を誤り、思わぬ事故の原因になります。

! カーアダプター(専用)は12V車専用です。24V仕様の車(トラックやバスなど)では使用しないでください。

禁止 火災や感電の原因になります。

! 長時間で使用にならない場合は必ずカーアダプターをシガーソケットから抜いてください。

禁止 絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

! カーアダプターは指定されたものを使用してください。他のアダプターを使用すると故障の原因になります。

禁止

! 車内は高温になる場合がありますので車内に放置しないでください。

禁止 故障や事故の原因になります。

! エンジン始動時には、カーアダプターはシガーソケットから取り外してください。

必ず守る 車種によってはエンジン始動時に瞬間的に想定以上の電圧が供給され、商品の破損の原因になります。

注意

! 浴室など湿気が多い場所では使用しないでください。また、水などの液体がかからないようにしてください。

禁止

感電や故障の原因になります。

! 本体やもみ玉の上に立ったり、座ったりして使用しないでください。

禁止

故障や事故の原因になります。

! 本体に強い衝撃や荷重をあたえないでください。

禁止

故障や事故の原因になります。

! 使用中は眠らないでください。

禁止

無意識での使用は身体への異常やけがの原因になります。

! 布団の中や、毛布などをかぶせて使用しないでください。

禁止

本体内部が高温になる可能性があります。

! もみ玉面を下にして、動作させないでください。

禁止

故障の原因となります。

! 1回の使用は15分以内にしてください。また、同一箇所への連続使用は避けてください。長時間の連続使用は、必要以上の刺激となり逆効果やけがの原因になります。

必ず守る

! 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端のプラグを持って引き抜いてください。

必ず守る

感電・ショート・発火の原因になります。

! 使用時以外はACアダプターをコンセントから抜いてください。

必ず守る

絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。

! ACアダプターは指定された付属のものを使用してください。

必ず守る

また、付属のアダプターはほかの商品には使用しないでください。

MODELNo S040AT1200250

他のアダプターを使用すると故障の原因になります。

! 連続で使用した場合は、必ず15分以上の休憩時間を設けてください。

必ず守る


故障や事故の原因になります。

各部の名称とはたらき


おもて



うら(マッサージ部)

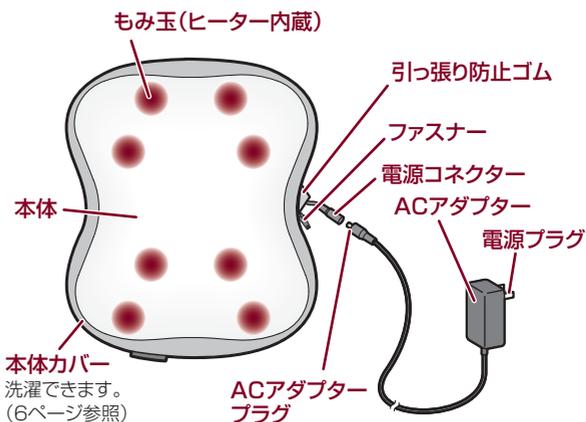


付属品

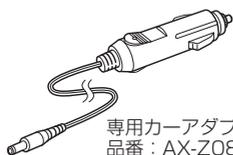

使いかた

警告 使用前の注意事項

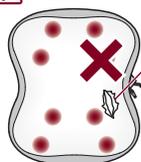

マッサージ部
縫製破れがないか確認してください。


- 使用前にスイッチや、タイマーが正常に動作するか確認してください。
- しばらく使用しなかった場合、もう一度取扱説明書をよく読み、機器が正常にまた安全に動作することを確認してから使用ください。
- やわらかいベッドやソファの上で使用するともみ感が弱まる場合があります。
- 商品に大きな負荷がかかった場合、安全装置が作動しモーターが止まる場合があります。この場合、しばらく本体を休ませて(1時間程度)から再度動作を確認してください。
- 回転方向が変わる時、もみ玉が一瞬停止しますが故障ではありません。

動作を開始する

- 1 ACアダプターと本体をつなぐ**
まっすぐ根元まで確実に差し込んでください。



- 2 ACアダプターをコンセントに差し込む**
正しく確実に差し込んでください。

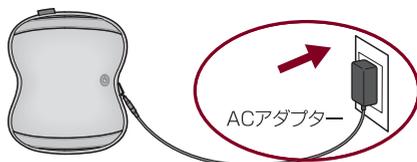

3 スイッチ を押す




- もみ玉が作動し運転を開始します。
- 約15分経過するとタイマー機能がはたらき、自動的に運転が停止します。


4 マッサージしたい部位に本体をあてる

使用例


- いすにもたれて腰や背中に
- いすにもたれて首や肩に

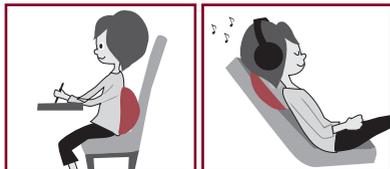


- ふくらはぎやふとももに
- 横になって首や肩に

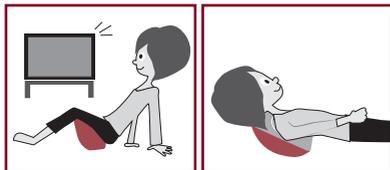

<マッサージ器の向き>

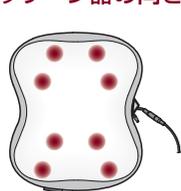

タテスタイル
(首・肩におすすめ)

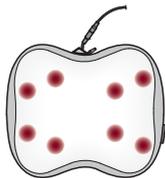

ヨコスタイル
(背・腰におすすめ)

5 スイッチを押して、動作を切り換える


スイッチを押すたびに、本製品の動作が下記のように切り換わります。



- やわらかいベッドやソファの上で使用するともみ感が弱まる場合があります。
- 商品に大きな負荷がかかるような使い方をすると、安全装置が作動しモーターが止まる場合があります。この場合、しばらく本体を休ませて(1時間程度)から再度動作を確認してください。

※回転方向(もみ上げ、もみ下げ)が約90秒ごとに変わり、動作途中で速度が変化します。

回転方向が変わるとき、もみ玉は一瞬停止しますが、故障ではありません。

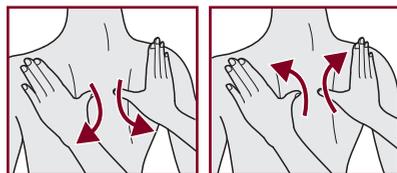

動作を終了する

1 本製品の動作状態に合わせて「切」になるまでスイッチを押す

電源が切れます。

カーアダプターの使いかた

- 専用カーアダプターの使いかたは、別紙の専用カーアダプター取扱説明書を参照ください。

保管について

- 汚れやホコリを取ったあと、湿気の少ないところに保管してください。
- 長期間で使用にならないときは、カバーなどをかけてホコリがつかないようにしてください。
- 子供の手の届くところには保管しないでください。
- 廃棄は必ず各都道府県、市町村の指示にしたがってください。

お手入れ

本体カバーの洗濯のしかた


- 1 コネクターを引っ張り防止ゴムから外す

- 2 本体カバーのファスナーを開ける

- 3 ワンタッチテープを外し、本体を取り出す

- 4 本体カバーに縫い付けてある洗濯絵表示に従い洗う
ファスナーは閉めて、洗濯してください。
ワンタッチテープや他の洗濯物を傷めるおそれがあります。
- 5 しわをのばし形を整えてから、日陰に干す


本体カバーの取り付けかた

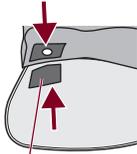- 1 本体に本体カバーをかぶせワンタッチテープを貼り付ける

位置を確認して貼り合わせてください。
- 2 本体カバーのファスナーを閉じる

- 3 引っ張り防止ゴムにコネクターを通して固定する


本体のお手入れ

- やわらかい布でから拭きしてください。
- 汚れがひどいときは、ぬるま湯でうすめた中性洗剤にやわらかい布を浸して、よく絞って拭き、最後から拭きしてください。
- 変色などの防止のため、シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。

故障かなと思ったら

修理に出す前にもう一度点検してください。それでも正常に動作しないときはお買上げの販売店に修理を依頼してください。絶対に分解したり、修理改造はしないでください。異常動作をしてけがや事故のおそれがあります。

動かない	AC アダプターが抜けていませんか？ AC アダプターをコンセントに差込んでもう一度操作してください。 スイッチは正しく動作していますか？ 本体カバーのワンタッチテープを貼り直して動作を確認してください。(P6 本体カバーの取り付けかた参照)
運転中に停止した	大きな負荷がかかっていませんか？ 安全装置が作動しモーターが止まる場合があります。 しばらく、本体を休ませて(1時間程度)から再度動作を確認してください。 スイッチを押してから、約15分経過するとタイマー機能がはたらき、自動的に運転が停止します。故障ではありません。 スイッチを押すと運転を再開します。
ヒーターがあまり温かにならない	ヒーターの温度は使用時間や環境によって最高温度まで達しない場合があります。 あらかじめご了承ください。
異音がる音が大きい	マッサージの振動音は構造上発生するものですので、異常ではありません。
こきざみに止まる動きのときがある	モードによってはもみ玉がこきざみに止まる動きのときがありますが、故障ではありません。 あらかじめご了承ください。

仕様

類別	機械器具77 バイブレーター
医療機器分類	管理医療機器
一般名称	家庭用電気マッサージ器 (JMDNコード 34662000)
販売名	ルルドプレミアム マッサージクッション ダブルもみ
商品番号	AX-HCL258S
医療機器認証番号	226AABZX00056000
使用目的または効果	あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用すること。
電気定格	AC100V 50/60Hz 30W(ヒーター8W)
アダプター定格	入力 AC100-240V 50/60Hz 1.2A 出力 DC12V 2.5A
タイマー	15分自動オフ
製品サイズ	(約)W310×L360×H120(mm)
製品重量	約2kg(アダプター含まず)
素材	クッション材：ウレタンフォーム 内カバー：ポリエステル 本体カバー：品質表示タグ参照
回転数	約20～30回/分
ヒーターの最高温度	55℃以下
生産国	中国
製造業者	ZHANGZHOU EASEPAL INDUSTRIAL CORPORATION(中国)
製造販売業者	株式会社 アテックス