

取扱説明書

保証書付

添付文書

保管用

製造番号

ひざカツ

Knee care

ひざカツ マッサージャー

AX-HX205

管理医療機器：家庭用エアマッサージ器



目次

- | | | | |
|--------------|------|---------------|-----|
| △ 安全上のご注意 | 1～5 | 📦 保管について | 12 |
| 🔍 梱包内容と各部の名称 | 6 | 🔧 故障かなと思ったら | 12 |
| 👤 使いかた | 7～11 | ⚙️ 仕様 | 13 |
| 🧼 お手入れ | 12 | ♡ 保証とアフターサービス | 裏表紙 |

このたびはAX-HX205をお買上げいただき、誠にありがとうございます。**ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。**なお、この取扱説明書には保証書がついています。お読みになられたあとも、大切に保管してください。

※デザイン仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。

ALEX

⚠ 安全上のご注意

ご使用になる人や他人への危害、財産への損害を未然に防止するために必ずお守りいただく事を説明しています。

警告表示の意味

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で示しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



禁止を促す記号



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



強制を促す記号

⚠ 警告

症状について



次の人は使用しないでください。症状を悪化させるおそれがあります。

・医師からマッサージを禁じられている人

例：血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎、皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む) など

自分で意思表示のできない方や身体の不自由な方には使用させないでください。

けがの原因になります。



次のような人は必ず医師とご相談の上ご使用ください。

事故や健康を害するおそれがあります。

- ・ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人
- ・悪性腫瘍のある人
- ・心臓に障害のある人
- ・温度感覚喪失が認められる人
- ・妊娠初期の不安定期または出産直後の人
- ・糖尿病などによる高度な末しょう(梢)循環障害からくる知覚障害のある人
- ・皮膚に創傷のある人
- ・安静を必要としている人や体調がすぐれない人
- ・骨粗しょう症の人、せきついの骨折、ねんざ、肉離れなど、急性[とう(疼)痛性]疾患の人
- ・体温38℃以上(有熱期)の人
- 例：急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期、衰弱しているとき
- ・けんしょう(腱鞘)炎の人
- ・動脈りゅう(瘤)、静脈りゅう(瘤)のある人
- ・その他、医療機関で治療中の人



使用中身体に異常を感じたときはすぐに使用を中止し、医師に相談してください。
健康を害するおそれがあります。

使用しても効果が現れない場合は医師または専門家に相談してください。
事故や健康を害するおそれがあります。

ご使用について



幼児や小さいお子様に使用させたり、本体で遊ばせたり、上にのせたりしないでください。

使用前にマッサージ部に破れが無いか確認し、破れがある場合は使用を中止してください。
マッサージ部カバーを外した状態や、破れた状態で使用しないでください。
カバーが破れた場合は勝手に修理などせず、お買い上げの販売店または製造販売元に連絡してください。

事故やけがの原因になります。

マッサージ以外の用途に使用しないでください。

事故やけがの原因になります。

他の治療器と同時に使用しないでください。

健康を害するおそれがあります。

本体を布団やコタツの中に入れて使用しないでください。

事故・感電・低温やけどのおそれがあります。

施療部周辺にアクセサリーなど硬いものをつけて使用しないでください。

事故やけがのおそれがあります。

使用中は眠らないでください。

無意識での使用は身体への異常やけがの原因になります。

水などをこぼしたり、ぬれた身体で使用しないでください。

感電やショート、故障の原因になります。

着けたまま立ったり、歩いたりしないでください。

事故やけがのおそれがあります。

素肌では使用しないでください。

けがのおそれがあります。

⚠ 安全上のご注意

⚠ 警告

ご使用について(つづき)

- ⊘ 低温やけどをおこす恐れがあります。次のような使いかたはしないでください。
- ・熱すぎると感じた場合の使用
 - ・こたつの中や、ストーブなど暖房器具の近くでの使用

「低温やけど」について

比較的低い温度(40℃～60℃)でも長時間皮膚の同じ場所に触れていると、熱い、痛いの自覚症状がなくても低温やけどのおそれがあります。

- ! 使用しても効果が現れない場合は医師または専門家に相談してください。
事故やけがのおそれがあります。
- この機器は表面が熱くなるため、熱に敏感でない人は十分注意を払って使用してください。
低温やけどのおそれがあります。

電源について

- ⊘ コードやプラグを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。
感電・ショート・火災の原因になります。
- コードやプラグが傷んだり、コンセントの差込がゆるいときは使用しないでください。
感電・ショート・火災の原因になります。
- ! 停電のときはすぐに電源を切ってください。
感電・ショート・火災の原因になります。
- お手入れの際は必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。
感電やけがの原因になります。
- ACアダプターを抜くときは、コードを持たずにACアダプター本体を持って引き抜いてください。
感電・ショート・発火の原因になります。



使用時以外はACアダプターをコンセントから抜いてください。

絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。

ACアダプターは付属品の指定されたものを使用してください。また、付属のACアダプターはほかの商品には使用しないでください。

MODEL No. SW-0799 (8338W)

他のアダプターを使用すると故障の原因になります。

異常(故障)について



故障を発見したときはすぐに使用を中止し電源を切ってください。

事故やけがの原因になります。

その他



本体に強い衝撃をあたえないでください。

故障や事故の原因になります。



改造はしないでください。また、機器が故障した場合には、勝手に修理などせず、販売店又は製造販売元に連絡してください。

火災・感電・けがの原因になります。

⚠ 安全上のご注意

⚠ 注意

ご使用ついて

⊘ 浴室など湿気が多い場所では使用しないでください。また、水などの液体がかからないようにしてください。

感電や故障の原因になります。

本体に強い衝撃をあたえないでください。

故障や事故の原因になります。

布団の中や、毛布などをかぶせて使用しないでください。

本体内部が高温になる可能性があります。

⚠ 1回の使用は10分以内とし、1日の使用は1日2回、20分以内にしてください。
長時間の連続使用は、必要以上の刺激となり逆効果やけがの原因になります。

初めてご使用の際は「弱」で使用し、使用中身体に異常がないか十分注意してください。

初めからマッサージの刺激を強くすると、健康を害するおそれがあります。

マッサージの刺激が「弱」でも強すぎると感じた時は、1回の使用時間を5分程度を目処に、ご使用ください。

強い刺激のまままで使用を続けると、健康を害するおそれがあります。

梱包内容と各部の名称

梱包内容の確認


開梱したら、ご使用になる前に以下のものが揃っているか確認してください

・本体

・ACアダプター

各部の名称


本体

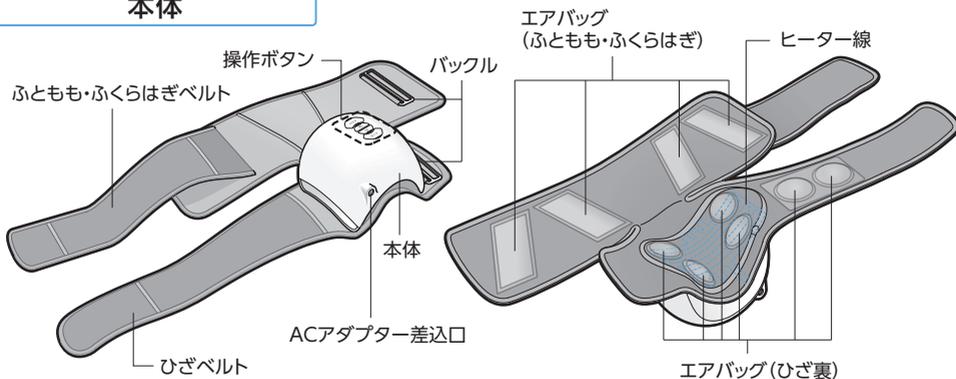

※イメージ図


ヒーター線やエアバッグは実際には見えません。

付属品

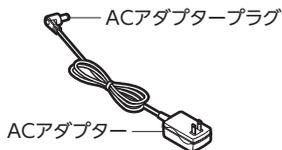

操作ボタン

ヒーターON/OFF
高温/低温の切り替え
エアーの強さ3段階

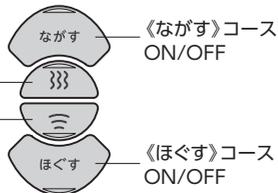


人 使いかた

⚠️ ご注意 使用前の注意事項

- 使用前にマッサージ部の縫製破れがないかを確認してください。破れている場合は使用しないでください。
- 使用前にスイッチや、タイマーが正常に動作するか確認してください。
- しばらく使用しなかった場合、もう一度取扱説明書をよく読み、機器が正常にまた、安全に動作することを確認してから使用してください。

マッサージ部
縫製破れがないか
確認してください。

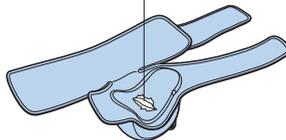

ACアダプターをつなぐ


1



ACアダプタープラグを
本体のACアダプター差込口に
つなぐ

まっすぐ根元まで確実に差し込んでください。

2

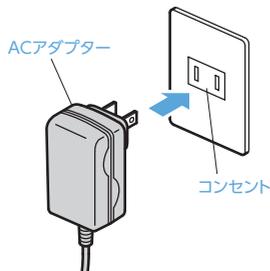

ACアダプターを
コンセントに差し込む


まっすぐ根元まで確実に差し込んでください。

装着する

POINT

- ふとももに使用したいときは、ふともも・ふくらはぎベルトを上側に、ふくらはぎに使用したいときは、ふともも・ふくらはぎベルトを下側にして巻いてください。
(装着手順はふとももでの使用を説明します。ふくらはぎへは本体の向きを上下逆で装着してください。)

1

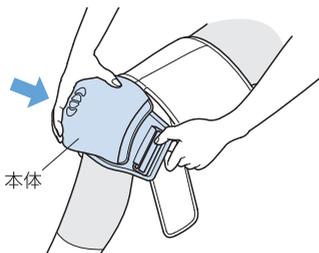


本体がひざにのるように
位置を調節する

⚠️ ご注意

- 面ファスナーが衣服などにつかないようにご注意ください。
衣服を痛めることがあります。

2

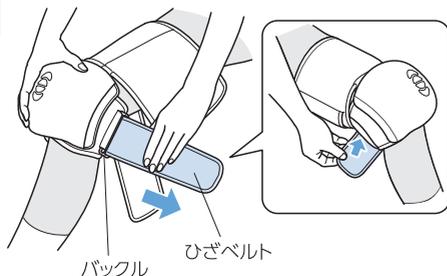

ひざベルトをバックルに通して
装着する

面ファスナーを貼り付けて固定します。


- ※ベルトの締めすぎにご注意ください。
痛いと感じる時は、ベルトをゆるめに調整してください。

POINT

- ひざ裏にエアバッグがあたるように装着してください。
- ひざを伸ばすと着けやすくなります。

装着する(つづき)

3 ひともも・ふくらはぎベルト

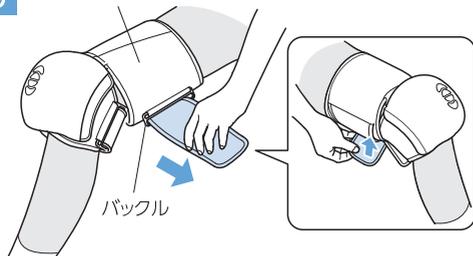

ふともも・ふくらはぎベルトを巻く

バックルに通し、裏側で面ファスナーを貼り付けて固定します。

⚠️ 警告

素肌では使用しないでください。
けがのおそれがあります。


マッサージをする

ふともも・ふくらはぎエアバッグ

4ヶ所に配置されたエアバッグがふとももまたはふくらはぎなど、ひざ周りの筋肉をマッサージ。

あったかヒーター

ひざ全体を覆う広面積のヒーターで温めます。
ヒーター単独でも使用可能。
※高温:約45℃ 低温:約40℃

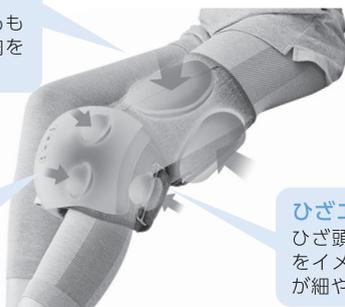

ひざエアバッグ

ひざ頭の周囲とひざ裏を人の指先をイメージした小さなエアバッグが細やかにマッサージ。

POINT

● マッサージのコースは下記の2種類あります。

	ながすコース (血行促進)	エアバッグが大きく圧迫と解放を繰り返し、ひざまわりの血行を促進します。
	ほぐすコース (疲労回復)	指でリズムカルに押されるように、細かく動くエアバッグが、心地よくひざまわりの筋肉をもみほぐします。

1 「ながす」または「ほぐす」 どちらかお好みのコースのボタンを押し、 マッサージをスタートする

押したコースのボタンのLEDが点灯し動作を開始します。


※再度ボタンを押すと停止します。

マッサージ中に  ボタンを押すたびに
エアの強さが切り替わります。
※マッサージ開始時は「弱」



操作ボタン

● 音の鳴る回数でコースが
区別できます

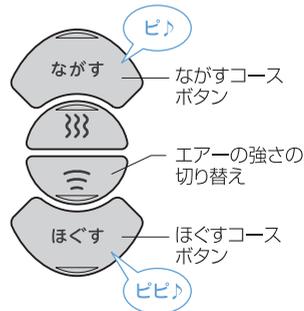

2 プログラムに沿って動作し、約10分後に自動で停止します



お手入れ

- やわらかい布でから拭きしてください。
- 生地部分の汚れは、ぬるま湯でうすめた中性洗剤にやわらかい布を浸して、よく絞って拭き、最後から拭きしてください。
- 変色などの防止のため、シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。



保管について

- 本体からACアダプターを外し、コンセントから抜いて保管してください。
- 汚れやホコリを取ったあと、湿気の少ないところに保管してください。
- 長期間ご使用にならないときは、カバーなどをかけてホコリがつかないようにしてください。
- コード類はねじれをほどこいて保管してください。
- 保管の際は、変形しないよう、製品の上に物を置かないでください。
- 幼児やお子様の手が届くところには保管しないでください。
- 廃棄は必ず各都道府県、市町村の指示にしたがってください。



故障かなと思ったら

修理に出す前にもう一度点検してください。それでも正常に動作しないときはお買上げの販売店に修理を依頼してください。絶対に分解したり、修理改造はしないでください。異常動作をしてけがや事故のおそれがあります。

動かない	ACアダプターが間違っていないですか？ 付属の専用ACアダプターを使用してください。
	ACアダプターが抜けていませんか？ ACアダプターをコンセントに差し込んでもう一度操作してください。
	スイッチは正しく動作していますか？
運転中に停止した	スイッチを押してから、約10分経過するとタイマー機能がはたらき、自動的に運転が停止します。故障ではありません。スイッチを押すと運転を再開します。
異音がる／音が大きい	マッサージの動作音は構造上発生するものですので、異常ではありません。



仕様

類別	機械器具77 バイブレーター
医療機器分類	管理医療機器
一般の名称	家庭用エアマッサー器 (JMDNコード 34663000)
販売名	ひざカツ マッサージャー
商品番号	AX-HX205
医療機器認証番号	301AABZX00023000
使用目的または効果	あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用すること。 [●疲労回復 ●血行をよくする ●筋肉の疲れをとる ●筋肉のこりをほぐす ●神経痛・筋肉痛の痛みの緩解]
電気定格	AC100V 50/60Hz 12W (ヒーター 5W)
アダプター定格	入力 AC100-240V 50/60Hz 700mA、出力 DC12V 2A
タイマー	10分自動オフ
製品サイズ	(約) W670×L300×H110 (mm)
製品重量	約700g
素材	本体：ABS樹脂 本体生地：品質表示タグ参照
エア圧力	約60kPa
ヒーターの最高温度	低温(約40℃) 高温(約45℃)
生産国	中国
製造業者	ZHANGZHOU EASEPAL INDUSTRIAL CORPORATION (中国)
製造販売業者	株式会社 アテックス

♡ 保証とアフターサービス

- 1 本製品の保証書は、下記に添付しています。保証書は必ず「お買上げ年月日」と「販売店名」など、所定事項の記入および記載内容をよくお読みのおと、大切に保管してください。
- 2 保証期間は、お買上げ日より1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは保証書をご提出のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。
- 3 保証期間経過後の修理につきましては、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 4 弊社は「ひざカツ マッサージャー」の補修用性能部品の最低保有期間を、製造打切後最低3年間としています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店、または下記に明記しておりますカスタマーサービス課までお問い合わせください。

本製品は厳密な検査を経て出荷されたものです。お客様の正常な使用状態で万一故障した場合は、保証書に記載された期間、下記保証規約により無料修理をお約束いたします。修理は必ず本書を添えてご依頼ください。

品名 / 型番		ひざカツ マッサージャー / AX-HX205					
お買上げ年月日*		年	月	日	保証期間	お買上げ日より1年 本体	
★ お 客 様	お名前				★ 販 売 店		
	ご住所						
TEL : () -							

★欄に記入のない場合、本書は無効となることがありますので、必ず記入の有無をご確認ください。

保証規約 本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

- 1 保証期間中であっても以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障などについては本保証書は適用されません。
 - ・取扱上の不注意、誤った使用方法
 - ・天災、火災などによる故障または損傷
 - ・お買上げ後の転居等による輸送、移動、落下など
 - ・保存上の不備
 - ・弊社または弊社の指定した事業所以外で行われた修理、改造
 - ・本製品本来の使用目的以外の使用
 - ・一般家庭以外（例えば業務用の長時間使用、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷
- 2 運賃諸掛り費用は原則としてお客様にてご負担願います。
- 3 無料保証期間はお購入の日から1年間です。
- 4 保証の適用されない故障および保証期間経過後の故障については、有料で修理いたします。
- 5 保証書の再発行はいたしません。
- 6 本書のご提示がない場合や無料保証期間を過ぎた場合は、有料修理になります。
- 7 本書は日本国内においてのみ有効です。



株式会社 **アテックス**

<https://www.atex-net.co.jp/>

株式会社アテックス 大阪物流センター
〒595-0074 大阪府泉大津市小津島町6-11

■修理・アフターサービスについてのご相談・お問い合わせは



カスタマーサービス課

0120-486-505

受付時間 平日9:00~17:00(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)