

- Have a precious time -

Air Boots Massager

製造番号

取扱説明書

保証書付

添付文書

保管用

エアブーツマッサージャー AX-HXL206

管理医療機器・家庭用エアマッサージ器

もくじ

安全上のご注意	2~3
各部の名称	4~5
ご使用前の準備	6~8
使いかた	9~10
お手入れ	11
保管について	11
故障かなと思ったら	11
仕様	12
保証書	裏表紙



※デザイン仕様を一部変更している場合があります。
ご了承ください。

この度はHXL206をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
なお、この取扱説明書には保証書がついています。お読みになられたあとも、大切に保管してください。

A/TEX

安全上のご注意

ご使用になる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために必ずお守りいただくことを次に説明しています。

警告表示の意味

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で示しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「損害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

禁止を促す記号



禁止

強制を促す記号



必ず守る

警告



禁止

次の人は使用しないでください。
症状を悪化させるおそれがあります。

- ・医師からマッサージを禁じられている人
例: 血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎、皮膚感染症



禁止

幼児や小さいお子様に使用させたり、本体で遊ばせたりしないでください。



必ず守る

使用前にカバーに破れが無いか確認し、破れがある場合使用を中止してください。
カバーを外した状態、破れた状態で使用しないでください。

カバーが破れた場合は勝手に修理などせず、お買い上げの販売先または製造販売元に連絡してください。

事故やけがの原因になります。



分解禁止

改造はしないでください。また、修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理をしないでください。

火災・感電・けがの原因になります。



禁止

マッサージ以外の用途に使用しないでください。

事故やけがの原因になります。



禁止

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。また、本体の底でコードを踏んだ状態のまま使用しないでください。

感電・ショート・火災の原因になります。



禁止

自分で意思表示のできない方や身体の不自由な方には使用させないでください。

事故やけがの原因になります。



禁止

他の治療器と同時に使用しないでください。

健康を害するおそれがあります。



禁止

電源プラグはぬれた手で抜き差ししないでください。

感電やけがの原因になります。



禁止

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込がゆるいときは使用しないでください。

感電・ショート・火災の原因になります。



禁止

施療部周辺にアクセサリなど硬いものをつけて使用しないでください。

事故やけがのおそれがあります。



必ず守る

次のような人は必ず医師とご相談の上で使用ください。

事故や健康を害するおそれがあります。

- ・ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医療用電気機器を使用している人
- ・温度感覚喪失が認められる人
- ・悪性腫瘍のある人
- ・心臓に障害のある人
- ・妊娠初期の不安定期または出産直後の人
- ・糖尿病などによる高度な末しょう(梢)循環障害からくる知覚障害のある人
- ・皮膚に創傷のある人
- ・安静を必要としている人や体調がすぐれない人
- ・骨粗しょう症の人、せきついの骨折、ねんざ、肉離れなど、急性[とう(疼)痛性]疾患の人
- ・体温38℃以上(有熱期)の人
例: 急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期、衰弱しているとき
- ・けんしょう(腱鞘)炎の人
- ・その他、医療機関で治療中の人

! 使用中身体に異常を感じたときはすぐに使用を中止してください。
健康を害するおそれがあります。

! 故障を発見したときはすぐに使用を中止し電源を切ってください。
事故やけがの原因になります。

! 故障した場合には、勝手に修理などせず、販売店または製造販売元に連絡してください。
事故やけがの原因になります。

! 停電のときはすぐに電源を切ってください。
感電やけがの原因になります。

! お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
感電やけがの原因になります。

! 電源は交流用100V専用コンセントを使用してください。
火災やけがの原因になります。

! 使用しても効果が現れない場合は医師または専門家に相談してください。
事故やけがのおそれがあります。

! この機器は表面が熱くなるため、熱に敏感でない人は十分注意を払って使用してください。
低温火傷のおそれがあります。

! 低温やけどをおこす恐れがあります。次のような使いかたはしないでください。
・熱すぎると感じた場合の使用
・こたつの中や、ストーブなど暖房器具の近くでの使用
低温火傷の原因になります。

「低温やけど」について

比較的低い温度(40℃~60℃)でも長時間皮膚の同じ場所に触れていると、熱い、痛いのが自覚症状がなくても低温やけどのおそれがあります。

⚠ 注意

! 足のサイズが合わない方は、ご使用にならないでください。
事故やけがのおそれがあります。

! 浴室など湿気の多い場所では使用しないでください。また、水などの液体がかからないようにしてください。
感電や故障の原因になります。

! この商品は一人用です。
複数の人が同時に使用しないでください。
故障や事故の原因になります。

! はいのまま立ったり、歩いたりしないでください。
事故やけがのおそれがあります。

! 本体に強い衝撃をあたえないでください。
故障や事故の原因になります。

! 使用中は眠らないでください。
無意識での使用は身体への異常やけがの原因になります。

! この商品は屋内用です。屋外では使用しないでください。
故障や事故の原因になります。

! 初めてご使用の際は強さを「弱」で使用し、使用中身体に異常がないか十分注意してください。
初めからマッサージの刺激を強くすると、健康を害するおそれがあります。

! 1回の使用は15分以内とし、1日の使用時間は合計で15分以内にしてください。
長時間の連続使用は、必要以上の刺激となり逆効果やけがの原因になります。

! マッサージの刺激が「弱」でも強すぎると感じた時は、1回の使用時間を5分程度を目処に、短くしてください。
強い刺激のままで使用を続けると、健康を害するおそれがあります。

! ACアダプターやACアダプターのプラグを抜くときは、コードを持たずに必ずACアダプターやACアダプターのプラグを持って抜いてください。
感電・ショート・発火の原因になります。

! 使用時以外はACアダプターをコンセントから抜いてください。
絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。


! ACアダプターは指定された付属のものを使用してください。

MODEL No. KL-AD3060-VA

他のアダプターを使用すると故障の原因になります。

各部の名称


本体

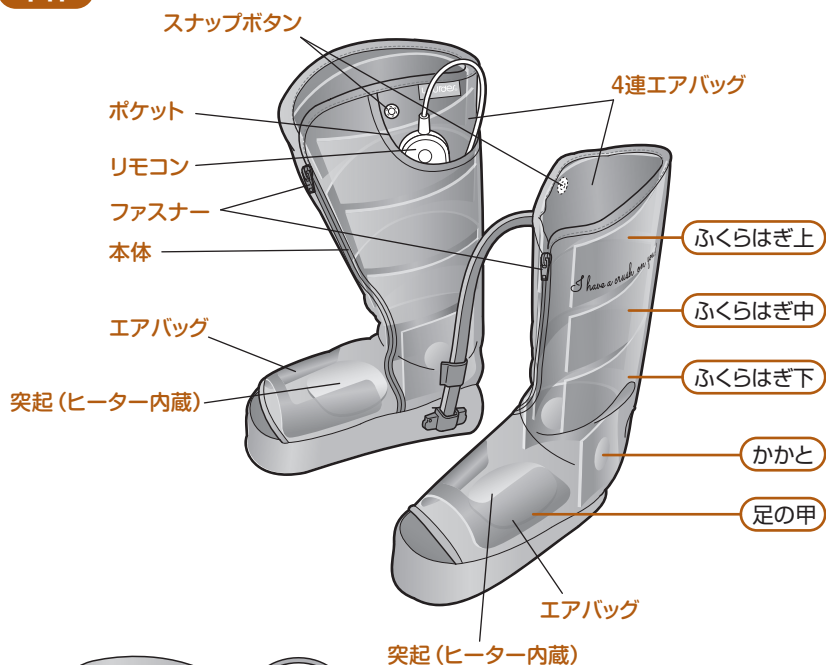


付属品

指圧玉 (2個)

ACアダプタープラグ

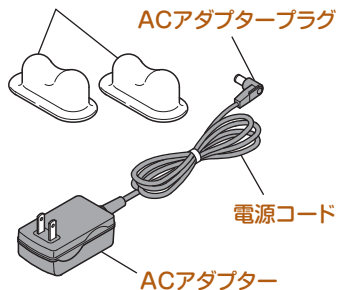


リモコン

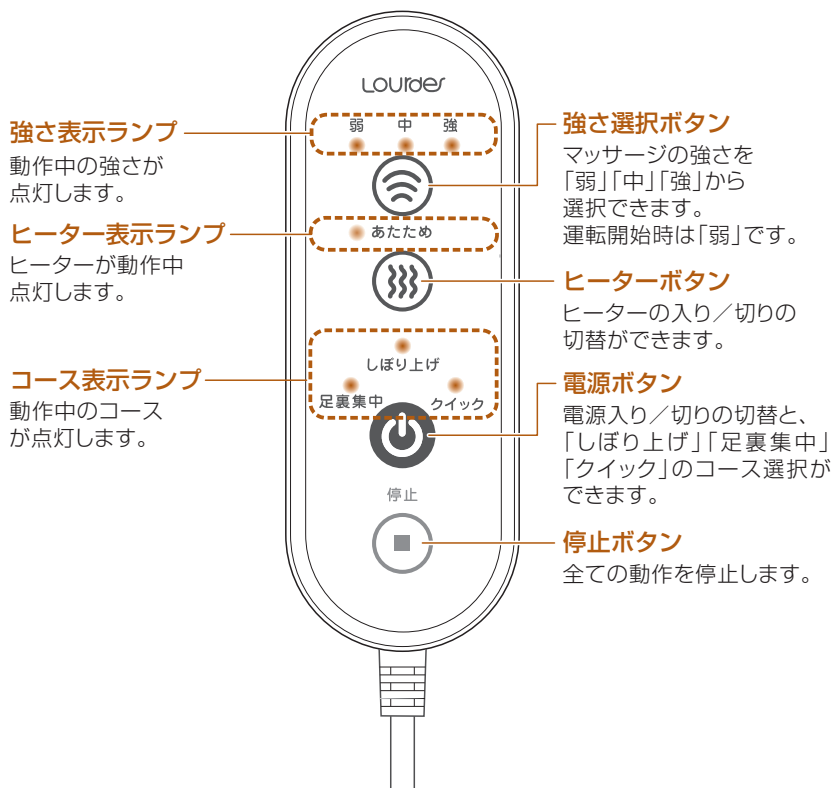

ご使用前の準備


使用前のご注意
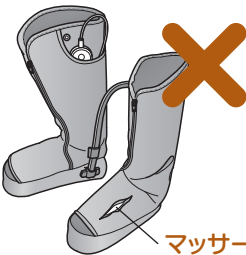
<p>警告</p>	<p>使用前の注意事項</p> <ul style="list-style-type: none">・使用前にカバーに破れがないか確認し、破れがある場合使用を中止してください。カバーを外した状態、破れた状態で使用しないでください。・カバーが破れた場合は勝手に修理などせず、お買い上げの販売先、製造販売元まで修理を依頼してください。・使用前に操作ボタンが正常に動作するか確認してください。・しばらく使用しなかった場合、もう一度取扱説明書をよく読み、機器が正常にまた、安全に動作することを確認してから使用してください。	 <p>マッサージ部 縫製破れがないか確認してください。</p>
------------------	---	--

STEP
1

ACアダプターのプラグを本体の差込口に差し込む

ACアダプタープラグを本体の差込口に、根本までしっかり差し込んでください。
(※アダプター接続コネクタはロック機能付です。パチッと音がするまで差し込んでください。)

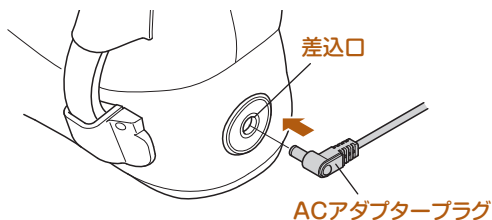


<p>注意</p>	<p>付属品の専用アダプターを使用してください。専用アダプターは、他の電気製品には使用しないでください。 電圧の違いで、発火・故障のおそれがあります。</p>
------------------	---

STEP
2


ACアダプターをコンセントに差し込む

正しく確実に差し込んでください。

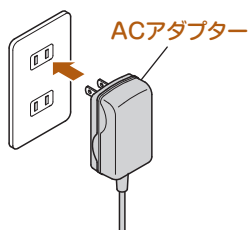

STEP
3

ファスナーを開いて片方ずつ本体の奥まで足を入れる

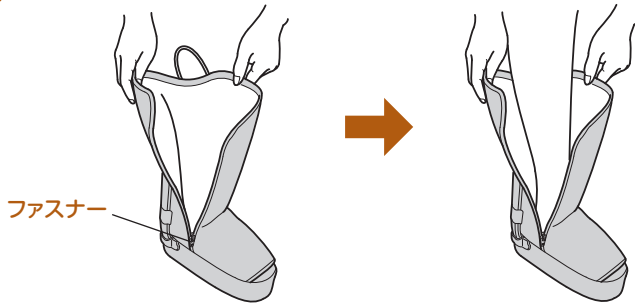

適応サイズ

ふくらはぎ周囲
約42cm以下

足サイズ
約27cm以下


⚠ 注意

足のサイズが合わない方は、ご使用にならないください。
商品が破損したり事故やけがのおそれがあります。

STEP
4

ファスナーを閉める

ファスナーは最後まで閉め切ってください。

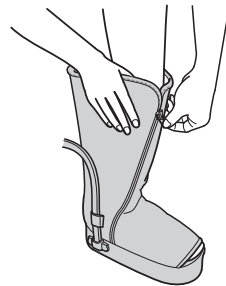

⚠ 注意

ファスナーは最後まで閉め切ってください。
途中までしか閉まっていない状態で使用すると、
ファスナーが破損するおそれがあります。
足を入れたまま立ったり、ジャンプしたり、歩いたり
しないでください。
思わぬ事故やけがのおそれがあります。


使用例



ご使用前の準備

指圧玉の調整方法


- 左右の本体内側には、指圧玉ポケットが付いており、左右どちらでも指圧玉が差し込めます。
指圧玉は、指圧玉ポケットの位置を入れ替えることで、指圧ポイントを微調整することができます。

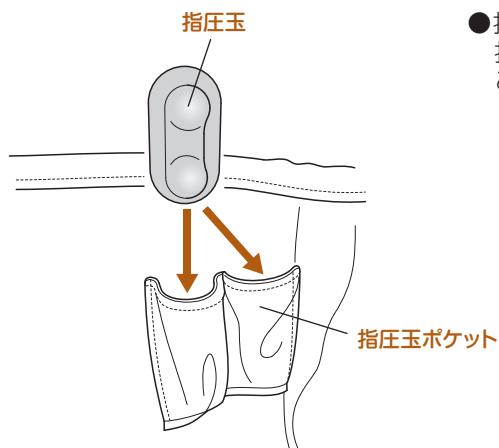

- 指圧玉が不要な場合は、指圧玉を指圧玉ポケットから取り出して、ご使用ください。

スナップボタンの使い方


- 左右本体上部のスナップボタンを押し合わせると、自立しやすくなります。
使用時以外の仮置き時にご使用ください。

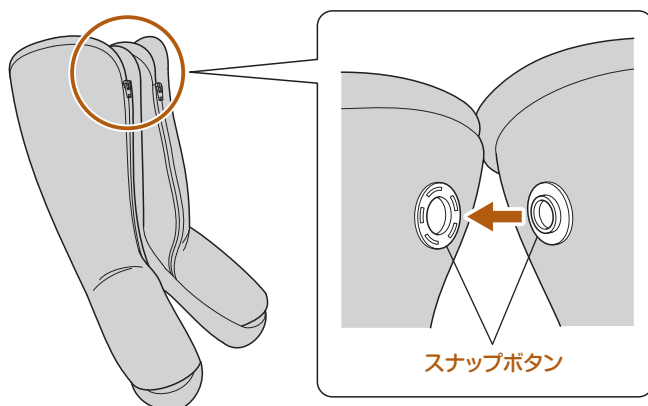

使いかた

STEP 1


運転を開始する

- リモコンの「」ボタンを押します。
- 電源が入り、「しほり上げ」コースのランプが点灯し、動作が始まります。

STEP 2


お好みのコースを選択する

- 選んだコースのランプが点灯し、動作を開始します。
- 電源ボタンを押すたびにコースが切り替わります。

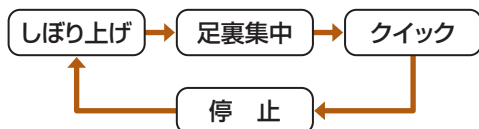


●コースの特徴

しほり上げ 下から上へ順番に力強く加圧し血行促進させるようなコースです。

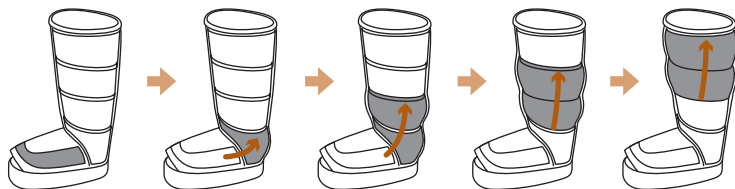


足裏集中 足の甲と、かかとのエアバックを中心に加圧するコースです。

※ふくらはぎのエアバックは動作しません

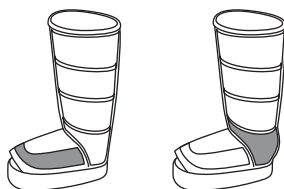

クイック 短時間でマッサージしたいときのコースです。全体的に動作します。

※他は15分のところ、このコースは10分

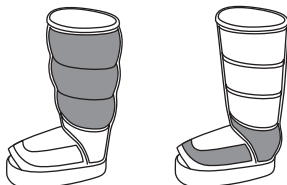

使いかた

STEP

3

マッサージの強さを選択する

●選んだ強さのランプが点灯し、強さ選択ボタンを押すたびに強さが切り替わります。

※使い始めは弱で使用し、使い慣れてから強さを調整してください。

※マッサージ途中でも変更できます。



STEP

4

ヒーターを使用する

●ヒーターを使用したいときは、「㊦」ボタンを押します。

「あたため」のランプが点灯し、ヒーターが動作します。

●ヒーターの使用を中止するとき、「㊦」ボタンを再度押すとヒーターが止まります。


●ヒーターは約5分後に温まります。

STEP

5

運転を停止する

●電源ボタンを「停止」まで押す、または停止ボタンを押します。

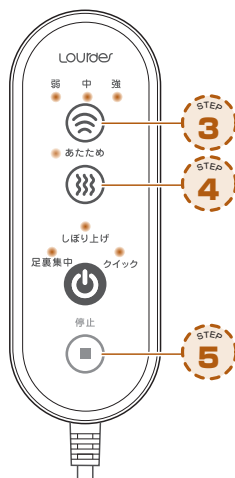

タイマーについて

●電源を入れてから約15分、「クイック」を選択したときは、約10分で自動的に運転が停止します。

お手入れ

- やわらかい布でから拭きしてください。
- 本体の汚れは、ぬるま湯でうすめた中性洗剤にやわらかい布を浸して、よく絞って拭き、最後から拭きしてください。
- 変色などの防止のため、シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。

保管について

- 保管の際は、電源を切ってヒーターが十分冷えてから、保管してください。
- 汚れやホコリを取ったあと、湿気の少ないところに保管してください。
- 長期間で使用にならないときは、カバーなどをかけてホコリがつかないようにしてください。
- 保管の際は、変形しないよう、製品の上に物を置かないでください。
- コード類はねじれをほどいて保管してください。
- 子供の手の届くところには保管しないでください。
- 保管の際は、製品に異常がないか定期的に点検してください。
- 廃棄は必ず各都道府県、市町村の指示にしたがってください。

故障かなと思ったら

修理に出す前にもう一度点検してください。それでも正常に動作しないときはお買上げの販売店に修理を依頼してください。絶対に分解したり、修理改造はしないでください。異常動作をしてけがや事故のおそれがあります。

動かない	ACアダプターが抜けていませんか？ ACアダプタープラグが本体の差込口に確実に繋がっているか、ACアダプターがコンセントに確実に差し込まれているかを確認し、もう一度操作をしてください。
	操作ボタンは正しく動作していますか？ P.9～10の「使いかた」を再度ご確認ください。
運転中に停止した	連続で使用していませんか？ 安全装置が作動しモーターが止まる場合があります。 電源ボタンを押すと運転を再開します。
	電源ボタンを押してから、約15分(クイック選択時は約10分)経過するとタイマー機能がはたらき、自動的に運転が停止します。故障ではありません。スイッチを押すと運転を再開します。
異音がる音が大きい	マッサージの動作音は構造上発生するものですので、異常ではありません。

仕様

類別	機械器具77 バイブレーター
医療機器分類	管理医療機器
一般的名称	家庭用エアマッサージ器(JMDNコード 34663000)
販売名	エアブーツマッサージャー
商品番号	AX-HXL206
医療機器認証番号	230AABZX00089000
使用目的または効果	あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用すること。
定格電源・消費電力	AC100V 50/60Hz 16W(ヒーター3W)
ACアダプター定格	入力 AC100-240V 50/60Hz 0.7A 出力 DC12V 1.5A
タイマー	約15分自動オフ(クイックコース時のみ約10分自動オフ)
製品サイズ	(約) W220 × L280 × H500(mm)
対応サイズ	ふくらはぎ周囲約42cm以下、足サイズ約27cm以下
製品重量	約2kg(ACアダプター含まず)
素材	本体：ウレタンフォーム、PP樹脂、ポリエステル、ポリウレタン
エア圧力	約60KPa以下
ヒーターの最高温度	ヒーター50℃以下(足裏突起内部)
原産国	中国
製造元	ZHANGZHOU EASEPAL INDUSTRIAL CORPORATION
製造販売元	株式会社 アテックス

保証とアフターサービス

- 1 本製品の保証書は、下記に添付しています。保証書は必ず「お買上げ年月日」と「販売店名」など、所定事項の記入および記載内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- 2 保証期間は、お買上げ日より1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは保証書をご提出のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。
- 3 保証期間経過後の修理につきましては、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 4 弊社は「エアブーツマッサージャー」の補修用性能部品の最低保有期間を、製造打切後最低3年間としています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店、または下記に明記しておりますカスタマーサービス課までお問い合わせください。

保証書

本製品は厳密な検査を経て出荷されたものです。お客様の正常な使用状態で万一故障した場合は、保証書に記載された期間、下記保証規約により無料修理をお約束いたします。修理は必ず本書を添えてご依頼ください。



〒547-0014 大阪市平野区長吉川辺3-3-24
TEL:06-6799-8100(代) FAX:06-6799-8118

品名 / 型番		エアブーツマッサージャー / AX-HXL206					
お買上げ年月日*		年	月	日	保証期間	お買上げ日より1年 本体	
*お客様	お名前			*販売店			
	ご住所						
TEL:() -							

*欄に記入のない場合、本書は無効となることがありますので、必ず記入の有無をご確認ください。

保証規約

- 1 保証期間中であっても以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障などについては本保証書は適用されません。
 - ・取扱上の不注意、誤った使用方法
 - ・天災、火災などによる故障または損傷
 - ・お買上げ後の転居等による輸送、移動、落下など
 - ・保存上の不備
 - ・弊社または弊社の指定した事業所以外で行われた修理、改造
 - ・本製品本来の使用目的以外の使用
 - ・一般家庭以外（例えば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷
- 2 運賃諸掛り費用は原則としてお客様にてご負担願います。
- 3 無料保証期間はご購入の日から1年間です。
- 4 保証の適用されない故障および保証期間経過後の故障については、有料で修理いたします。
- 5 保証書の再発行はいたしません。
- 6 本書のご提示がない場合や無料保証期間を過ぎた場合は、有料修理になります。
- 7 本書は日本国内においてのみ有効です。

本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

アテックスお客様ご相談窓口

受付時間 平日9:00~17:00
土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く

修理・使い方・お手入れなどのご相談、お問い合わせは

 0120-486-505

よくある質問、メールでのお問い合わせは
ホームページを活用ください

<https://www.atex-net.co.jp/>

株式会社アテックス 大阪物流センター 〒595-0074 大阪府泉大津市小津島町6-11

206-02-180921