



ATEX

添付文書

保証書付

保管用

製造番号


取扱説明書

医療機器認証番号:223AGBZX00069000
管理医療機器:家庭用電気マッサージ器

ルルド マッサージクッションS AX-HL128

もくじ

安全上のご注意	2~3
各部の名称とはたらき	4
マッサージクッションの使いかた	5~7
カーアダプターの使いかた	8
保管について	9
お手入れ	9
故障かなと思ったら	10
仕様	11
保証とアフターサービス	12

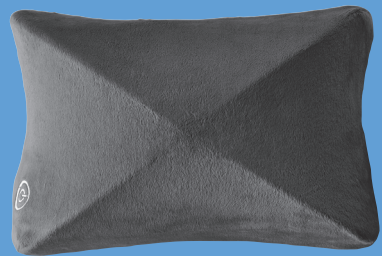

※デザイン仕様を一部変更している場合があります。
ご了承ください。

このたびはAX-HL128をお買上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
なお、この取扱説明書には保証書がついています。
お読みになられたあとも、大切に保管してください。

安全上のご注意

ご使用になる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために必ずお守りいただくことを次に説明しています。

警告表示の意味

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で示しています。

警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

注意

この表示の欄は、「損害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。


禁止を促す記号




強制を促す記号





警告


 **次の人は使用しないでください。症状を悪化させるおそれがあります。**
・医師からマッサージを禁じられている人
例:血栓[そく(塞)栓]症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎、皮膚感染症


 **幼児や小さいお子様に使用させたり、本体で遊ばせたり、上にのせたりしないでください。**


 **使用前にもみ玉カバーをめぐり、マッサージ部の縫製破れがないかを確認してください。破れている場合は使用しないでください。**


 **改造はしないでください。また、修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理をしないでください。火災・感電・けがの原因になります。**


 **頭部やのどには使用しないでください。事故や体調不良の原因になります。**


 **マッサージ以外の用途に使用しないでください。事故やけがの原因になります。**


 **電源コードを傷つけない、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。感電・ショート・火災の原因になります。**

 **自分で意思表示のできない方や身体の不自由な方には使用させないでください。けがの原因になります。**


 **他の治療器と同時に使用しないでください。**


 **首周辺をマッサージする時は、もみ玉の動きに注意してください。また、首の前方はマッサージしないでください。事故やけがのおそれがあります。**


 **本体を布団やコタツの中に入れて使用しないでください。事故・感電・低温やけどのおそれがあります。**


 **次のような人は必ず医師とご相談の上で使用してください。事故や健康を害するおそれがあります。**


- ・ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人
- ・温度感覚喪失が認められる人
- ・悪性腫瘍のある人
- ・心臓に障害のある人
- ・妊娠初期の不安定期または出産直後の人
- ・背骨に異常のある人や曲がっている人
- ・糖尿病などによる高度な末しょう(梢)循環障害からくる知覚障害のある人
- ・皮膚に創傷のある人
- ・安静を必要としている人や体調がすぐれない人
- ・骨粗しょう症の人、せきついの骨折、ねんざ、肉離れなど、急性[とう(痛)痛性]疾患の人
- ・体温38℃以上(有熱期)の人
例:急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期、衰弱しているとき
- ・その他、医療機関で治療の人

 **使用中身体に異常を感じたときはすぐに使用を中止し、医師に相談してください。健康を害するおそれがあります。**

 **故障を発見したときはすぐに使用を中止し電源を切ってください。**

 **停電のときはすぐに電源を切ってください。**

 **お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。感電やけがの原因になります。**

 **電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込がゆるいときは使用しないでください。感電・ショート・火災の原因になります。**

! この機器は表面が熱くなるため、熱に敏感でない人は十分注意を払って使用してください。
必ず守る

! 使用しても効果が現れない場合は医師または専門家に相談してください。
必ず守る

! 頭部、顔周辺にアクセサリなど硬いものをつけて使用しないでください。
必ず守る
事故やけがの恐れがあります。

注意

⊘ 浴室など湿気が多い場所では使用しないでください。
禁止
また、水などの液体がかからないようにしてください。
感電や故障の原因になります。

⊘ 本体やもみ玉の上に立ったり、座ったりして使用しないでください。
禁止
故障や事故の原因になります。

⊘ もみ玉面に勢よく腰を下ろしたりしないでください。
禁止
故障・事故・けがのおそれがあります。

⊘ 本体に強い衝撃をあてないでください。
禁止
故障や事故の原因になります。

⊘ 使用中は眠らないでください。
禁止
無意識での使用は身体への異常やけがの原因になります。

⊘ 布団の中や、毛布などをかぶせて使用しないでください。
禁止
本体内部が高温になる可能性があります。

⊘ もみ玉面を下にして、動作させないでください。
禁止
故障の原因となります。

! 1回の使用は15分以内にしてください。また、同一箇所への連続使用は避けてください。
必ず守る
長時間の連続使用は、必要以上の刺激となり逆効果やけがの原因になります。

! 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端のプラグを持って引き抜いてください。
必ず守る
感電・ショート・発火の原因になります。

! 使用時以外はACアダプターをコンセントから抜いてください。
必ず守る
絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。

! 付属品のACアダプターは指定されたものを使用してください。
必ず守る

MODELNo | S024FT1200200

他のアダプターを使用すると故障の原因になります。

カーアダプター使用時の安全上のご注意

警告

⊘ 運転中には絶対使用しないでください。
禁止
運転を誤り、思わぬ事故の原因になります。

⊘ 付属品のカーアダプターは12V車専用です。
禁止
24V仕様の車(トラックやバスなど)では使用しないでください。
火災や感電の原因になります。

⊘ カーアダプターは指定されたものを使用してください。
禁止
他のアダプターを使用すると故障の原因になります。

⊘ 車内は高温になる場合がありますので車内に放置しないでください。
禁止

! 商品から異臭や煙が出た場合はすぐに使用を中止し、販売店に相談してください。
必ず守る
火災や感電の原因になります。

! 長時間で使用にならない場合は必ずカーアダプターをシガーソケットから抜いてください。
必ず守る
絶縁劣化による感電や漏電・火災の原因になります。

! ヒューズが切れた場合は、必ず5Aガラス管ヒューズ(市販)と交換してください。
必ず守る

注意


⊘ 運転中や運転停止直後はカーアダプターの金属部に触らないでください。
禁止
運転中や運転停止直後はカーアダプターの金属部の温度が高くなるためやけどの恐れがあります。

! 使用前にシガーソケットの形状をご確認ください。
必ず守る
車種(外国産車や国内産車の一部)によっては、形状が適合しない場合があります。

! エンジン始動時には、カーアダプターはシガーソケットから取り外してください。
必ず守る
車種によってはエンジン始動時に瞬間的に想定以上の電圧が供給され、商品の破損の原因になります。

各部の名称とはたらき

おもて

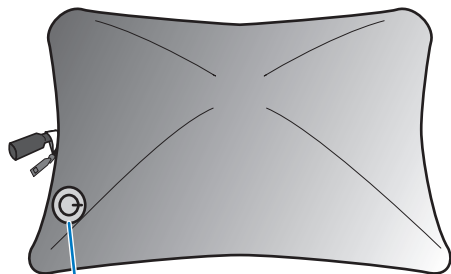


スイッチ

電源入り切り、マッサージ、マッサージ&ヒーターを切り換えます。

付属品

カーアダプター

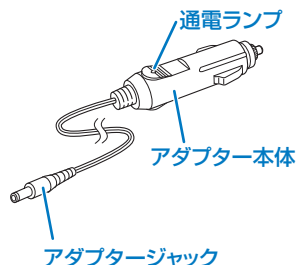

通電ランプ

アダプター本体


アダプタージャック

うら(カバーを開いた状態)

もみ玉(ヒーター内蔵)

もみ玉カバー

クッションとして使用する時や、マッサージが強いと感じる時に閉じて使ってください。(ボタンを留めてください)

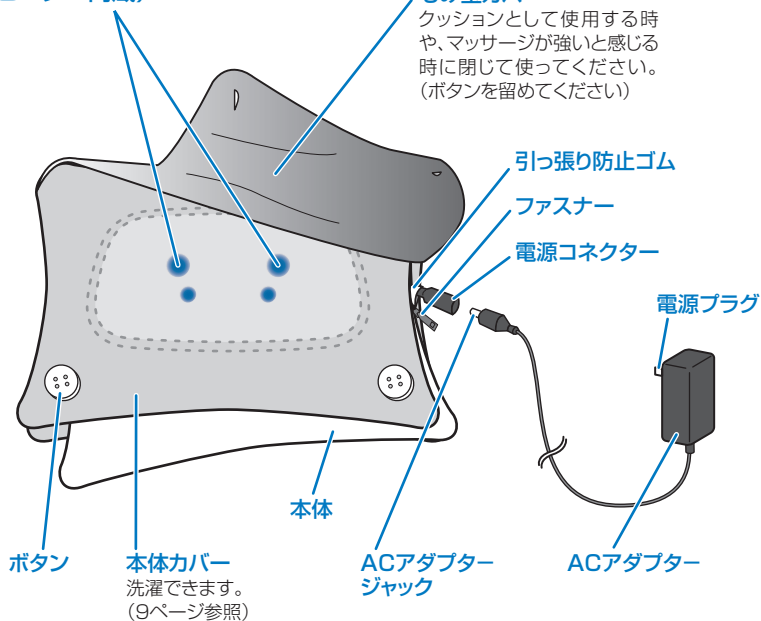

引っ張り防止ゴム

ファスナー

電源コネクター

電源プラグ

本体

ボタン

本体カバー
洗濯できます。
(9ページ参照)


ACアダプター
ジャック

ACアダプター


マッサージクッションの使いかた

⚠️ ご注意 使用前の注意事項


- 使用前にもみ玉カバーをめくり、マッサージ部の縫製破れがないか確認してください。破れている場合は使用しないでください。
- 使用前にスイッチや、タイマーが正常に動作するか確認してください。
- しばらく使用しなかった場合、もう一度取扱説明書をよく読み、機器が正常にまた、安全に動作することを確認してから使用してください。

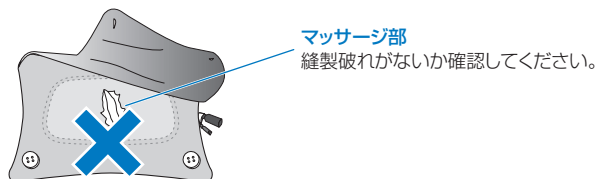


1 ACアダプターのジャックをつなぐ まっすぐ根元まで確実に差し込んでください。

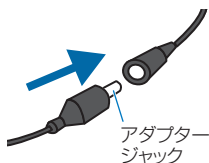

2 ACアダプターをコンセントに差し込む 正しく確実に差し込んでください。

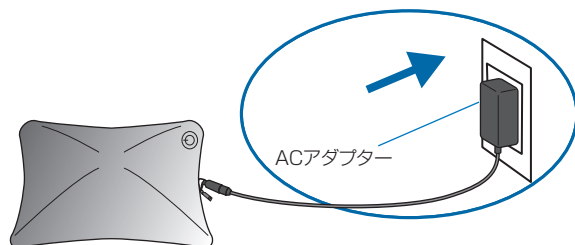


3 ボタンを外し、もみ玉カバーをめくる

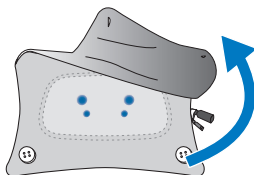

マッサージクッションの使いかた

4 スイッチ を押す

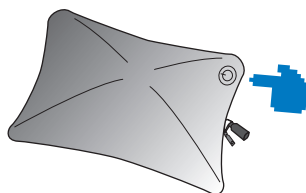


- もみ玉が作動し運転を開始します。
- 約15分経過するとタイマー機能がはたらき、自動的に運転が停止します。

5 マッサージしたい部位に本体をあてる

使用例


- ふくらはぎやふとももに

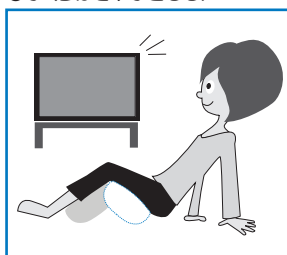


- 頭の重みを利用して首に




- 体重をかけて腰や背中に

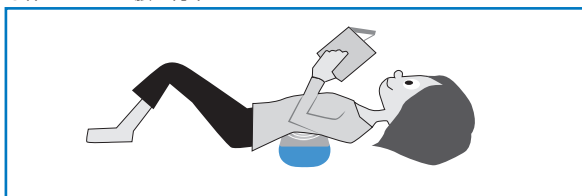

- いすの背もたれを利用して腰に

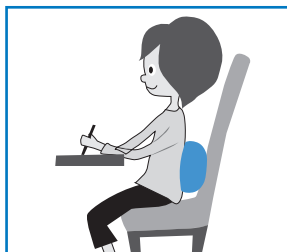


- イスや壁を利用して首に

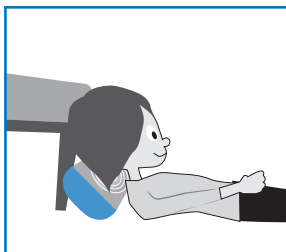

6 スイッチを押して、動作を調節する


スイッチを押すたびに、本製品の動作が下記のように切り換わります。

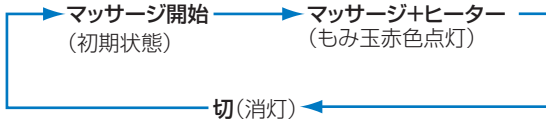

- もみが強く感じる場合はもみ玉カバーを閉じてください。
- やわらかいベッドやソファの上で使用するともみ感が弱まる場合があります。
- 商品に大きな負荷がかかるような使い方をすると、安全装置が作動しモーターが止まる場合があります。この場合再度スイッチを押すと再び動きます。

※回転方向(もみ上げ、もみ下げ)が30秒ごとに変わります。

正転と逆転が切り替わる時、もみ玉は一瞬停止しますが、故障ではありません。

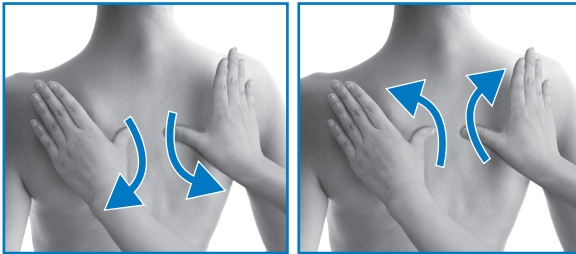

使用を終了する

- 1 本製品の動作状態に合わせて「切」になるまでスイッチを押す電源が切れます。




カーアダプターの使いかた

カーアダプターに接続する

このカーアダプターは12V車専用です。必ず、ご使用の車が12V仕様かご確認ください。カーアダプターを車のシガーソケットと電源コネクターに接続して使用します。


- 1 カーアダプターを車のシガーソケットに差し込む前に、車のエンジンを始動する
- 2 本製品の電源コネクターへ、カーアダプターのアダプタージャックを差し込む
- 3 車のシガーソケットに、カーアダプター本体を差し込む
※入らない場合はカーアダプター本体を入れやすい角度にまわして、差し込んでください。
※通電中は通電ランプが点灯します。

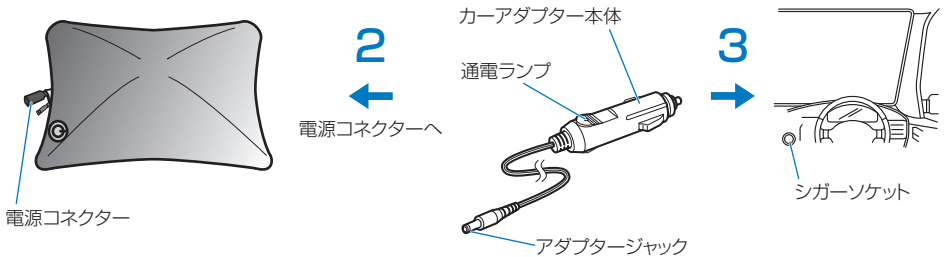

ヒューズの交換について

ヒューズが切れている場合、本製品は動作しません。以下の手順でヒューズを交換してください。カーアダプターには電流が過剰に流れないように安全目的でヒューズを取りつけています。

- 1 カーアダプター本体の先端を反時計方向に回して外す
- 2 新しい市販のヒューズ(125V 5A 3cm ガラス管)と交換して元に戻す

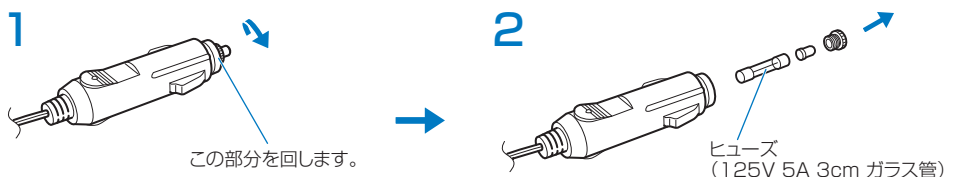





保管について




- 汚れやホコリを取ったあと、湿気の少ないところに保管してください。
- 長期間で使用にならないときは、カバーなどをかけてホコリがつかないようにしてください。
- 子供の手の届くところには保管しないでください。
- 廃棄は必ず各都道府県、市町村の指示にしたがってください。

お手入れ

本体カバーの洗濯のしかた

- 1 コネクターを引っ張り防止ゴムから外す 
- 2 本体カバーのファスナーを開ける 
- 3 ワンタッチテープを外し、本体を取り出す 
- 4 商品に縫い付けてある洗濯絵表示に従い洗う
ファスナーを閉めてください。
ワンタッチテープや他の洗濯物を傷めるおそれがあります。
- 5 しわをのぼし形を整えてから、日陰に干す 

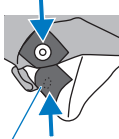本体カバーの取り付けかた

- 1 本体に本体カバーをかぶせワンタッチテープを貼り付ける 
位置を確認して貼り合わせてください。
- 2 本体カバーのファスナーを閉じる 
- 3 引っ張り防止ゴムにコネクターを通して固定する 
引っ張り防止ゴム

本体のお手入れ

- やわらかい布でから拭きしてください。
- 汚れがひどいときは、ぬるま湯でうすめた中性洗剤にやわらかい布を浸して、よく絞って拭き、最後から拭きしてください。
- 変色などの防止のため、シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。

故障かなと思ったら

修理に出す前にもう一度点検してください。それでも正常に動作しないときはお買上げの販売店に修理を依頼してください。絶対に分解したり、修理改造はしないでください。異常動作をしてけがや事故のおそれがあります。

動かない	AC アダプターが抜けていませんか？ AC アダプターをコンセントに差込んでもう一度操作してください。
	スイッチは正しく動作していますか？ 本体カバーのワンタッチテープを貼り直して動作を確認してください。 (P9「本体カバーの取り付けかた」参照)
	カーアダプターのヒューズを確認してください。 ヒューズが切れている場合は交換してください。 (P8「ヒューズの交換について」参照)
運転中に停止した	大きな負荷がかかっていませんか？ 安全装置が作動しモーターが止まる場合があります。 スイッチを押すと運転を再開します。
	スイッチを押してから、約15分経過するとタイマー機能がはたらき、自動的に運転が停止します。故障ではありません。 スイッチを押すと運転を再開します。
ヒーターがあまり温かくない	ヒーターの温度は使用時間や環境によって最高温度まで達しない場合があります。あらかじめご了承ください。
異音がる音が大きい	マッサージの振動音は構造上発生するものですので、異常ではありません。

仕様

■本体

類別	機械器具77 バイブレーター
医療機器分類	管理医療機器
一般名称	家庭用電気マッサージ器 (JMDNコード 34662000)
販売名	ルルド マッサージクッションS
商品番号	AX-HL128
医療機器認証番号	223AGBZX00069000
使用目的・効能または効果	あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用すること。
電気定格	AV100V 50/60Hz 8W
本体定格	DC12V 8W (ヒーター1W)
アダプター定格	入力 AC100V 50/60Hz 600mA 出力 DC12V 2A
タイマー	15分自動オフ
製品サイズ(約)	W360×L240×H120(mm)
製品重量	約1.4kg
素材	クッション材:ウレタンフォーム 張り材 :ポリエステル100% 本体カバー :ポリエステル100% ポリエステル55%ナイロン45%(マッサージ部)
回転数	30回/分
ヒーターの最高温度	50℃以下
生産国	中国
製造業者	ZHANGZHOU EASEPAL INDUSTRIAL CORPORATION(中国)
製造販売業者	株式会社 アテックス

■カーアダプター

商品番号	AX-Z08
アダプター定格	入力 DC12V 出力 12V 5A(最大)
製品サイズ(約)	W25×L90(mm)
製品重量	80g
素材	ポリカーボネート樹脂
ヒューズ	ガラス管ヒューズ 125V 5A 3cm