

# 取扱説明書

保証書付

添付文書

保管用

製造番号

 Lourdes

## WRAPPING MASSAGER

管理医療機器：家庭用電気マッサージ器  
ルルド ラッピングマッサージャー

品番 AX-HPL305



### 目次

△ 安全上のご注意	1～4	📁 保管について	13
🔍 梱包内容と各部の名称	5	🔧 故障かなと思ったら	13
👤 使いかた	6～11	⚙️ 仕様	14
🧼 お手入れ	12	♡ 保証とアフターサービス	裏表紙





このたびはAX-HPL305をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。**ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。**なお、この取扱説明書には保証書がついています。お読みになられたあとも、大切に保管してください。

※デザイン仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。

ATEX

# ⚠ 安全上のご注意

ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために必ずお守りいただく事を説明しています。

<b>警告表示の意味</b>	表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で示しています。	
 <b>警告</b>	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。	 <b>禁止を促す記号</b>
 <b>注意</b>	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。	 <b>強制を促す記号</b>

## ⚠ 警告

### 症状について



**次の人は使用しないでください。症状を悪化させるおそれがあります。**

- ・医師からマッサージを禁じられている人  
例：血栓 [そく (塞) 栓] 症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎、皮膚感染症 (皮下組織の炎症含む) など

**自分で意思表示のできない方や身体の不自由な方には使用させないでください。**  
けがの原因になります。



**次のような人は必ず医師とご相談の上ご使用ください。**

事故や健康を害するおそれがあります。

- ・ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人
- ・悪性腫瘍のある人
- ・心臓に障害のある人
- ・温度感覚喪失が認められる人
- ・妊娠初期の不安定期または出産直後の人
- ・糖尿病などによる高度な末しょう (梢) 循環障害からくる知覚障害のある人
- ・皮膚に創傷のある人
- ・安静を必要としている人や体調がすぐれない人
- ・骨粗しょう症の人、せきついの骨折、ねんざ、肉離れなど、急性 [とう (疼) 痛性] 疾患の人
- ・体温 38℃以上 (有熱期) の人  
例：急性炎症症状 [けん (倦) 怠感、悪寒、血圧変動など] の強い時期、衰弱しているとき
- ・その他、医療機関で治療中の人
- ・けんしょう (腱鞘) 炎の人

**使用中身体に異常を感じたときはすぐに使用を中止し、医師に相談してください。**  
健康を害するおそれがあります。

**使用しても効果が現れない場合は医師または専門家に相談してください。**  
事故や健康を害するおそれがあります。

## ご使用について



幼児やお子様を使用させたり、本体で遊ばせたりしないでください。

使用前にカバーに破れが無いか確認し、破れがある場合は使用を中止してください。

カバーを外した状態や、破れた状態で使用しないでください。

カバーが破れた場合は勝手に修理などせず、お買い上げの販売元または製造販売元に連絡してください。

事故やけがの原因になります。

マッサージ以外の用途に使用しないでください。

事故やけがの原因になります。

他の治療器と同時に使用しないでください。

健康を害するおそれがあります。

マッサージ部周辺にアクセサリーなど硬いものをつけて使用しないでください。

事故やけがのおそれがあります。

腕、脚、足裏、骨盤おしり周りのマッサージ以外の目的で使用しないでください。

頭部、けい部(首)、胸部、腹部には使用しないでください。

事故やけがの原因になります。

使用中は眠らないでください。

無意識での使用は身体への異常やけがの原因になります。

低温やけどをおこすおそれがあります。次のような使いかたはしないでください。

- ・布団などをかけての使用
- ・熱すぎると感じた場合の使用
- ・ストーブなど暖房器具の近くでの使用

### 「低温やけど」について

比較的低い温度(40℃～60℃)でも長時間皮膚の同じ場所に触れていると、熱い、痛い自覚症状がなくても低温やけどになるおそれがあります。


マッサージ部のカバーをはずして使用しないでください。

事故やけがのおそれがあります。

# 安全上のご注意


## 警告

### 電源について

 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。また、本体の底でコードを踏んだ状態のまま使用しないでください。感電・ショート・火災の原因になります。

電源コードやACアダプターが傷んだり、コンセントの差込がゆるいときは使用しないでください。

感電・ショート・火災の原因になります。

 お手入れの際は必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。

感電やけがの原因になります。

電源は交流用100V専用コンセントを使用してください。

火災やけがの原因になります。

ACアダプターを抜くときは、コードを持たずにACアダプター本体を持って引き抜いてください。

感電・ショート・発火の原因になります。

使用時以外はACアダプターをコンセントから抜いてください。

絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。

ACアダプターは付属品の指定されたものを使用してください。また、付属のACアダプターはほかの商品には使用しないでください。


MODEL No. SW-0799 (9098)

他のアダプターを使用すると故障の原因になります。

停電の時はすぐに電源を切ってください。

感電やけがの原因になります。

### 異常(故障)について

 故障を発見したときはすぐに使用を中止し電源を切ってください。事故やけがの原因になります。

 緊急時や動作中に異常を感じたら、直ちにACアダプタープラグを本体から抜いてください。事故やけがの原因になります。

### その他

 改造はしないでください。また、機器が故障した場合には、勝手に修理などせず、販売店又は製造販売元に連絡してください。

火災・感電・けがの原因になります。



**注意**

## ご使用について



浴室など湿気の多い場所では使用しないでください。また、水などの液体がかからないようにしてください。

感電や故障の原因になります。

布団の中や、毛布などをかぶせて使用しないでください。

本体内部が高温になる可能性があります。

この商品は一人用です。複数の人が同時に使用しないでください。

故障や事故の原因になります。

本体に強い衝撃をあたえないでください。

故障や事故の原因になります。

製品の上に横にならないでください。

この製品は、脚や腕に巻いたり、当てたりして使用することを意図した製品です。故障や事故の原因になります。

製品の上に立ったり、座ったりして使用しないでください。

事故や故障・けがのおそれがあります。

マッサージ部に勢いよく脚をおろしたりしないでください。

事故や故障・けがのおそれがあります。



同じ部位への使用時間は10分以内としてください。1日に複数回使用される場合は時間をあけて3回までとしてください。

長時間の連続使用は、必要以上の刺激となり逆効果やけがの原因になります。

使い始めは使用時間を5分程度を目処に短くしてご使用ください。

健康を害するおそれがあります。

左右の本体をつなぐ接続コードが伸びきらないように使用してください。

故障の原因になります。

# 梱包内容と各部の名称


## 梱包内容の確認

開梱したら、ご使用になる前に以下のものが揃っているか確認してください


- 本体
- ACアダプター

## 各部の名称

### 本体・外側


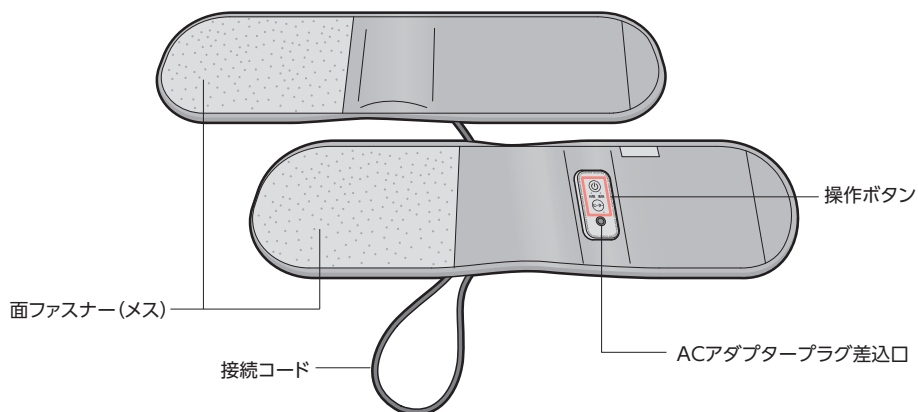


### 本体・内側



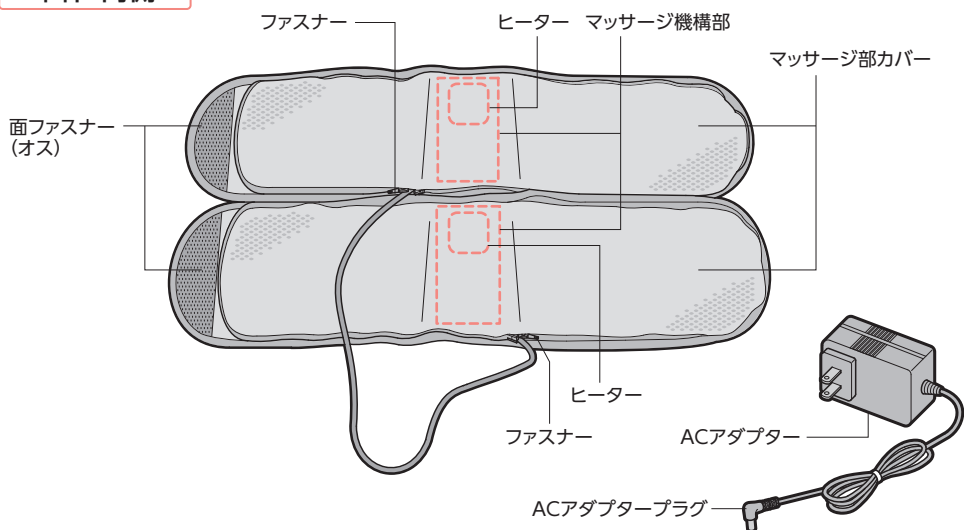


ルルド ラッピングマッサージャーは  
いろいろな使い方が楽しめます

〈 1つにつなげて  
骨盤まわり・おしり 〉

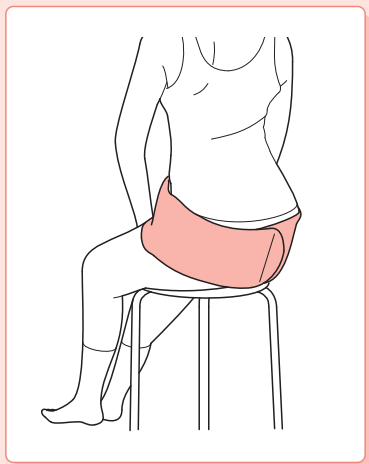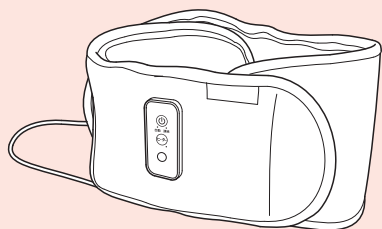


〈 2つに分けて  
足裏・脚・腕に 〉

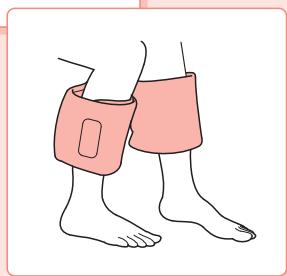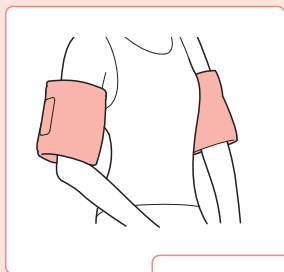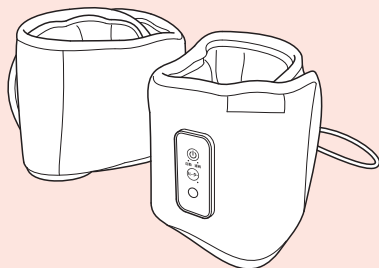

## ⚠️ ご注意 使用前の注意事項

- 使用前にマッサージ部の縫製破れがないか確認してください。  
破れている場合は使用しないでください。
- 使用前に電源ボタンや、ヒーターボタンなど各ボタン、タイマーが正常に動作するか確認してください。
- しばらく使用しなかった場合、もう一度取扱説明書をよく読み、機器が正常にまた、安全に動作することを確認してから使用してください。

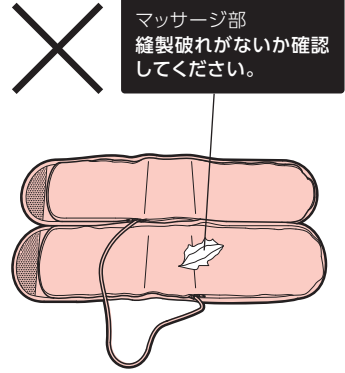


## 装着する (骨盤まわり・おしりに使用する)

### 1 本体をつなげる

本体を連結させて長い带状にします。操作部が右側になるようにしてください。


※開梱時はつながった状態で封入されています。

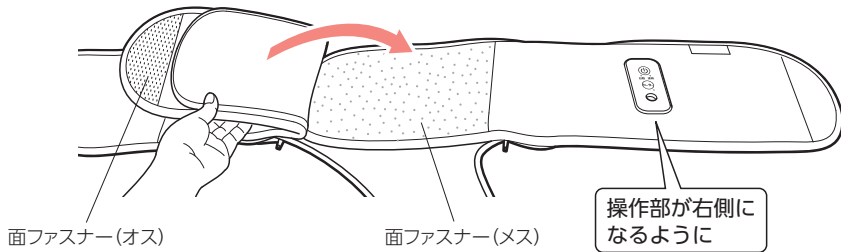


### POINT

- 面ファスナーを留める位置でサイズ調節ができます。  
下記の数値を参考に調節ください。

最小 約70cm

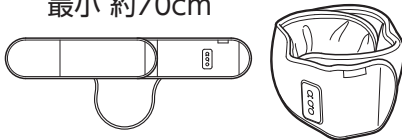


最大 約110cm

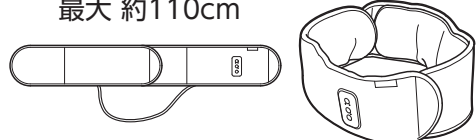




## 2 装着する

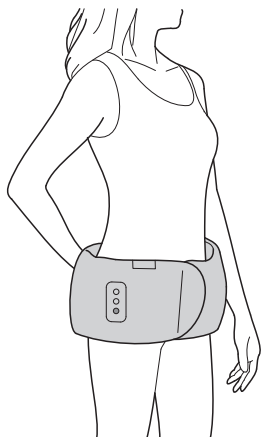

立った姿勢で、マッサージ機構部が身体の左右に来るように巻いてください。

位置がきまったら、面ファスナーをしっかり押さえて固定します。

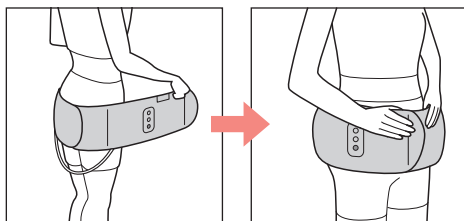


おしりに巻きつけます

前で留めます

### ⚠ 注意

- 面ファスナーが衣服につかないようご注意ください。

## 3 確認する

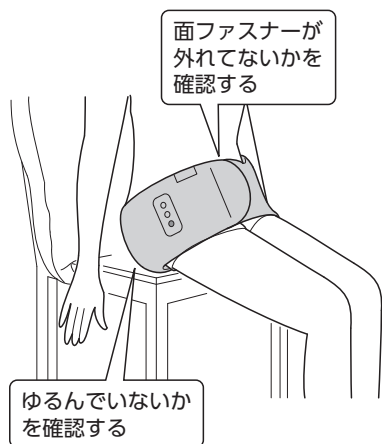

面ファスナーが外れてないかを確認する

ゆるんでいないかを確認する


座って使用する時はもう一度、面ファスナーを確認する。

座る時に面ファスナーが外れたり、ゆるんだりする場合があります。

その場合はしっかり巻き直しをしてください。


## 装着する（脚・足裏に使用する）

### 1 《脚・ふともも》

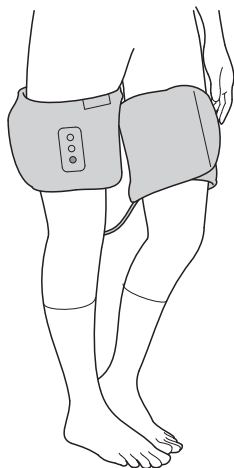


### 《脚・ふくらはぎ》

### 《足裏》

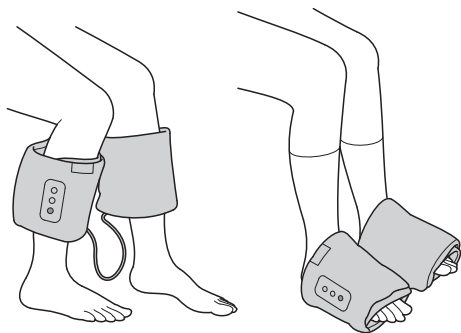

## 本体を装着する

操作ボタンがある方が右になるように  
マッサージしたい部位に巻きつけます。

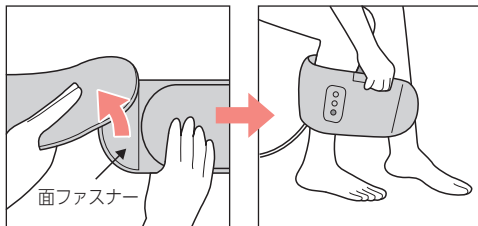

つながっている場合は  
面ファスナーを外して  
二つに分けます

マッサージ機構部が  
ふくらはぎに当たるよ  
うに、左右それぞれ  
を巻きつけます

### ⚠ 注意

- ずれ落ちないようにしっかりと巻きつけてください。
- 面ファスナーが衣服につかないようご注意ください。

### ＜足裏に使用する場合＞

- 装着時は不安定な体勢になり、大変危険です。必ず座ってご使用ください。
- 装着した状態で歩いたり、過剰な力をかけたりしないでください。故障の原因になります。

### POINT

- 面ファスナーを留める位置でサイズ調節ができます。  
右記の数値を参考に調節してください。


最小 約22cm

最大 約55cm



## 装着する（腕に使用する）

1

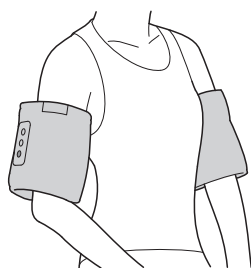

### 本体で輪を作る

手にフィットする大きさに調節して輪にします。



2

### 腕に通す

左右それぞれ、マッサージしたい部位まで引き上げます。




### ⚠ 注意

- 装着時に衣服やストッキングに面ファスナーが衣服につかないようご注意ください。
- 動作中にずれ落ちるので腕と体で少し挟んでください。

## ACアダプターをつなぐ


1

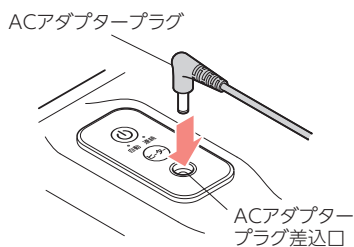

### ACアダプタープラグを本体のACアダプタープラグ差入口に差し込む

まっすぐ根元まで確実に差し込んでください。

2

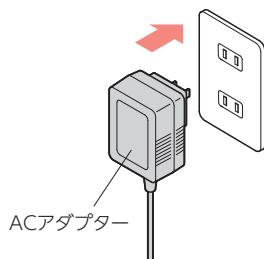


### ACアダプターをコンセントに差し込む

まっすぐ根元まで確実に差し込んでください。

## マッサージをする


### 1 電源ボタン を押す

電源ボタンを押すと振動がスタートし、押すたびにモードが切り替ります。

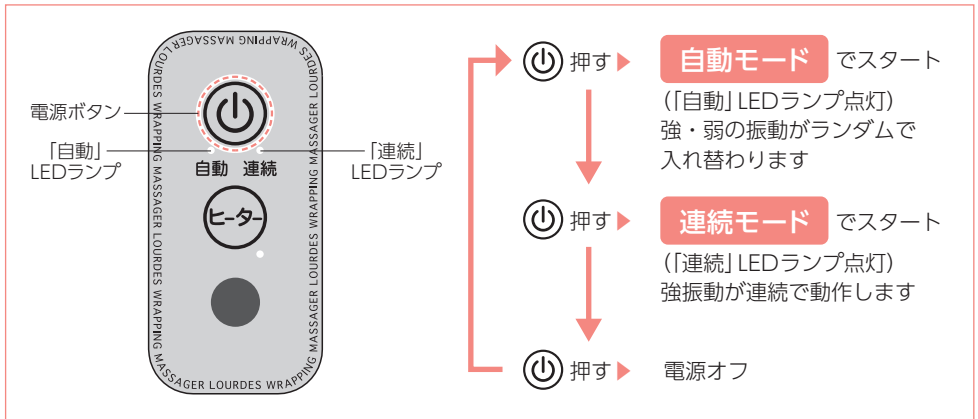


### 2 ヒーターを使う

ヒーターボタンでオン/オフの操作が行えます。ヒーターの単独での使用も可能です。

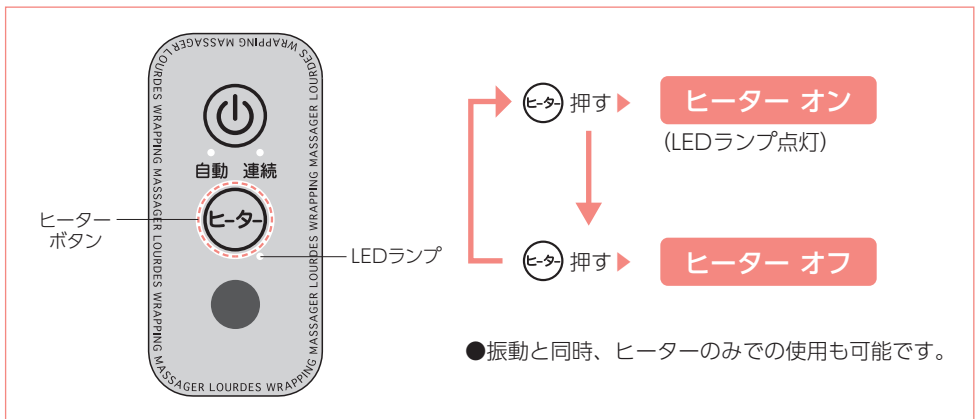

### 3 本体の電源ボタン を押して動作を停止する

(動作中のモードによって、電源ボタン  を押す回数が異なります。)

※約10分で自動的に電源が切れます。(10分タイマー)


## ⚠ 警告

●必ず電源が「切」の状態ですACアダプターをコンセントから抜いて行ってください。

- 本体はやわらかい布でから拭きしてください。
- 汚れがひどいときは、ぬるま湯でうすめた中性洗剤にやわらかい布を浸して、よく絞って拭き、最後から拭きしてください。
- 変色などの防止のため、シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。
- 年に一度は電源プラグ(金属部分)をから拭きをしてください。  
(絶縁劣化防止のため)

## カバーのお手入れ方法


マッサージ部カバーは外して洗濯できます。

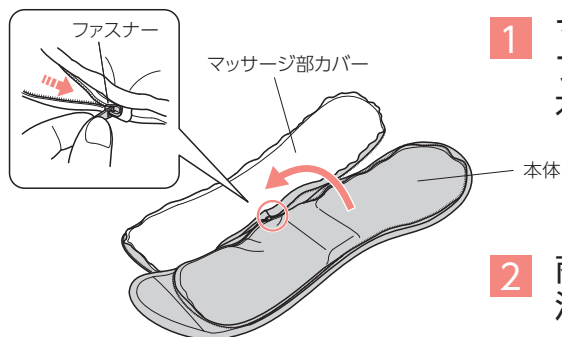

1 マッサージ部カバーのファスナーを開けて、本体からはずす

2 商品に縫い付けてある洗濯絵表示に従い洗う

3 しわをのぼし形を整えてから、日陰に干す

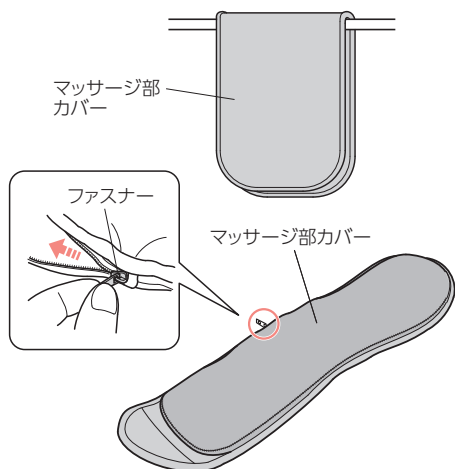

4 マッサージ部カバーのファスナーを閉じて、本体に取り付ける

# 保管について

- 汚れやホコリを取ったあと、湿気の少ないところに保管してください。
- 長期間ご使用にならないときは、カバーなどをかけてホコリがつかないようにしてください。
- 幼児やお子様の手の届くところには保管しないでください。
- 廃棄は必ず各都道府県、市町村の指示にしたがってください。
- コード類はねじれをほどこいて保管してください。

## 故障かなと思ったら

修理に出す前にもう一度点検してください。それでも正常に動作しないときはお買上げの販売店に修理を依頼してください。絶対に分解したり、修理改造はしないでください。異常動作をしてけがや事故のおそれがあります。

動かない	ACアダプターが間違っていないですか？ 付属の専用ACアダプターを使用してください。
	ACアダプターが抜けていませんか？ ACアダプターをコンセントに差し込んでもう一度操作してください。
	操作ボタンは正しく動作していますか？
運転中に 停止した	操作ボタンを押してから、約10分経過するとタイマー機能がはたらき、自動的に運転が停止します。故障ではありません。操作ボタンを押すと運転を再開します。
異音がる 音が大きい	マッサージの振動音は構造上発生するものですので、異常ではありません。



# 仕様

類別	機械器具77 バイブレーター
医療機器分類	管理医療機器
一般的名称	家庭用電気マッサージ器 (JMDNコード 34662000)
販売名	ルルド ラッピングマッサージャー
商品番号	AX-HPL305
医療機器認証番号	302AABZX00063000
使用目的または効果	あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用すること。 [ ●疲労回復 ●血行をよくする ●筋肉の疲れをとる ●筋肉のこりをほぐす ●神経痛・筋肉痛の痛みの緩解 ]
電気定格	AC100V 50/60Hz 16W (ヒーター 6W)
アダプター定格	入力 AC100-240V 50/60Hz 0.7A 出力 DC12V 2A
タイマー	10分自動オフ
製品サイズ	W660×L1170×H60mm (片足)
製品重量	約800g (両足)
素材	本体内部：ABS樹脂、ウレタンフォーム 本体カバー：ポリエステル、レーヨン マッサージ部カバー：ポリエステル
振動回数	低速：約2,000回/分 高速：約3,400回/分
生産国	中国
製造業者	ZHANGZHOU EASEPAL INDUSTRIAL CORPORATION (中国)
製造販売業者	株式会社 アテックス

# ♡ 保証とアフターサービス

- 1 本製品の保証書は、下記に添付しています。保証書は必ず「お買上げ年月日」と「販売店名」など、所定事項の記入および記載内容をよくお読みのと、大切に保管してください。
- 2 保証期間は、お買上げ日より1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは保証書をご提出のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。
- 3 保証期間経過後の修理につきましては、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 4 弊社は「ルルド ラッピングマッサージャー」の補修用性能部品の最低保有期間を、製造打切後最低3年間としています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店、または下記に明記しておりますカスタマーサービス課までお問い合わせください。

## 保証書

本製品は厳密な検査を経て出荷されたものです。  
お客様の正常な使用状態で万一故障した場合は、保証書に記載された期間、下記保証規約により無料修理をお約束いたします。修理は必ず本書を添えてご依頼ください。



株式会社アテックス  
〒547-0014 大阪市平野区長吉川辺3-3-24  
<https://www.atex-net.co.jp/>

品名 / 型番	ルルド ラッピングマッサージャー / AX-HPL305		
お買上げ年月日*	年 月 日	保証期間	お買上日より1年 本体
★ お客様	お名前	★ 販売店	
	ご住所 TEL: ( ) -		

★欄に記入のない場合、本書は無効となることがありますので、必ず記入の有無をご確認ください。

### 保証規約

- 1 保証期間中であっても以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障などについては本保証書は適用されません。
  - ・取扱上の不注意、誤った使用方法
  - ・天災、火災などによる故障または損傷
  - ・お買上げ後の転居等による輸送、移動、落下など
  - ・保存上の不備
  - ・弊社または弊社の指定した事業所以外で行われた修理、改造
  - ・本製品本来の使用目的以外の使用
  - ・一般家庭以外（例えば業務用の長時間使用、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷
- 2 運賃諸掛り費用は原則としてお客様にてご負担願います。
- 3 無料保証期間はご購入の日から1年間です。
- 4 保証の適用されない故障および保証期間経過後の故障については、有料で修理いたします。
- 5 保証書の再発行はいたしません。
- 6 本書のご提示がない場合や無料保証期間を過ぎた場合は、有料修理になります。
- 7 本書は日本国内においてのみ有効です。

本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。  
従って本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

株式会社アテックス  
ATEX <https://www.atex-net.co.jp/>

株式会社アテックス 大阪物流センター  
〒595-0074 大阪府泉大津市小津島町6-11

■修理・アフターサービスについてのご相談・お問い合わせは



カスタマーサービス課

0120-486-505

受付時間 平日9:00~17:00(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)