

LEG Lourder® Massager

AX-HXL195 レッグマッサージャーSS

製造番号

取扱説明書

保証書付

添付文書

保管用

管理医療機器：家庭用電気マッサージ器

レッグマッサージャーSS AX-HXL195

もくじ

安全上のご注意	2～3
各部の名称とはたらき	4
使いかた	4～5
保管について	6
お手入れ	6
故障かなと思ったら	7
仕様	7
保証とアフターサービス	8



※デザイン仕様を一部変更している場合があります。
ご了承ください。

このたびは AX-HXL195 をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
なお、この取扱説明書には保証書がついています。
お読みになられたあとも、大切に保管してください。

ATEX

安全上のご注意

ご使用になる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために必ずお守りいただくことを次に説明しています。

警告表示の意味

表示内容を見逃して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で示しています。

警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

注意

この表示の欄は、「損害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

禁止を促す記号



禁止

強制を促す記号



必ず守る

警告



次の人は使用しないでください。

禁止

症状を悪化させるおそれがあります。

- ・ 医師からマッサージを禁じられている人
例: 血栓 [そく(塞)栓] 症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎、皮膚感染症



幼児や小さいお子様に使用させたり、本体で遊ばせたりしないでください。



使用前にマッサージ部の縫製破れがないかを確認してください。

禁止

破れている場合は使用しないでください。



分解禁止

改造はしないでください。また、修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理をしないでください。火災・感電・けがの原因になります。



禁止

マッサージ以外の用途に使用しないでください。事故やけがの原因になります。



禁止

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。感電・ショート・火災の原因になります。



禁止

自分で意思表示のできない方や身体の不自由な方には使用させないでください。けがの原因になります。



禁止

他の治療器と同時に使用しないでください。健康を害するおそれがあります。



禁止

頭、顔、のど、胸、腹部には使用しないでください。事故や体調不良の原因になります。



禁止

布団やコタツの中またはホットカーペットの上および暖房器具の近くで使用しないでください。火災や感電の原因になります。



禁止

同時に複数の人が使用しないでください。故障や事故の原因になります。



禁止

低温やけどをおこす恐れがあります。次のような使いかたはしないでください。

- ・ 熱すぎると感じた場合の使用
- ・ こたつの中や、ストーブなどの暖房器具の近くでの使用

低温やけどの原因になります。

「低温やけど」について

比較的低い温度(40℃~60℃)でも長時間皮膚の同じ場所に触れていると、熱い、痛いの自覚症状がなくても低温やけどのおそれがあります。



禁止

マッサージ部にアクセサリーなど硬いものをつけて使用しないでください。

事故やけがの恐れがあります。



禁止

マッサージ部カバーをはずして使用しないでください。

事故やけがの恐れがあります。



必ず守る

次のような人は必ず医師とご相談の上で使用してください。事故や健康を害するおそれがあります。

- ・ ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人
- ・ 温度感覚喪失が認められる人
- ・ 悪性腫瘍のある人
- ・ 心臓に障害のある人
- ・ 妊娠初期の不安定期または出産直後の人
- ・ 糖尿病などによる高度な末梢(梢)循環障害からくる知覚障害のある人
- ・ 皮膚に創傷のある人
- ・ 安静を必要としている人や体調がすぐれない人
- ・ 骨粗しょう症の人、せきついの骨折、ねんざ、肉離れなど、急性[とう(疼)痛性]疾患の人
- ・ 体温38℃以上(有熱期)の人
例: 急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期、衰弱しているとき
- ・ その他、医療機関で治療中の人

! 使用中身体に異常を感じたときはすぐに使用を中止し、医師に相談してください。
健康を害するおそれがあります。

! 故障を発見したときはすぐに使用を中止し電源を切ってください。
事故やけがの原因になります。

! 停電のときはすぐに電源を切ってください。
感電・ショート・火災の原因になります。

! お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。
感電やけがの原因になります。

! 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込がゆるいときは使用しないでください。
感電・ショート・火災の原因になります。

! 使用しても効果が現れない場合は医師または専門家に相談してください。
事故や健康を害するおそれがあります。

注意

! 浴室など湿気が多い場所では使用しないでください。また、水などの液体がかからないようにしてください。
感電や故障の原因になります。

! 製品の上に横にならないでください。
この製品は、脚や腕に巻いたり、当てたりして使用することを意図した製品です。
故障や事故の原因になります。

! 本体の上に立ったり、座ったりして使用しないでください。
故障や事故の原因になります。

! マッサージ部に勢いよく足を下ろしたりしないでください。
故障・事故・けがのおそれがあります。

! 本体に強い衝撃をあたえないでください。
故障や事故の原因になります。

! 使用中は眠らないでください。
無意識での使用は身体への異常やけがの原因になります。

! 布団の中や、毛布などをかぶせて使用しないでください。
本体内部が高温になる可能性があります。

! 左右の本体をつなぐ接続コードがのびきらないように使用してください。
故障の原因になります。

! 1回の使用は10分以内にしてください。また、同一箇所への連続使用は避けてください。
長時間の連続使用は、必要以上の刺激となり逆効果やけがの原因になります。

! 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端のプラグを持って引き抜いてください。
感電・ショート・発火の原因になります。


! 使用時以外はACアダプターをコンセントから抜いてください。
絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。

! ACアダプターは指定された付属のものを使用してください。
また、付属のアダプターはほかの商品には使用しないでください。

MODELNo | YJS024C-1202000J

他のアダプターを使用すると故障の原因になります。

各部の名称とはたらき

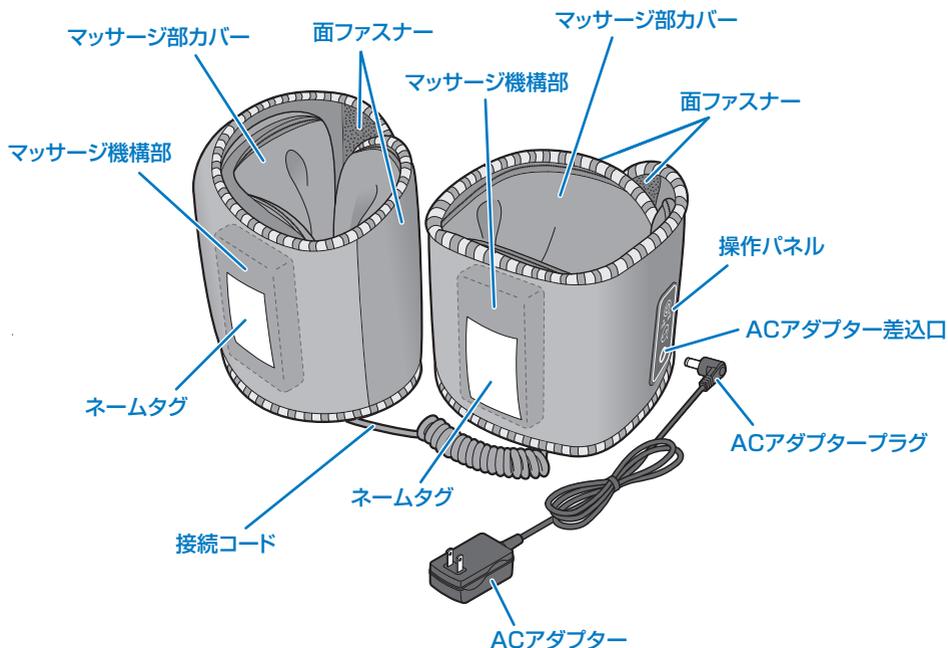

使いかた


⚠️ ご注意 使用前の注意事項

- 使用前にファスナーを開いてマッサージ部カバーをめくり、マッサージ部の縫製破れがないか確認してください。破れている場合は使用しないでください。
- 使用前に操作ボタンや、タイマーが正常に動作するか確認してください。
- しばらく使用しなかった場合、もう一度取扱説明書をよく読み、機器が正常にまた、安全に動作することを確認してから使用してください。




1 ACアダプターのプラグを本体の差込口につなぐ

まっすぐ根元まで確実に差し込んでください。

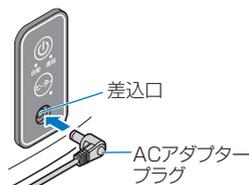

2 ACアダプターをコンセントに差し込む



正しく確実に差し込んでください。

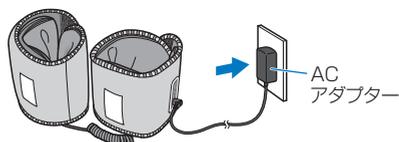

3 ネームタグおよび操作パネルが表側になるように、マッサージしたい部位に巻き付け、面ファスナーで固定する

- マッサージ機構部はネームタグの裏側にあります。
マッサージしたい部位にあたるよう調節してください。

面ファスナー

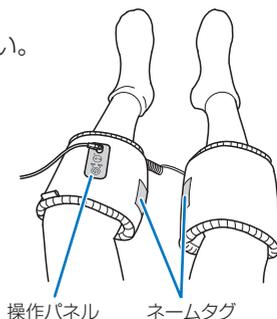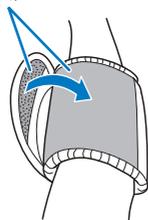

使用例



ご注意

左右の本体をつなぐ
接続コードがのびさ
らないように使用し
てください。

ふくらはぎ



足裏



ひざ裏



4 操作ボタンを押して動作を開始する (振動)

電源ボタン を押すと自動モードで振動を開始、さらに電源ボタン を押すと連続モードで振動します。振動を止めるときは再度電源ボタン を押します。
(自動モードは、低速と高速が自動で変化します。)

OFF 押す → 自動モード 押す → 連続モード 押す


LED(自動)点灯 LED(連続)点灯

(ヒーター)

ヒーターボタン を押すとヒーターが作動します。
再度ヒーターボタン を押すと、止まります。

OFF 押す → ヒーターON 押す

LED(ヒーター)点灯

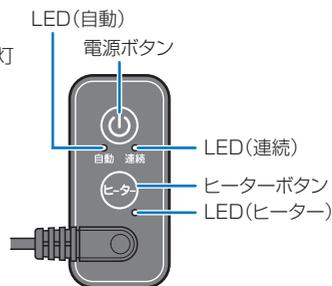

- 振動、ヒーターはそれぞれ単独で使用でき、同時に使用することもできます。
- 振動、ヒーターのいずれかが始動して約10分経過するとタイマー機能がはたらき、自動的に停止します。


保管について

- 汚れやホコリを取ったあと、湿気の少ないところに保管してください。
- 長期間で使用にならないときは、カバーなどをかけてホコリがつかないようにしてください。
- 子供の手の届くところには保管しないでください。
- 廃棄は必ず各都道府県、市町村の指示にしたがってください。

お手入れ


マッサージ部カバーの洗濯のしかた

- 1 マッサージ部カバーのファスナーを開けて、本体からはずす

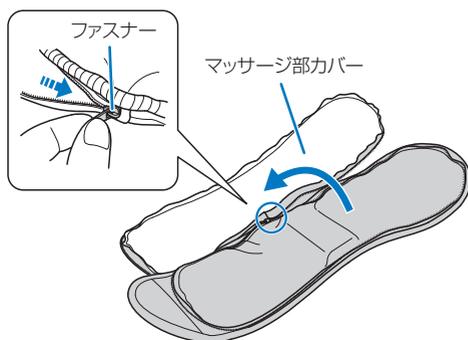


- 2 商品に縫い付けてある洗濯絵表示に従い洗う

- 3 しわをのぼし形を整えてから、日陰に干す

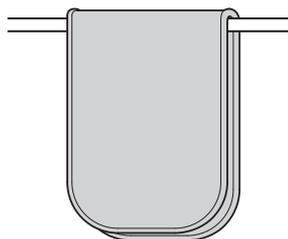

マッサージ部カバーの取り付けかた

- 1 マッサージ部カバーのファスナーを閉じて、本体に取付ける

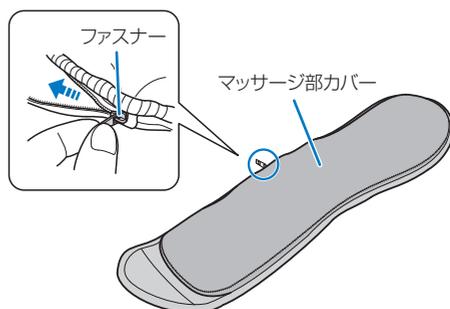

本体のお手入れ

- やわらかい布でから拭きしてください。
- 汚れがひどいときは、ぬるま湯でうすめた中性洗剤にやわらかい布を浸して、よく絞って拭き、最後から拭きしてください。
- 変色などの防止のため、シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。

故障かなと思ったら

修理に出す前にもう一度点検してください。それでも正常に動作しないときはお買上げの販売店に修理を依頼してください。絶対に分解したり、修理改造はしないでください。異常動作をしてけがや事故のおそれがあります。

動かない	ACアダプターが抜けていませんか？ ACアダプターをコンセントに差込んでもう一度操作してください。
	操作ボタンは正しく動作していますか？
運転中に停止した	操作ボタンを押してから、約10分経過するとタイマー機能がはたらき、自動的に運転が停止します。故障ではありません。操作ボタンを押すと運転を再開します。
異音がする 音大きい	マッサージの振動音は構造上発生するものですので、異常ではありません。

仕様

類別	機械器具77 バイブレーター
医療機器分類	管理医療機器
一般名称	家庭用電気マッサージ器 (JMDNコード 34662000)
販売名	レッグマッサージャーSS
商品番号	AX-HXL195
医療機器認証番号	229AABZX00031000
使用目的・効能または効果	あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用すること。
電気定格	AC100V 50/60Hz 16W(ヒーター6W)
アダプター定格	入力 AC100-240V 50/60Hz 800mA 出力 DC12V 2000mA
タイマー	10分自動オフ
製品サイズ	片足(約)W610×L170×H60mm ×2
製品重量	両足約750g
素材	クッション材：ウレタンフォーム 本体カバー：ポリエステル100% もみ玉カバー：品質表示タグ参照
振動回数	低速:約2000回/分、高速:約3400回/分
生産国	中国
製造業者	ZHANGZHOU EASEPAL INDUSTRIAL CORPORATION(中国)
製造販売業者	株式会社 アテックス

保証とアフターサービス

- 1 本製品の保証書は、下記に添付しています。保証書は必ず「お買上げ年月日」と「販売店名」など、所定事項の記入および記載内容をよくお読みのと、大切に保管してください。
- 2 保証期間は、お買上げ日より1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは保証書をご提出のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。
- 3 保証期間経過後の修理につきましては、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 4 弊社は「レッグマッサージャーSS」の補修用性能部品の最低保有期間を、製造打切後最低3年間としています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店、または下記に明記しておりますサービス課までお問い合わせください。

保証書

本製品は厳密な検査を経て出荷されたものです。

お客様の正常な使用状態で万一故障した場合は、保証書に記載された期間、下記保証規約により無料修理をお約束いたします。修理は必ず本書を添えてご依頼ください。



〒547-0014 大阪市平野区長吉川辺3-3-24
TEL:06-6799-8100(代) FAX:06-6799-8118

品名 / 型番		レッグマッサージャーSS / AX-HXL195	
お買上げ年月日*		年 月 日	保証期間 お買上げ日より1年 本体
★ お客様	お名前		★ 販売店
	様		
ご住所			
TEL:() -			

★欄に記入のない場合、本書は無効となることがありますので、必ず記入の有無をご確認ください。

保証規約

- 1 保証期間中であっても以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障などについては本保証書は適用されません。
 - ・取扱上の不注意、誤った使用方法
 - ・天災、火災などによる故障または損傷
 - ・お買上げ後の転居等による輸送、移動、落下など
 - ・保存上の不備
 - ・弊社または弊社の指定した事業所以外で行われた修理、改造
 - ・本製品本来の使用目的以外の使用
 - ・一般家庭以外（例えば業務用の長時間使用、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷
- 2 運賃諸掛り費用は原則としてお客様にてご負担願います。
- 3 無料保証期間はご購入の日から1年間です。
- 4 保証の適用されない故障および保証期間経過後の故障については、有料で修理いたします。
- 5 保証書の再発行はいたしません。
- 6 本書のご提示がない場合や無料保証期間を過ぎた場合は、有料修理になります。
- 7 本書は日本国内においてのみ有効です。

本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

■修理・アフターサービスについてのご相談・お問い合わせは



<http://www.atex-net.co.jp/>

株式会社アテックス 大阪物流センター
〒595-0074 大阪府泉大津市小津島町6-11



カスタマーサービス課

0120-48-6505

受付時間 平日9:00～17:00 (土日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)