

取扱説明書

保証書付

添付文書

保管用

製造番号



MASSAGE STOOL *luxe*

マッサージスツール リュクス AX-HXT179

管理医療機器：家庭用エアマッサージ器



目次

△ 安全上のご注意	1 ~ 4	📦 保管について	13
○ 梱包内容と各部の名称	5	🔧 故障かなと思ったら	13
👤 使いかた	6 ~ 11	⚙️ 仕様	14
🧼 お手入れ	12	♡ 保証とアフターサービス	15





このたびはAX-HXT179をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。**ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。**なお、この取扱説明書には保証書がついています。お読みになられたあとも、大切に保管してください。

※デザイン仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。

ATEX

⚠ 安全上のご注意

ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために必ずお守りいただく事を説明しています。

警告表示の意味	表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で示しています。	
 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。	 禁止を促す記号
 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。	 強制を促す記号

⚠ 警告

症状について



次の人は使用しないでください。症状を悪化させるおそれがあります。

- ・医師からマッサージを禁じられている人
例：血栓 [そく (塞) 栓] 症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎、皮膚感染症 (皮下組織の炎症を含む)

自分で意思表示のできない方や身体の不自由な方には使用させないでください。
けがの原因になります。



次のような人は必ず医師とご相談の上ご使用ください。

事故や健康を害するおそれがあります。

- ・ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人
- ・悪性腫瘍のある人
- ・心臓に障害のある人
- ・温度感覚喪失が認められる人
- ・妊娠初期の不安定期または出産直後の人
- ・糖尿病などによる高度な末しょう (梢) 循環障害からくる知覚障害のある人
- ・皮膚に創傷のある人
- ・安静を必要としている人や体調がすぐれない人
- ・骨粗しょう症の人、せきついの骨折、ねんざ、肉離れなど、急性 [とう (疼) 痛性] 疾患の人
- ・体温 38℃ 以上 (有熱期) の人
例：急性炎症症状 [けん (倦) 怠感、悪寒、血圧変動など] の強い時期、衰弱しているとき
- ・その他、医療機関で治療中の人
- ・けんしょう (腱鞘) 炎の人

使用中身体に異常を感じたときはすぐに使用を中止し、医師に相談してください。
健康を害するおそれがあります。

使用しても効果が現れない場合は医師または専門家に相談してください。

事故や健康を害するおそれがあります。

ご使用について



幼児や小さいお子様に使用させたり、本体で遊ばせたりしないでください。

使用前にカバーに破れが無いか確認し、破れがある場合は使用を中止してください。

カバーを外した状態や、破れた状態で使用しないでください。

カバーが破れた場合は勝手に修理などせず、お買い上げの販売店または製造販売元に連絡してください。

事故やけがの原因になります。

マッサージ、スツール以外の用途に使用しないでください。

事故やけがの原因になります。

他の治療器と同時に使用しないでください。

健康を害するおそれがあります。

マッサージ部周辺にアクセサリーなどの装身具をつけて使用しないでください。

事故やけがのおそれがあります。

けい部(首)に使用しないでください。

脚部のマッサージ以外の目的で使用しないでください。

事故やけがの原因になります。

使用中は眠らないでください。

無意識での使用は身体への異常やけがの原因になります。

低温やけどをおすすめおそれがあります。次のような使いかたはしないでください。

- ・布団などをかけての使用
- ・熱すぎると感じた場合の使用
- ・ストーブなど暖房器具の近くでの使用

「低温やけど」について

比較的低い温度(40℃～60℃)でも長時間皮膚の同じ場所に触れていると、熱い、痛い自覚症状がなくても低温やけどになるおそれがあります。



足のサイズが合わない方は、ご使用にならないでください。

事故やけがのおそれがあります。

電源について



電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。また、本体の底でコードを踏んだ状態のまま使用しないでください。感電・ショート・火災の原因になります。

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込がゆるいときは使用しないでください。

感電・ショート・火災の原因になります。



停電のときはすぐに電源を切ってください。

感電・ショート・火災の原因になります。

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。

感電やけがの原因になります。


電源は交流用100V専用コンセントを使用してください。

火災やけがの原因になります。

安全上のご注意

警告

電源について(つづき)

-  ACアダプターを抜くときは、コードを持たずにACアダプター本体を持って引き抜いてください。

感電・ショート・発火の原因になります。

使用時以外はACアダプターをコンセントから抜いてください。


絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。

ACアダプターは付属品の指定されたものを使用してください。また、付属のACアダプターはほかの商品には使用しないでください。


MODEL No. SAW36-120-3000J

他のアダプターを使用すると故障の原因になります。

異常(故障)について

-  故障を発見したときはすぐに使用を中止し電源を切ってください。
事故やけがの原因になります。

その他

-  改造はしないでください。また、機器が故障した場合には、勝手に修理などせず、販売店又は製造販売元に連絡してください。
火災・感電・けがの原因になります。



注意

ご使用について



浴室など湿気の多い場所では使用しないでください。また、水などの液体がかからないようにしてください。

感電や故障の原因になります。

布団の中や、毛布などをかぶせて使用しないでください。

本体内部が高温になる可能性があります。

この商品は一人用です。複数の人が同時に使用しないでください。

故障や事故の原因になります。

足を入れたまま、商品を動かさないでください。

事故やけがのおそれがあります。

本体に強い衝撃をあたえないでください。

故障や事故の原因になります。

足を入れたまま、本体の上で立たないでください。

故障や事故の原因になります。

踏み台として本体の上に乗ったり、立ったりしないでください。

事故やけがのおそれがあります。

スタンドをおこした状態で、体重をかけたり、座ったりしないでください。

故障や事故の原因になります。

持ち手を強く引っ張ったり、振り回さないでください。

思わぬ事故やけがのおそれがあります。



使い始めは強さを「弱」でご使用ください。

初めからマッサージの刺激を強くすると、健康を害するおそれがあります。

1回の使用は15分以内とし、1日の使用は1日2回、30分以内にしてください。

長時間の連続使用は、必要以上の刺激となり逆効果やけがの原因になります。

マッサージの刺激が強すぎると感じた時は、靴下をはいて強さを「弱」にし、使用時間を短くしてください。

強い刺激のまま使用を続けると、健康を害するおそれがあります。


🔍 梱包内容と各部の名称

梱包内容の確認

開梱したら、ご使用になる前に以下のものが揃っているか確認してください

- 本体
- ふとももエアバッグ (本体の中に入れてあります)
- 脚底フェルト (前脚用・後脚用 各2枚)
- ACアダプター (本体の中に入れてあります)

各部の名称

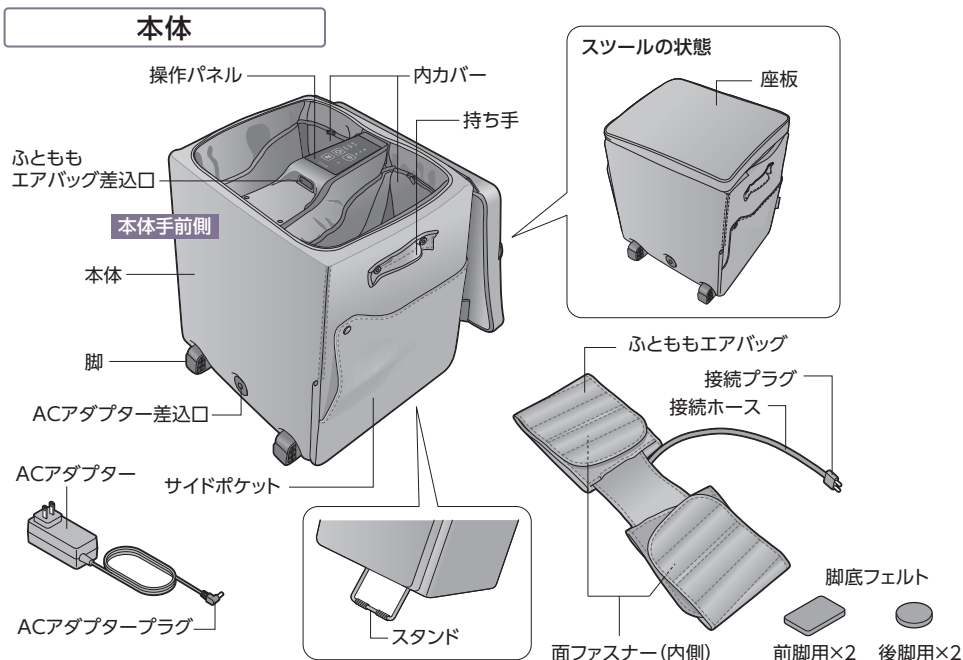

操作パネル

コース表示ランプ

選択されているコースが点灯します。

電源ボタン

電源入り切りの切替と、コースの切替をします。

ヒーターボタン

ヒーター入り切りの切替をします。

ほくす
しほる
のぼす



弱
中
強



強さ表示ランプ

選択されているエアマッサージの強さが点灯します。

強さ選択ボタン

エアマッサージの強弱を調節します。

停止ボタン

全ての動作が停止します。

⊕TOR


人 使いかた

⚠️ ご注意 使用前の注意事項


- 使用前にマッサージ部の縫製破れがないか確認してください。破れている場合は使用しないでください。
- 使用前に電源ボタンや、停止ボタンなど各ボタン、タイマーが正常に動作するか確認してください。
- しばらく使用しなかった場合、もう一度取扱説明書をよく読み、機器が正常にまた、安全に動作することを確認してから使用してください。



マッサージ部
縫製破れがないか確認
してください。

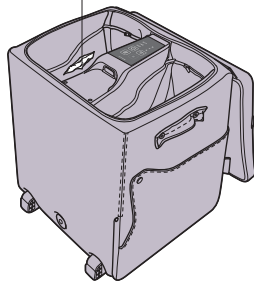


ご使用前に

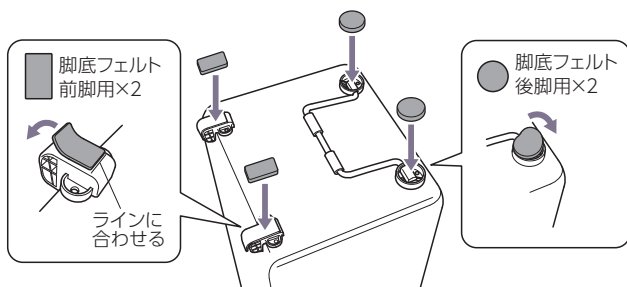


- フローリングなど、床に傷がつくおそれがある場合は、付属の脚底フェルトを貼りつけてご使用ください。

ACアダプターをつなぐ

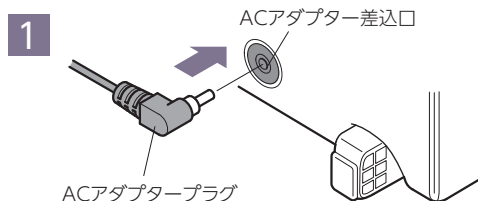

ACアダプタープラグを
本体のACアダプター差込口
につなぐ


まっすぐ根元まで確実に差し込んでください。

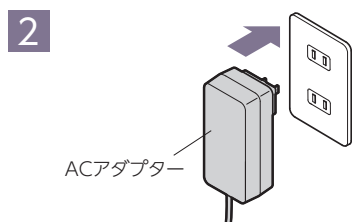

ACアダプターを
コンセントに差し込む

まっすぐ根元まで確実に差し込んでください。

準備をする

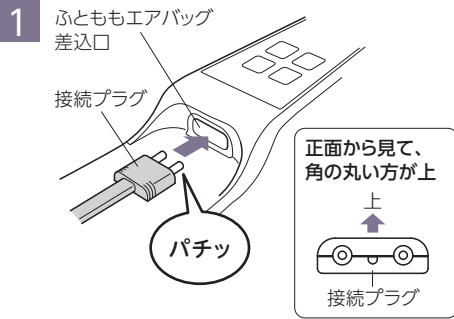


※ふとももエアバッグなしでの使用も
できます。

ふとももエアバッグを本体に接続する


ふとももエアバッグの接続プラグをパチッと音がするまで本体の差込口に差し込みます。

※向きに注意して止まるまで差し込んでください。

※ふとももエアバッグの脱着の際は接続ホースを持たずに、必ず接続プラグを持って行ってください。

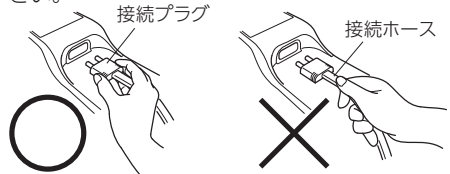

2

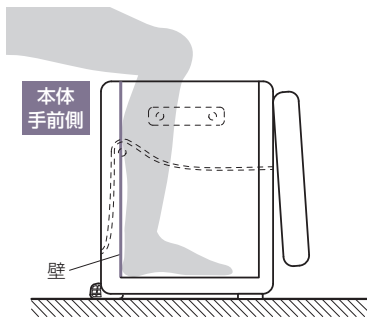

足を入れる

本体手前側から両足を入れ、ふくらはぎとかかとを内側の壁につけてください。

⚠️ ご注意

足のサイズが合わない方は、ご使用にならないでください。


事故やけがのおそれがあります。

■ 対象サイズ

ふくらはぎ周囲：45cm以下、足：29cm以下

ふともも周囲：57cm以下

3

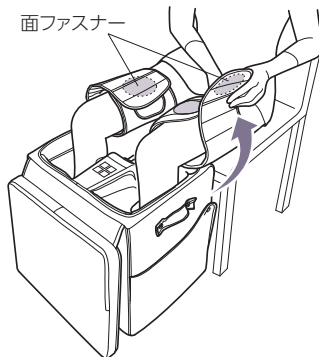

ふとももエアバッグを巻きつける

ふとももエアバッグをひざの上に置き、ベルトを巻き上げます


※いすに浅く座ると巻きやすくなります。

※面ファスナーが浮かないように、しっかりと押さえてください。

- 巻き方によってマッサージの強さが変わります。初めてのご使用時はゆるめに巻いて調節してください。
- 装着時に衣服やストッキングに面ファスナーがつかないようにご注意ください。

操作のしかた

マッサージをする

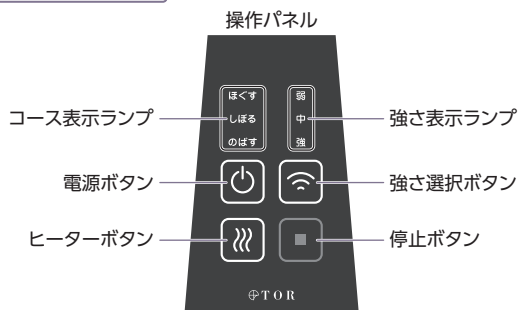

1 電源ボタン(🔌)を押して動作を開始する

ランプが点灯してマッサージがはじまります。

※動作開始時は、コース「ほぐす」、強さ「中」、ヒーター「オフ」が選択されています。

2 電源ボタン(🔌)を押してコースを選ぶ

- 選んだコースの「コース表示ランプ」が点灯します。



電源ボタンを押すたびに
コースが切り替わります。



- コースは下記の3種類あります。

ほぐす

リズムカルにぎゅぎゅっと手で
もまれていたようなコース。

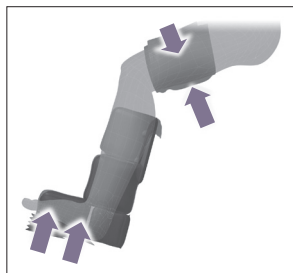


しぼる

脚全体をぎゅーっとしめつける
血行促進コース。



のぼす

足先でぐっとあげて足裏全体
を伸ばしたり、脚全体をもみ
ほぐすコース。

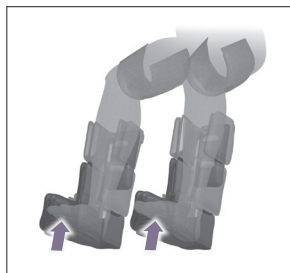


3 強さ選択ボタン を押して強さを変える

POINT

- 選んだ強さの「強さ表示ランプ」が点灯します。



強さ選択ボタンを押すたびに強さが切り替わります。

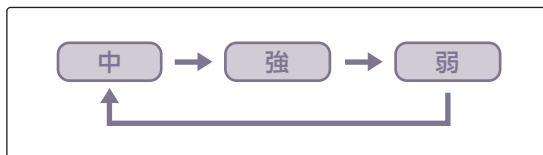


- 使い始めは弱で使用し、使い慣れてから強さを調整してください。
- マッサージ中でも変更できます。

4 ヒーターを使うときは本体動作中にヒーターボタン を押す

- ヒーターのランプが点灯し、つちふまずのヒーターがあたたかくなります。
- 再度押すとオフになります。

※ヒーターのみでは使用できません。

5 停止ボタン を押して動作を停止する

電源ボタン  を押し、コースの切り替えで停止することもできます。(▶P.8参照)

《タイマーについて》

- 電源を入れてから約15分で自動的に運転が停止します。

ご注意


- 足を入れたまま、商品を動かさないでください。事故やけがのおそれがあります。
- 足を入れたまま、本体の上で立たないでください。故障や事故の原因になります。

使用例


⚠️ ご注意

- 本体を傾けたり、寝かせる際は床などをこすらないようにご注意ください。傷をつけるおそれがあります。


本体裏のスタンドをおこすことで、本体を手前側にかたむけてよりリラックスした姿勢で使用することができます。

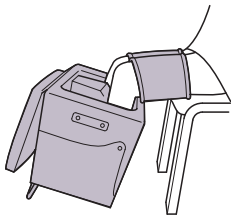

スタンドを立てて
足の角度を変えて

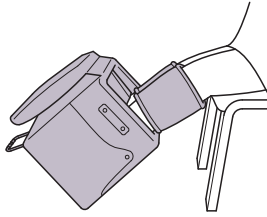


ひざをのばすと
ひざに巻いてマッサージできます

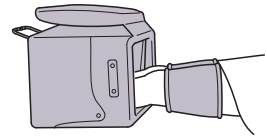


本体を寝かせて
マッサージ

スタンド使用時のご注意

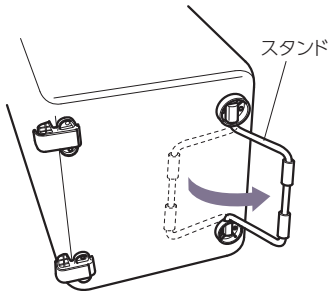

1. スタンドを完全に止まるまで起こす

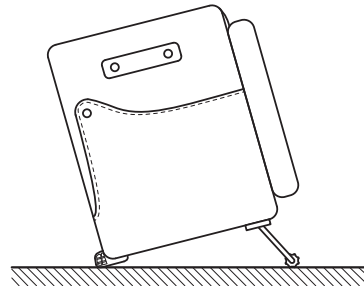

2. ゆっくりと起こし本体は手前にかたむける

⚠️ ご注意


- スタンドは、完全に止まるまで引き起こしてください。
中途半端に引き起こした状態で使用すると、使用中に倒れてけがや事故の原因になります。
- スタンドをおこした状態で、体重をかけたり、座ったりしないでください。
故障や事故の原因になります。

👤 使いかた

本体に座板をかぶせれば、スツールとして使用することができます。


⚠️ ご注意

- スツール使用時には、本体裏のスタンドを戻して使用してください。スタンドが破損して、けがや事故の原因になります。

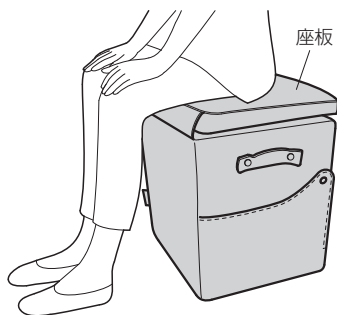

移動時のご注意

本品を移動の際は、ACアダプターを抜き、ふとももエアバッグを収納してから、両サイドの持ち手をしっかりと持って移動してください。

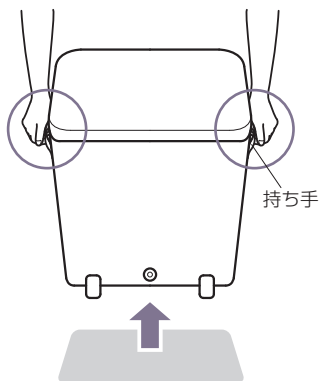

⚠️ ご注意

- 本体を引きずって移動させないでください。

お手入れ

内カバー

- 内カバーを取り外し、洗濯絵表示に従って洗ってください。


内カバーの外し方

内カバーの取付けファスナーをはずし、底面前後の面ファスナーをはがして、内カバーを本体から外してください。



内カバーの取付け方

内カバー底面前後の面ファスナーを本体底面の面ファスナーに合わせながら内カバーを本体に入れ、取付けファスナーを付けてください。

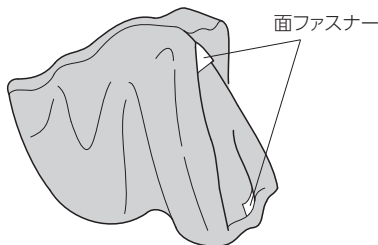

本体

- やわらかい布でから拭きしてください。
- 汚れがひどいときは、ぬるま湯でうすめた中性洗剤にやわらかい布を浸して、よく絞って拭き、最後にから拭きしてください。
- 変色などの防止のため、シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。
- 年に一度は電源プラグ(金属部分)をから拭きしてください。(絶縁劣化防止のため)


別売品について

内カバーは消耗品です。汚れがひどくなったり、破れた場合はアテックス直販サイトでお買い求めください。

ATEX direct (アテックスダイレクト)

<https://www.atexdirect.jp/>

ご購入や質問などはアテックスのホームページ、または、フリーダイヤルまでお問い合わせください。(フリーダイヤル：0120-951-719)

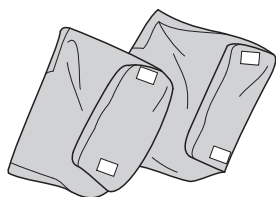

品名：マッサージツール リュクス専用内カバー

品番：AX-HZ179

希望小売価格(税別)：3,000円

保管について

- 汚れやホコリを取ったあと、直射日光をさけ、湿気の少ないところに保管してください。
- 長期間ご使用にならないときは、カバーなどをかけてホコリがつかないようにしてください。
- ふとももエアバッグは必ず接続プラグを本体から抜いて、接続ホースが折れ曲らないように本体内に収納してください。
- 幼児やお子様の手の届くところには保管しないでください。
- 廃棄は必ず各都道府県、市町村の指示にしたがってください。
- コード類はねじれをほどこいて保管してください。

故障かなと思ったら

修理に出す前にもう一度点検してください。それでも正常に動作しないときはお買上げの販売店に修理を依頼してください。絶対に分解したり、修理改造はしないでください。異常動作をしてけがや事故のおそれがあります。

動かない	ACアダプターが抜けていませんか？ ACアダプターをコンセントに差し込んでもう一度操作してください。
	スイッチは正しく動作していますか？
ふとももエアバッグが動かない	差込口に接続プラグをもう一度パチッと音がするまで差し込んでください。
運転中に停止した	スイッチを押してから、約15分経過するとタイマー機能がはたらき、自動的に運転が停止します。故障ではありません。スイッチを押すと運転を再開します。
異音がる音が大きい	マッサージの振動音は構造上発生するものですので、異常ではありません。



仕様

類別	機械器具77 バイブレーター
医療機器分類	管理医療機器
一般的名称	家庭用電気エアマッサージ器 (JMDNコード 34663000)
販売名	マッサージスツール リュクス
商品番号	AX-HXT179
医療機器認証番号	301AABZX00020000
使用目的または効果	あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用すること。 [●疲労回復 ●血行をよくする ●筋肉の疲れをとる ●筋肉のこりをほぐす ●神経痛・筋肉痛の痛みの緩解]
電気定格	AC100V 50/60Hz 30W (ヒーター 8W)
アダプター定格	入力 AC100-240V 50/60Hz 1300mA、出力 DC12V 3A
タイマー	15分自動オフ
製品サイズ	(約) W400×L340×H480 (mm)
対象サイズ	ふくらはぎ周囲45cm以下、足29cm以下、ふともも周囲57cm以下
製品重量	約9.5kg
素材	本体 構造部材：合板 クッション材：ウレタンフォーム 張り材：ポリエステル100%
ヒーター温度	約50℃以下(最高)
生産国	中国
製造業者	ZHANGZHOU EASEPAL INDUSTRIAL CORPORATION (中国)
製造販売業者	株式会社 アテックス

♡ 保証とアフターサービス

- 1 本製品の保証書は、下記に添付しています。保証書は必ず「お買上げ年月日」と「販売店名」など、所定事項の記入および記載内容をよくお読みのと、大切に保管してください。
- 2 保証期間は、お買上げ日より1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは保証書をご提出のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。
- 3 保証期間経過後の修理につきましては、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 4 弊社は「マッサージスツール リュクス」の補修用性能部品の最低保有期間を、製造打切後最低3年間としています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店、または下記に明記しておりますカスタマーサービス課までお問い合わせください。

保証書

本製品は厳密な検査を経て出荷されたものです。
お客様の正常な使用状態で万一故障した場合は、保証書に記載された期間、下記保証規約により無料修理をお約束いたします。修理は必ず本書を添えてご依頼ください。



〒547-0014 大阪市平野区長吉川辺3-3-24
TEL:06-6799-8100(代) FAX:06-6799-8118

品名 / 型番	マッサージスツール リュクス / AX-HXT179		
お買上げ年月日*	年 月 日	保証期間	お買上日より1年 本体
*お客様	お名前	*販売店	
	ご住所		
	TEL:() -		

*欄に記入のない場合、本書は無効となることがありますので、必ず記入の有無をご確認ください。

保証規約

- 1 保証期間中であっても以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障などについては本保証書は適用されません。
 - ・取扱上の不注意、誤った使用方法
 - ・天災、火災などによる故障または損傷
 - ・お買上げ後の転居等による輸送、移動、落下など
 - ・保存上の不備
 - ・弊社または弊社の指定した事業所以外で行われた修理、改造
 - ・本製品本来の使用目的以外の使用
 - ・一般家庭以外（例えば業務用の長時間使用、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷
- 2 運賃諸掛り費用は原則としてお客様にてご負担願います。
- 3 無料保証期間はご購入の日から1年間です。
- 4 保証の適用されない故障および保証期間経過後の故障については、有料で修理いたします。
- 5 保証書の再発行はいたしません。
- 6 本書のご提示がない場合や無料保証期間を過ぎた場合は、有料修理になります。
- 7 本書は日本国内においてのみ有効です。

本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。



<https://www.atex-net.co.jp/>

株式会社アテックス 大阪物流センター
〒595-0074 大阪府泉大津市小津島町6-11

■修理・アフターサービスについてのご相談・お問い合わせは



カスタマーサービス課

0120-486-505

受付時間 平日9:00~17:00(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)