

METABOLAN S

製造番号

取扱説明書

保証書付

保管用

メタボランS AX-KX130

もくじ

安全上のご注意	2～3
各部の名称	4～5
ご使用前の準備	6～7
ご使用方法	8～10
保管について	10
お手入れ	11
故障かなと思ったら	11
仕様	11
保証とアフターサービス	裏表紙



※デザイン仕様を一部変更している場合があります。ご了承ください。

このたびはAX-KX130をお買上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
なお、この取扱説明書には保証書がついています。
お読みになられたあとも、大切に保管してください。

ATEX

安全上のご注意

ご使用になる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために必ずお守りいただくことを次に説明しています。

警告表示の意味

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で示しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「損害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



禁止を促す記号

禁止



強制を促す記号

必ず守る



警告



次の人は使用しないでください。
症状を悪化させるおそれがあります。

- ・生理中や妊娠している人
- ・酒気を帯びている人
- ・安静を必要とする人
- ・幼児や自分の意思表示ができない人
- ・身体の不自由な人



幼児や小さいお子様に使用させたり、本体で遊ばせたり、上にのせたりしないでください。

思わぬ事故の原因になります。



使用前に装着面の縫製破れがないかを確認してください。

破れている場合は使用しないでください。
また、カバーを外して使用しないでください。
思わぬ事故の原因になります。



改造はしないでください。また、修理技術者以外の人には、絶対に分解したり修理をしないでください。
火災・感電・けがの原因になります。



指定された場所には使用しないでください。
事故や体調不良の原因になります。



運動(トレーニング)以外の用途に使用しないでください。
事故やけがの原因になります。



電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしないでください。
感電・ショート・火災の原因になります。



自分で意思表示のできない方や身体の不自由な方には使用させないでください。
けがの原因になります。



他の治療器と同時に使用しないでください。
健康を害するおそれがあります。



医師に運動を禁じられている人は使用しないでください。
事故・感電・低温やけどのおそれがあります。



たこ足配線など定格を超える使い方や交流100V以外では使用しないでください。
発熱、火災などの原因になります。



次のような人は必ず医師とご相談の上で使用してください。
事故や健康を害するおそれがあります。

- ・ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人
- ・血圧に異常のある人
- ・悪性腫瘍のある人
- ・心臓に障害のある人
- ・妊娠初期の不安定期または出産直後の人
- ・背骨に異常のある人や曲がっている人
- ・糖尿病などによる高度な末しょう(梢)循環障害からくる知覚障害のある人
- ・皮膚に創傷のある人
- ・接触性皮膚炎など、皮膚に既往症のある人
- ・安静を必要としている人や体調がすぐれない人
- ・骨粗しょう症の人、せきついの骨折、ねんざ、肉離れなど、急性[とう(疼)痛性]疾患の人
- ・体温38℃以上(有熱期)の人
- 例:急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期、衰弱しているとき
- ・その他、医療機関で治療中の人



使用中身体に異常を感じたときはすぐに使用を中止し、医師に相談してください。
健康を害するおそれがあります。



故障を発見したときはすぐに使用を中止し電源を切ってください。
事故やけがの原因になります。



停電のときはすぐに電源を切ってください。
感電・ショート・火災の原因になります。

! **必ず守る**
お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。
感電やけがの原因になります。

! **必ず守る**
次の場所には使用しないでください。
・首、顔、頭の部分
・胸部及び心臓の近く
・粘膜、肘・膝などの関節
・手術後の傷跡の上・傷口、にきびや吹出物で炎症を起こしている部位
・皮膚炎症を起こしている部分

! 注意

! **禁止**
浴室など湿気の多い場所では使用しないでください。また、水などの液体がかからないようにしてください。
感電や故障の原因になります。

! **禁止**
本体の上に立ったり、座ったりして使用しないでください。
故障や事故の原因になります。

! **禁止**
本体に強い衝撃や荷重をあたえないでください。
故障や事故の原因になります。

! **禁止**
使用中は眠らないでください。
無意識での使用は身体への異常やけがの原因になります。

! **禁止**
布団の中や、毛布などをかぶせて使用しないでください。
本体内部が高温になる可能性があります。

! **禁止**
食後30分以内のご使用はおやめください。
体調不良の原因となります。

! **禁止**
高温のものや火気の近くでは使用しないでください。
変形や故障の原因、発火の恐れがあります。

! **禁止**
人体以外には使わないでください。
事故や故障の原因になります。

! **禁止**
電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込がゆるいときは使用しないでください。
感電・ショート・火災の原因になります。

! **必ず守る**
1回の使用は15分以内にしてください。また、同一箇所への連続使用は避けてください。
長時間の連続使用は、必要以上の刺激となり逆効果やけがの原因になります。

! **必ず守る**
電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端のプラグを持って引き抜いてください。
感電・ショート・発火の原因になります。

! **必ず守る**
使用時以外はACアダプターをコンセントから抜いてください。
絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。

! **必ず守る**
ACアダプターは指定された付属のものを使用してください。
また、付属のアダプターはほかの商品には使用しないでください。

MODELNo IVP2400-1300P


他のアダプターを使用すると故障の原因になります。

※本製品は医療機器ではありません。


各部の名称

部品がすべてそろっているか、確認してください。


本体 コントローラー
(コードで本体とつながっています)

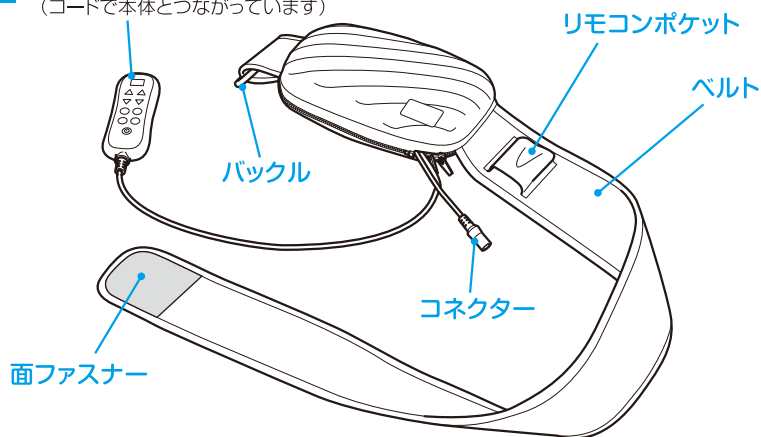

本体裏側

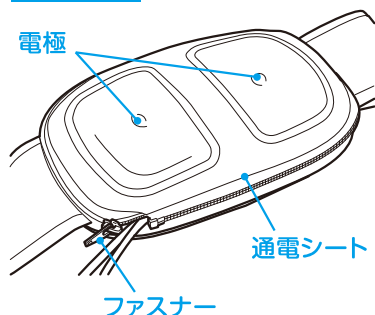

付属品

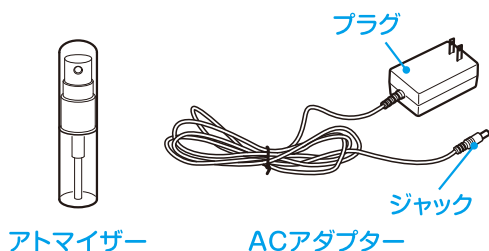

電極について

本製品では、「振動」と「EMS」の2種類のトレーニングをおこなうことができます。「振動」では、本体が振動することによって、筋肉を刺激します。「EMS」では、電気刺激によって、筋肉を収縮させます。また、同時モードで「振動」と「EMS」を同時に動かして使用することもできます。

「振動モード」


衣類の上に装着してください。

「EMSモード」「同時モード」

両方の電極が身体に直接触れるよう、ウエストやヒップなどに装着してください。

- 同時モードでは、「EMS」と「振動」が同時に作動します。同時に使用することで、「EMS」「振動」単独よりも効果的に筋肉に刺激を与えます。

コントローラー

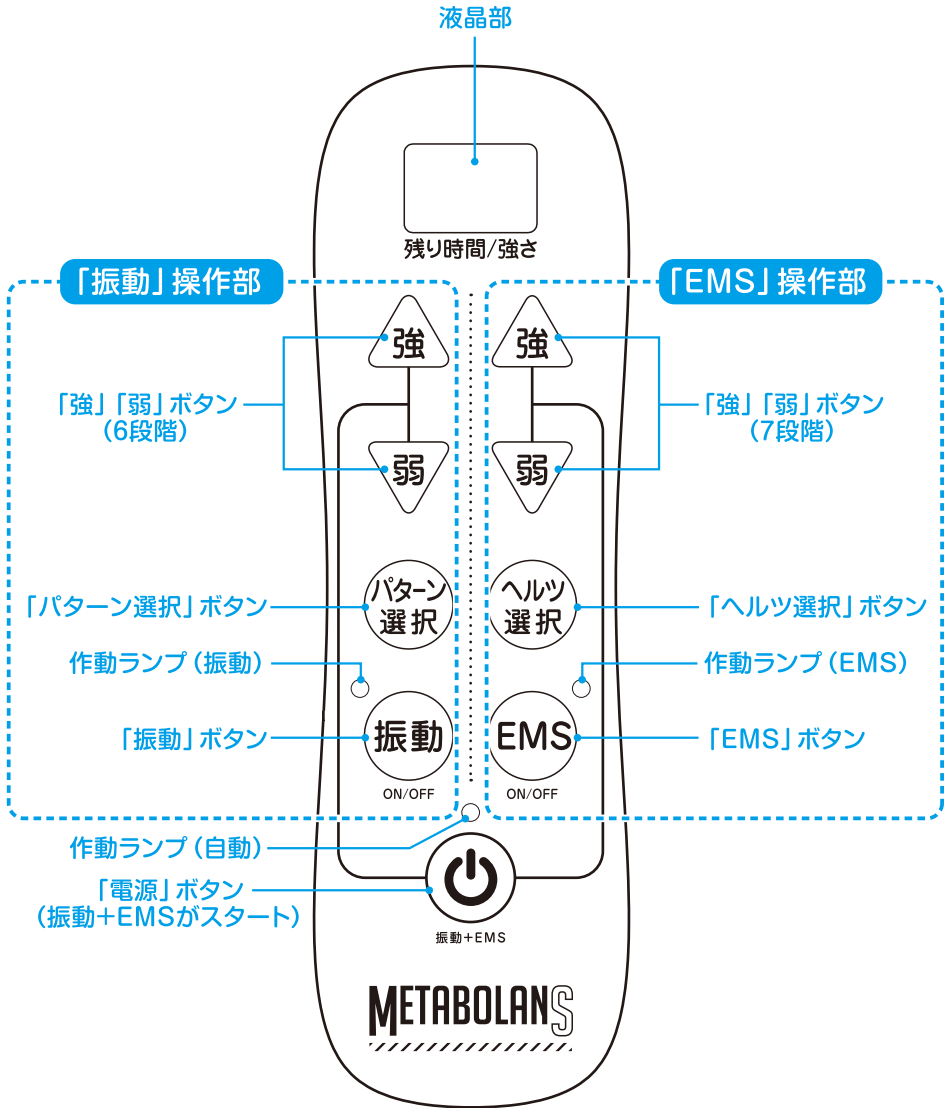


ご使用前の準備

本体の準備

STEP
1

ACアダプターのジャックと本体の
コネクターをつなぎます。

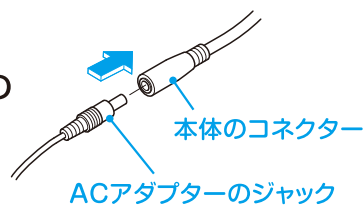


注意

・まっすぐ奥まで差し込んでください。

STEP
2


ACアダプターのプラグを家庭用
コンセントに差し込みます。

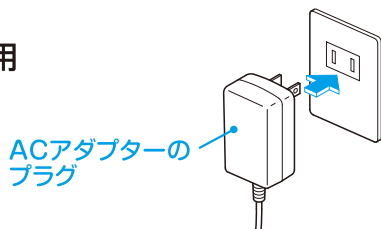

STEP
3

EMSをご使用の際は、付属の
アトマイザーに水を入れて体
の装着部の表面にかかる1回
吹きかけ、表面を湿らせると
通電がよくなります。

吹きかけすぎた場合は、タオルなどで
ふきとってください。

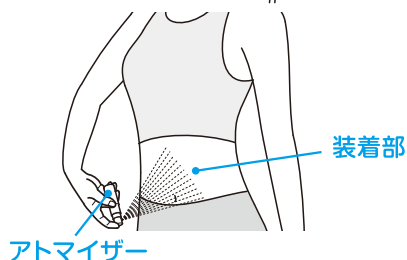


装着のしかた

STEP
1

振動モードのみ使用のときは、衣類の上に装着し、EMSモー
ド、同時モードの使用のときは直接肌に装着してください。


STEP
2

ベルトの端を持ち、
バックルに通します。

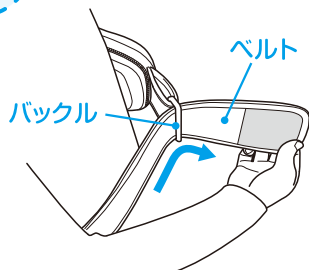


STEP
3

ベルトを折り返し
面ファスナーを留めます。

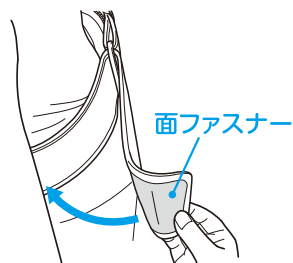

※下記以外の場所には使用しないでください。

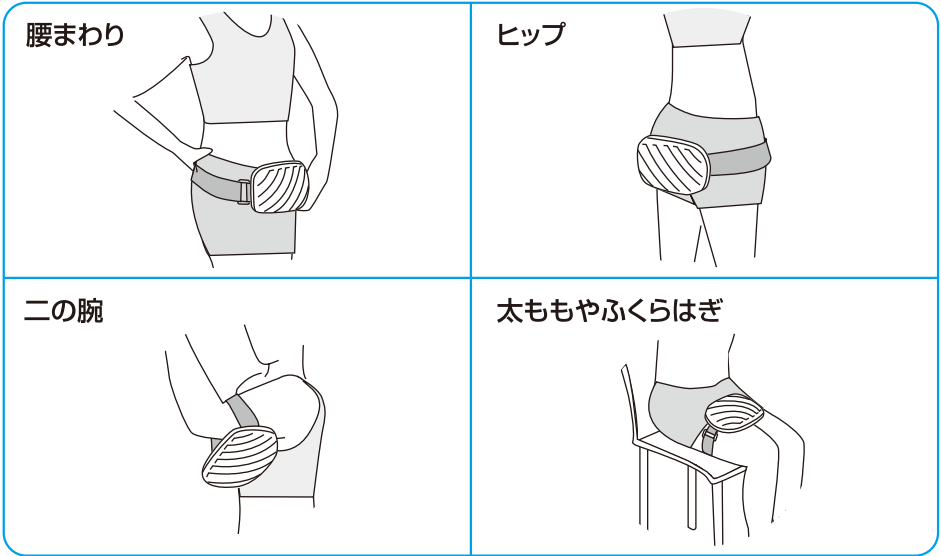

警告


●次の場所には使用しないでください。

- ・首、顔、頭の部分
- ・胸部及び心臓の近く
- ・粘膜、肘・膝などの関節
- ・手術後の傷跡の上・傷口、にきびや吹出物で炎症を起こしている部位
- ・皮膚炎症を起こしている部分

通電シートの取り外しかた

- ・通電シートは、取り外して洗うことができます。
- ・取り付けは、逆の手順で行ってください。

STEP 1 ファスナーを開きます。

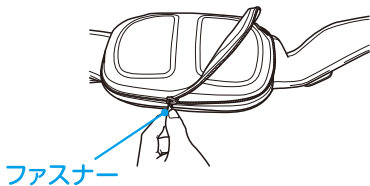

STEP 2 通電シートを取り外します。



ご使用方法

振動・EMSが同時に作動する「同時モード」、
振動のみ作動する「振動モード」、EMSのみ作動する「EMSモード」が用意されています。

振動を使用する

STEP 1 「ご使用前の準備」(P.6~7)にしたがって装着します。
※振動モードのみを使用する時は、衣類の上に装着してください。


STEP 2 コントローラーの(電源) ボタンを押します。
同時モードが始まります。
※「同時モード」運転中は作動ランプ(自動)が点灯します。
※約15分経過すると自動的に電源が切れます。
※液晶表示部には15分からの残り時間(分)が、カウントダウン表示されます。

STEP 3 同時モード運転開始後、
コントローラーの(振動) ボタンを押すと振動モードに切替わります。
※「振動」運転中は作動ランプ(振動)が点灯します。
※運転中に(振動) ボタンを押すと運転が中断され、再度(振動) ボタンを押すと運転を再開します。

●(振動) 強(弱) ボタンで振動の強さを1から6の間で変更することができます。
※強さ変更時には、液晶表示部に数秒間、現在の強さが表示され、その後は残り時間の表示にもどります。

●(パタン) ボタンでパターンを変更することができます。
※パターンは3種類あり、(パタン) ボタンを押すごとに2→3→1の順に切り換ります。(くり返し)
振動動作時はパターン1に設定されます。
※パターン変更時には、液晶表示部に数秒間、現在のパターンが表示され、その後は残り時間の表示にもどります。

STEP 4 運転を終了するにはもう一度(振動) ボタン又は(電源) を押します。

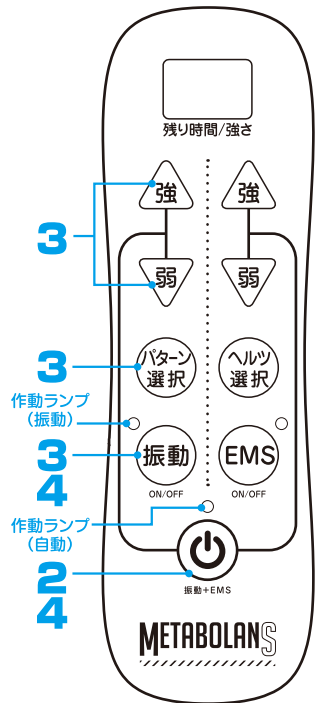

EMSを使用する

STEP
1

「ご使用前の準備」(P.6~7)にしたがって装着します。

※両方の電極が、直接身体に接触するように装着してください。

STEP
2

コントローラーの(⏻)ボタンを押します。
同時モードが始まります。

※「同時モード」運転中は作動ランプ(自動)が点灯します。

※約15分経過すると自動的に電源が切れます。
※液晶表示部には15分からの残り時間(分)が、カウントダウン表示されます。

STEP
3

同時モード運転開始後、
コントローラーの(EMS)ボタンを押すとEMSモードに切替わります。

※「EMS」運転中は作動ランプ(EMS)が点灯します。

※運転中に(EMS)ボタンを押すと運転が中断され、再度(EMS)ボタンを押すと運転を再開します。

●EMS(強/弱)ボタンでEMSの強さを1から7の間で変更することができます。

※強さ変更時には、液晶表示部に数秒間、現在の強さが表示され、その後は残り時間の表示にもどります。

●(ヘルツ選択)ボタンでヘルツを変更することができます。


※ヘルツは3種類あり、(ヘルツ選択)ボタンを押すごとに2→3→1の順に切り換ります。

EMS動作時にはパターン1に設定されます。

※ヘルツ変更時には、液晶表示部に数秒間、現在のヘルツが表示され、その後は残り時間の表示にもどります。

STEP
4

運転を終了するにはもう一度(EMS)ボタン又は(⏻)を押します。

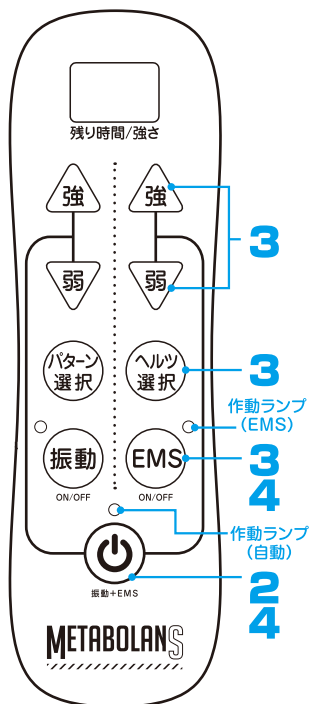

ご使用方法

振動とEMSを同時に使用する

同時モードでは、「振動」と「EMS」が同時に作動します。
同時に使用することで、「振動」「EMS」単独よりも効果的に筋肉に刺激を与えます。

STEP 1 「ご使用前の準備」(P.6～7)にしたがって装着します。

※両方の電極が、直接身体に接触するように装着してください。





STEP 2 コントローラーの  ボタンを

押します。
「振動」「EMS」ともに同時モードで動作します。

※「同時モード」運転中は作動ランプ(自動)が点灯します。

※約15分経過すると自動的に電源が切れます。

※液晶表示部には15分からの残り時間(分)がカウントダウン表示されます。

●振動   ボタンで振動の強さを1から6の間で、EMS   ボタンでEMSの強さを1から7の間で変更することができます。

※強さ変更時には、数秒間液晶表示部に現在の強さが表示され、その後は残り時間の表示にもどります。

STEP 3 運転を終了するにはもう一度


 ボタンを押します。

※同時モードをご使用中に  ボタン、または

 ボタンを押すと、

同時モードは終了し、『振動』または『EMS』に切り替わります。

※「振動」または「EMS」動作時に反対の  または  ボタンを押すと、同時に使用することができます。この場合、パターンやヘルツの選択が可能です。

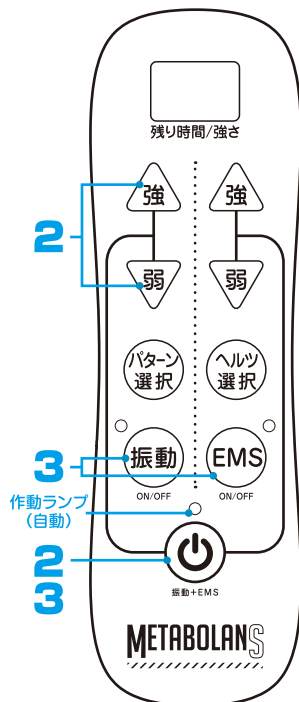

保管について

- 汚れやホコリを取ったあと、湿気の少ないところに保管してください。
- 長期間ご使用にならないときは、カバーなどをかけてホコリがつかないようにしてください。
- 子供の手の届くところには保管しないでください。
- 廃棄は必ず各都道府県、市町村の指示にしたがってください。


お手入れ

- 手入れの際はACアダプターをコンセントから抜いてください。又濡れた手で抜き差ししないでください。
- ACアダプターの取り外しは、コードに無理な力がかからないようにしてください。
- 中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭いて、自然乾燥させてください。
- 通電シートは、本体から取り外し、中性洗剤を溶かしたぬるま湯で表面がキズつかないようにかるく手洗いしてください。
※手洗いたあとは、日陰に干し、完全に乾いてから本体に取り付けてください。
- 保管の場合は、直射日光が長時間あたるところ、ストーブの近く、多湿のところは避けてください。
- 子供の手の届くところには保管しないでください。
- 廃棄は必ず各都道府県、市町村の指示に従ってください。

故障かなと思ったら

EMSの刺激がない	通電シートが本体からはずれていませんか？ 通電シートを正しく取り付けてご使用ください。
動作しない (全ての機能)	ACアダプターが抜けていませんか？ ACアダプターをコンセントに差込んで再度操作してください。
	連続して使用していませんか？ ご使用は1回15分以内にしてください。モーターの温度が高くなり、サーモスタット(安全装置)が働き、動作が停止する場合があります。

処理後なお異常が解決しない場合は、直ちに使用を中止し、事故防止のため必ず販売店に相談してください。

 警告	絶対に分解したり修理改造は行わないでください。 異常動作をしてケガや事故の恐れがあります。
---	--

仕様

商品名	メタボランS	定格消費電力	30W
商品番号	AX-KX130	製品サイズ	(約)W150×L1250×H90mm(bk) (約)W150×L1100×H90mm(pk)
素材	生地：ポリエステル 中材：ウレタンフォーム 本体：PU 生地	ベルト対応サイズ	最大105cm(bk) 最大90cm(pk)
		製品重量	約1kg(アダプター含まず)
		生産国	台湾
ACアダプター入力	AC100V(50/60Hz 両用)	製造販売業者	株式会社 アテックス

保証とアフターサービス

- 1 本製品の保証書は、下記に添付しています。保証書は必ず「お買上げ年月日」と「販売店名」など、所定事項の記入および記載内容をよくお読みのもと、大切に保管してください。
- 2 保証期間は、お買上げ日より1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは保証書をご提出のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。
- 3 保証期間経過後の修理につきましては、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 4 弊社は「メタボランス」の補修用性能部品の最低保有期間を、製造打切後最低3年間としています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店、または下記に明記しておりますカスタマーサービス課までお問い合わせください。

保証書

本製品は厳密な検査を経て出荷されたものです。お客様のご正常な使用状態で万一故障した場合は、保証書に記載された期間、下記保証規約により無料修理をお約束いたします。修理は必ず本書を添えてご依頼ください。

 株式会社アテックス

〒547-0014 大阪市平野区長吉川辺3-3-24
TEL:06-6799-8100(代) FAX:06-6799-8118

品名 / 型番	メタボランス / AX-KX130		
お買上げ年月日*	年 月 日	保証期間	お買上げ日より1年 本体
*お客様 お名前 様 ご住所 TEL:() -	*販売店		

*欄に記入のない場合、本書は無効となることがありますので、必ず記入の有無をご確認ください。

保証規約

- 1 保証期間中であっても以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障などについては本保証書は適用されません。
 - ・取扱上の不注意、誤った使用方法
 - ・天災、火災などによる故障または損傷
 - ・お買上げ後の転居等による輸送、移動、落下など
 - ・保存上の不備
 - ・弊社または弊社の指定した事業所以外で行われた修理、改造
 - ・本製品本来の使用目的以外の使用
 - ・一般家庭以外（例えば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷
- 2 運賃諸掛り費用は原則としてお客様にてご負担願います。
- 3 無料保証期間はご購入の日から1年間です。
- 4 保証の適用されない故障および保証期間経過後の故障については、有料で修理いたします。
- 5 保証書の再発行はいたしません。
- 6 本書のご提示がない場合や無料保証期間を過ぎた場合は、有料修理になります。
- 7 本書は日本国内においてのみ有効です。

本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

 株式会社アテックス

<http://www.atex-net.co.jp/>

株式会社アテックス 大阪物流センター
〒595-0074 大阪府泉大津市小津島町6-11

■修理・アフターサービスについてのご相談・お問い合わせは

フリーダイヤル カスタマーサービス課



0120-48-6505

(携帯・PHS・IP電話からは)06-6799-8100

受付時間 平日9:00～17:00 (土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)