

電池の取り扱いについて

この電池は、リチウム、有機溶媒など可燃性物質を内蔵しており、使用形態や使用環境、保存環境などによって、電池が漏液、発熱、破裂、発火したり、けがや機器故障の原因となるので次のことを必ず守ること。

危険	<ul style="list-style-type: none"> 電池を乳幼児の手に届く所に置かない。飲み込んだ場合は、死に至ることがあり直ちに医師に連絡し、指示を受ける
警告	<ul style="list-style-type: none"> 充電、分解、変形、加熱、火に入れるなどしない。向きを逆に入れない。 電池の液が目に入った場合には、すぐにきれいな水で洗い流し、医師の治療を受ける。 電池から漏れた液をなめた場合には、すぐにうがいをして医師に相談する。 ショートさせたり、ネックレスなど金属製のものと一緒には携帯したり保管しない。 この電池に漏液や異臭があるときは、漏れた液に引火するおそれがあるので、すぐに火気から遠ざける。
注意	<ul style="list-style-type: none"> 直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管する。 長期間機器を使用しない場合には、機器から電池を取り出す。 電池を水などで濡らさない。 電池を落下させたり、強い衝撃を与えたり、投げつけたりしない。

保管・お手入れのしかた

保管方法

収納ケースに貼る

- ジェルシート同士を接触させないでください。



お手入れ方法

注意	<ul style="list-style-type: none"> お手入れは必ず電源を切ってから行ってください。 本体を水洗いしないでください。 シンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しないでください。 ケース内は清潔に保ってください。 高温・多湿な場所で保管しないでください。 小さなお子様やペットが触れられる場所に保管しないでください。
-----------	---

本体のお手入れ

- ①本体が傷付かないよう柔らかい布で汗や湿気を丁寧に拭き取ってください。
- ②汚れた場合はぬるま湯で希釈した中性洗剤に柔らかい布をひたし、よく絞ってから表面の汚れを丁寧に拭き取ってください。

ジェルシートのお手入れ

ジェルシートの粘着面が汚れて貼りつきにくくなったら、下記の手順でお手入れしてください。

- ①指先に水滴をつけてジェルシートの粘着面をこすり、汚れを取り除いてください。
- ②十分に水をさって、粘着面を上にし、風通しの良い日陰で自然乾燥させてください。

ジェルシートの交換

注意	<ul style="list-style-type: none"> ジェルシートは消耗品です。粘着面が傷んだ時は、別売品をお求めください。
-----------	---

- ①ジェルシートを押さえ、本体を引っ張って取り外す。
- ②ジェルシートの電極と、本体にある2ヶ所の電極をはめて取付ける。
※電極が確実にハマっているか確認してください。



故障かなと思ったら

電源が入らない
電池が正しく取り付けられていますか？ 電池交換のしかたに従って、正しく取り付けてください。
電池が消耗していませんか？ 新品の電池に交換してください。
指定された電池を使っていますか？ コイン形リチウム電池CR2032を使用してください。
電気刺激を感じない
電源が入っていますか？ 電源ボタンを押してください。
ジェルシートが本体から外れていませんか？ 2ヶ所の電極を確実に取り付けてください。
ジェルシートが肌に密着していますか？ 左右の粘着面を肌に密着させてください。
ジェルシートの粘着面が傷んでいませんか？ 新しいジェルシートに交換してください。
ジェルシートの粘着面がゴミやホコリで汚れていませんか？ ジェルシートのお手入れに従って粘着面を洗浄してください。
電気刺激が弱い
レベル設定が低くありませんか？ +ボタンを押し、レベルを上げてください。
電池残量が少なくなっていますか？ 新品の電池に交換してください。
ジェルシートの粘着面が傷んでいませんか？ 新しいジェルシートに交換してください。
ジェルシートの粘着面がゴミやホコリで汚れていませんか？ ジェルシートのお手入れに従って粘着面を洗浄してください。
電気刺激が強い
レベル設定が高くありませんか？ -ボタンを押し、レベルを下げてください。
ジェルシートが肌に密着していますか？ 左右の粘着面と肌の間に隙間がないように貼り付けてください。
電気刺激が途中で止まる
10分以上使用していませんか？ タイマーが働き、自動停止します。故障ではありません。

仕様

販売名	ルルド シェイプアップリボン
品番	AX-KXL5200
重量	約30g(本体+ジェルシート+電池1セット分)
サイズ	(約)W120×L70×H10(mm)
電池の種類	コイン形リチウム電池 CR2032
電源電圧	DC3V
素材	本体：ABS樹脂 ジェルシート：PET、カーボン
連続使用時間	約120分
タイマー	約10分自動オフ
出力周波数	モード1：3Hz(ヘルツ) モード2：30Hz(ヘルツ)
生産国	中国

※本製品は医療機器ではありません。

アフターサービス

- 1 保証書は必ず「お買上げ年月日」と「販売店名」など、所定事項の記入および記載内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- 2 保証期間は、お買上げ日より3ヶ月です。保証期間中に修理を依頼される場合は保証書をご提出のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。
- 3 保証期間経過後の修理につきましては、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 4 弊社は「ルルド シェイプアップリボン」の補修用性能部品の最低保有期間を、製造打切後最低3年間としています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。
保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店、または下記に明記しておりますカスタマーサービス課までお問い合わせください。

リサイクルについて

使用済みのコイン形リチウム電池は地球環境保護のため、廃棄する時は各自自治体の取り決めに従ってください。

別売品


ジェルシートは消耗品です。粘着面(ジェル面)が傷んだときは、弊社別売品をお求めください。

純正品以外のジェルシートは使用しないでください。

純正品以外を使用して発生したトラブルについては、一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。

純正品の購入に関しては、お買上げの販売店、または(株)アテックスお客様ご相談窓口(裏表紙参照)まで、お問い合わせください。

販売名：ルルド シェイプアップリボン専用ジェルシート
品番：AX-KXL5201

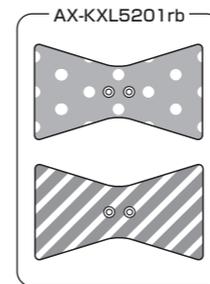

製造番号

保管用

取扱説明書

保証書付

ルルド シェイプアップリボン AX-KXL5200



EMS Machine
— SHAPE UP —
Ribbon
FROM LOURDES
— Beautiful BODY —

もくじ


安全上のご注意	1・2
各部の名称	2
ご使用方法	3~5
電池の取り扱いについて	6
保管・お手入れのしかた	7
故障かなと思ったら	8
仕様・アフターサービス	9
別売品	10
保証書	裏表紙

このたびはAX-KXL5200をお買上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。なお、この取扱説明書には保証書がついています。お読みになられたあとも、大切に保管してください。

ATEX

電池交換のしかた

- ① 硬貨を電池カバーの溝に当て、「OPEN」の方向に回す
- ② 電池カバーを取り外し、古い電池を取り出す
- ③ 電池の⊕マークが見える向きに新しい電池を入れる
- ④ 電池カバーをかぶせ、硬貨を使って図のように閉める

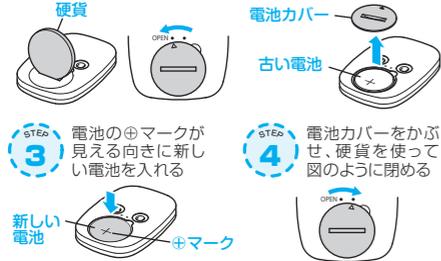

6

7

8

9

10

安全上のご注意 必ずお読みください。

いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

警告 人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容。

- 次の人は使用しないでください。
 - ・ 使用部位の肌に傷など異常のある人
 - ・ 体内埋（植え）込み型および装着型の医用電気機器（ペースメーカー、心電計など）を使用している人
 - ・ 幼児や小さいお子様
 - ・ 自分で意思表示のできない方や身体の不自由な人
 - ・ 医師に運動を禁じられている人
- 次のような部位には使用しないでください。
 - ・ 首、顔、頭の部分
 - ・ 胸部及び心臓の近く
 - ・ 粘膜、ひじ、ひざなどの関節
 - ・ 傷口や傷跡、整形手術をした部位や当日に脱毛処理をした部位
 - ・ にきびや吹出物で皮膚炎症を起こしている部分
 - ・ 生理中の腹部
- 他の治療器や美容機器、電気製品とは併用しないでください。
- 運動目的以外の使い方はしないでください。
- 改造や分解、修理はしないでください。
- 故障を発見したり、身に異常を感じた時は使用しないでください。
- 通電中、ジェルシートに金属を接触させないでください。
- 1日に2回(20分)以上使用しないでください。




- 次の人は使用前に医師に相談してください。
 - ・ 悪性腫瘍のある人
 - ・ 心臓に障害のある人
 - ・ 妊娠初期の不安定期から出産直後までの人
 - ・ 糖尿病などによる高度な末しょう（梢）循環障害による知覚障害のある人
 - ・ 体温38度以上（有熱期）の人
 - ・ 安静を必要とする人
 - ・ 脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性（とう疼）痛性疾患の人
 - ・ 血圧に異常のある人
 - ・ アレルギー体質、皮膚病およびアトピー性皮膚炎、敏感肌や接触性皮膚炎など、皮膚に既往症のある人

注意 人が障害を負う可能性及び、物的損害の発生が想定される内容。

- 浴室などの湿度の高いところで使用しないでください。
- 高温下や火気の近くで使用、保管しないでください。
- 本体に水などの液体をかけないでください。
- 本体を曲げたり、落としたり、強いショックを与えないでください。

各部の名称

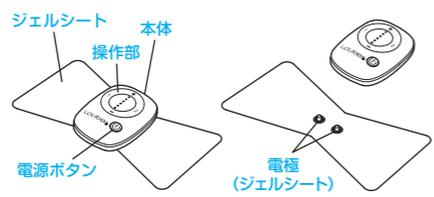

付属品

本体	2個
ジェルシート*	2枚
コイン形リチウム電池 CR2032 (おためし用)...	2個
収納ケース	1個
取扱説明書	1枚

*ジェルシートは消耗品です。粘着面が傷んだ時は、別売品をお求めください。



ご使用方法

- 1** 収納ケースから取り出し、フィルムをはがす
- 2** 使用部位（4頁参照）に貼る
ジェルシートを使用部位に貼りつけます。
 - ・ ジェルシートは左右の粘着面全面を皮膚に密着させてください。
 - ・ 新品のコイン形リチウム電池CR2032を使用した場合、約120分間使用できます。

注意


- ・ 貼る前に電源を入れなくてください。指先に通電すると強い痛みを感じます。
- ・ 貼る部位の汗をふき取ってください。

- 3** 電源を入れる
電源ボタンを押してください。
 - ・ 強度レベル1を表すLEDが点灯します。
 - ・ モード1、強度レベル1の状態からスタートします。

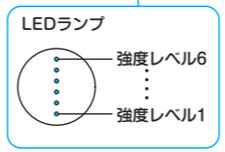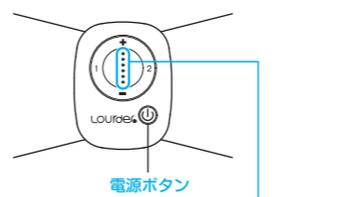

ご使用方法

使用部位

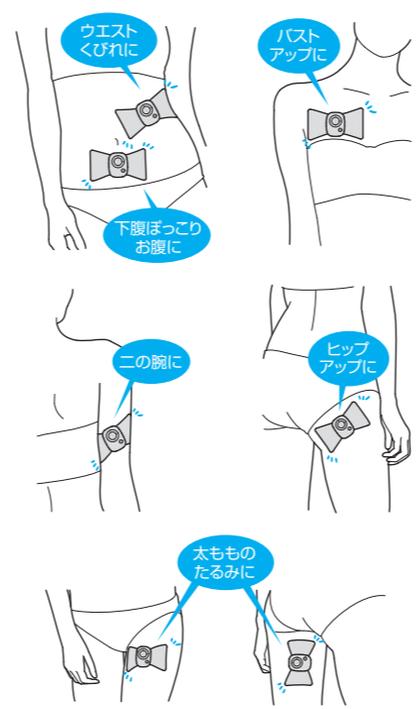


注意

- ・ お肌に異常が生じていないかよく注意してご使用ください。本品の使用によって発しん、発赤、かゆみなどの症状があらわれた時は直ちに使用を中止し、医師に相談してください。

ご使用方法

- 4** トレーニングモード、強度レベルを選ぶ
本体のボタンを押すと下記のように変化します。
 - ・ 初めてお使いのときは強度レベル1からお試ください。

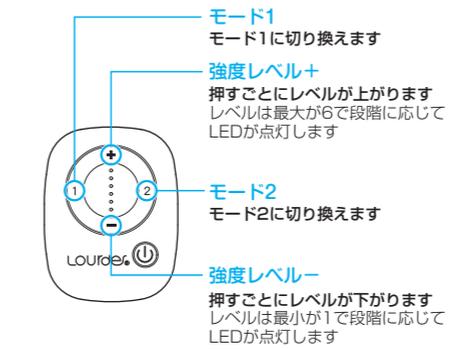

- 5** 電源を切る
電源ボタンを押してください。
 - ・ 約10分後にタイマーが作動し、自動的に電源が切れます。

- 6** ジェルシートを身体からはがす

注意

- ・ 必ず電源を切ってからはがしてください。指先に通電すると痛みを感じます。
- ・ ジェルシートを無理に引っ張ったり一部だけを持ってはがさないでください。

保証書

本製品は厳密な検査を経て出荷されたものです。お客様の正常な使用状態で万一故障した場合は、保証書に記載された期間、下記保証規約により無料修理をお約束いたします。修理は必ず本書を添えてご依頼ください。

株式会社アテックス
〒547-0014 大阪市平野区長吉1辺3-2-4
TEL: 06-6799-8100 (代) FAX: 06-6799-8118

品名/型番	ルルドシェイプアップリボン / AX-KXL5200
お買上げ年月日*	年 月 日
保証期間	お買上げ日より3ヶ月 本体
*お客様	お名前
	ご住所
*販売店	TEL:() -

*欄に記入のない場合、本書は無効となることがありますので、必ず記入の有無をご確認ください。

保証規約

1 保証期間中であつても以下の理由により発生した故障などについては本保証書は適用されません。	2 運賃諸掛り費用は原則としてお客様にて負担願います。
・ 天災、火災などによる故障または故障	3 無料保証期間はご購入の日から3ヶ月です。
・ お買上げ後の転居等による輸送、移動、落下など	4 保証の適用されない破損および保証期間経過後の故障については、有料で交換いたします。
・ 弊社または弊社の指定した事業所以外で行われた修理、改造	5 保証書の再発行はいたしません。
・ 本製品本来の使用目的以外の使用	6 本書のご提示がない場合や無料保証期間を過ぎた場合は、有料交換となります。
・ 一般家庭以外（例えば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障または損傷	7 本書は日本国内においてのみ有効です。

アテックスお客様ご相談窓口 受付時間 平日9:00~17:00
土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く

修理・使い方・お手入れなどのご相談、お問い合わせは
0120-48-6505 よくある質問、メールでのお問い合わせは
ホームページを活用ください
携帯・PHS-IP電話からは06-6799-8100 http://www.atex-net.co.jp/
株式会社アテックス 大阪物流センター 〒595-0074 大阪府東大阪市津島町6-11